

Краткое руководство к авторефрактометру «Speedy-k»



Поворот: Перемещается по вертикали.
Наклон влево/вправо: Перемещение влево/вправо.
Наклон вперед/назад: Перемещение вперед/назад.

Перемещение рычага джойстика и измерительной головки

Следующие операции позволяют вам легко найти глаз пациента



Автоматический режим измерения


1. Нажмите (QUICK)/4 и установите режим измерения на A]
2. Нажмите (R-K)/1 и выберите режим R-K. Следующее описание предназначено для тех случаев, когда выбран режим R-K - RK]. Выполняемые измерения (измерение рефракции, измерение центра кератометрии, измерение периферии кератометрии) различаются для каждого режима R-K. Подробную информацию об измерениях, выполняемых в каждом режиме R-K, смотрите на предыдущей странице.
3. Покажите пациенту, где ему сесть. Попросите пациента положить обе руки на колени. Отрегулируйте высоту стола или стула так, чтобы пациенту было удобно.



4. Поверните ручку регулировки высоты подставки для подбородка и совместите глаза пациента с направляющим кольцом.
5. Приложите лоб пациента к подставке для лба и плотно прижмите подбородок пациента к подставке для подбородка. Если подбородок не зафиксирован на месте, точное измерение невозможно.
6. Переместите рычаг джойстика, чтобы расположить измерительную головку таким образом, чтобы на экране отображался глаз пациента. Как только глаз пациента впервые появится на экране, переместите изображение зрачка в центр экрана. (Вы можете сначала измерить любой глаз).

Для вертикального направления:

Совместите отметку высоты головы с направляющим кольцом, расположенным на планке для подбородка.

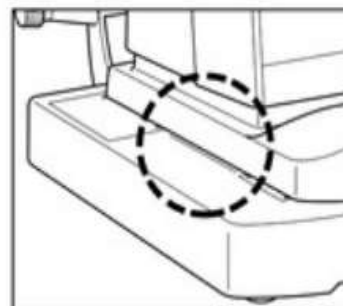

Для бокового направления:

Совместите край выдвижного сиденья с целевой линией на основании.

7. Прежде чем поместить световое пятно внутри метки выравнивания, перемещайте рычаг джойстика вперед и назад, чтобы сфокусировать болотное кольцо.
8. Как только кольцо прицеливания окажется в фокусе, перемещайте джойстик для точной настройки вертикального и горизонтального положения совместите световое пятно с центром болотного кольца.
9. Когда световое пятно попадет на отметку выравнивания, появится отметка, указывающая на автоматическое запотевание активирован. Если световое пятно и кольцо засветки не находятся в фокусе, выполните точную настройку, перемещая джойстик вперед и назад, пока не добьетесь фокусировки светового пятна и болотного кольца.
10. Когда "исчезнет", измерение начнется автоматически. Прибор определит причину колебаний измеряемых значений и автоматически завершит измерение, когда измеренные значения стабилизируются. Изображение на телевизионном мониторе будет таким, как показано на рисунке ниже. (На рисунке показан пример после измерения на правом глазу.) Если вы хотите провести повторное измерение на правом глазу, снова нажмите на переключатель измерения в этом месте.
11. Переместите прибор влево или вправо и выполните шаги с 6 по 10 для измерения на другом глазу. Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ Если включена настройка ПЕЧАТИ, прибор автоматически распечатает результаты измерений, как только они будут выполнены.