



Прибор для исследования поля зрения «Периграф ПЕРИКОМ» Краткое руководство по эксплуатации

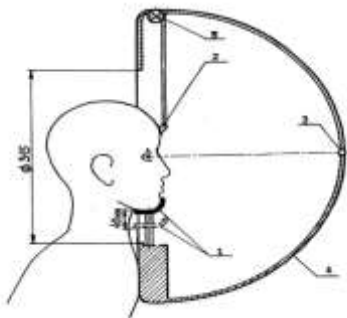

- Исследуемый глаз расположите на одной осевой линии по с центральной фиксации (красной) точкой.
- Вертикальное положение подбородника регулируется перемещением в двух вертикальных направляющих нажатием на кнопку, расположенную справа от вращающегося барабана подбородника. При первичном освоении работы с прибором, медперсонал обычно устанавливает подбородник под свой стандартный антропометрический размер напротив центрального красного фиксационного стимула и изменяет его при необходимости (при иных антропометрических размерах головы пациента).
- Глазные межцентровые расстояния 60, 64, 68 или 72 мм на подбороднике устанавливаются поворотом барабана на требуемое значение оцифровки. Необходимо помнить, что при исследовании левого глаза OS подбородок пациента устанавливается в правой ямке подбородника. При исследовании правого глаза OD подбородок пациента устанавливается в левой ямке подбородника.
- При подготовке исследования пациент должен быть предупреждён о том, что исследуемый глаз постоянно должен смотреть на фиксационный красный стимул (или группу фиксационных стимулов) и боковым зрением реагировать нажатием на кнопку пациента появление в поле зрения кратковременно предъявляемого светового объекта — светового стимула заданной яркости.
- Нерабочий глаз перед проведением периметрии глаза должен быть закрыт жёстким окклюдером или непрозрачной тканевой повязкой.
- При подготовке и проведении исследования соприкосновение подбородника и лобного упора должно производиться с использованием одноразовых стерильных марлевых салфеток, которые не должны мешать взгляду в процессе исследования

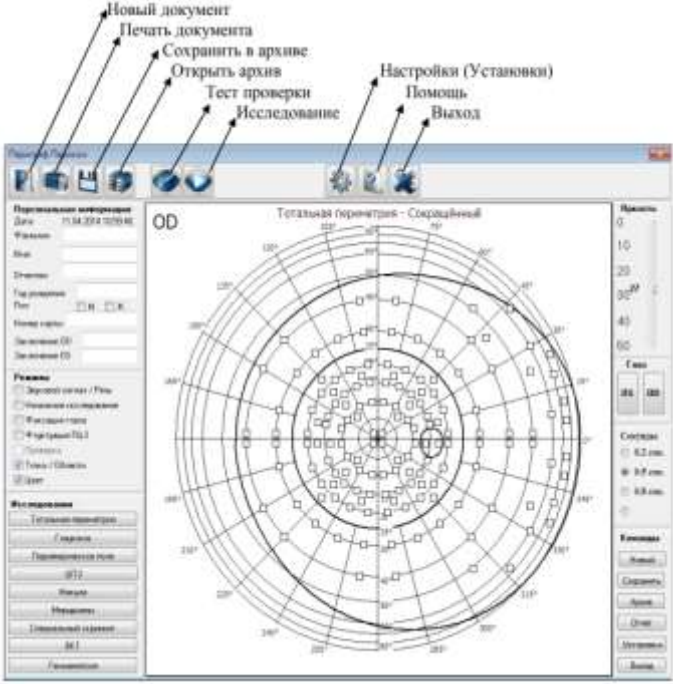

После нажатия на кнопку «Пуск», формат изображения кнопок меняется. Кнопки «Тест» и «Пуск», выделенные на рисунке красным цветом, исчезают. Вместо них появляются две другие кнопки «Пауза» и «Стоп»:



- ПАУЗА В ИССЛЕДОВАНИИ «ПАУЗА»**
Нажатие на эту кнопку приводит к временной остановке исследования. Воспользоваться ею можно, например, когда пациент устал и ему необходима небольшая пауза.
- ОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАНИЯ «СТОП»**
Нажатие на эту кнопку приводит к полной остановке исследования. После нажатия на эту кнопку, продолжить исследование, не представляется возможным и исследование нужно будет повторить сначала.
- НАСТРОЙКИ (УСТАНОВКИ)**
Программа дает возможность пользователю произвести некоторые специальные настройки — вывод на печать, установка тестов по умолчанию и др.
- ОТКРЫТЬ ПОМОЩЬ**
При нажатии на эту кнопку программа открывает настоящее руководство пользователя.
- ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ «ВЫХОД»**
После активации данной кнопки программа завершает свою работу.