

PHILIPS

Мониторы плода Avalon

Краткое руководство

Avalon FM20/FM30/FM40/FM50, версия F.0 и более поздние

Перед началом мониторинга плода следует подтвердить сохранность жизненных функций плода независимыми методами. Во время мониторинга продолжайте контролировать, является ли плод источником сигналов, расцениваемых как частота сердечных сокращений плода (ЧСС плода).

Функции сенсорного экрана с меню

Функции управления монитором (кроме включения) путем касания элементов на экране.

124

Автоматический сброс

Кнопка **Осн. экран** – закрывает все открытые меню и окна и возвращает к основному экрану.

Кнопка **ОснМенюНастр** – обеспечивает доступ ко всем функциям.

Умные кнопки

Умные кнопки обеспечивают быстрый доступ к функциям, таким как запуск/остановка регистратора или сброс базовой линии токо-датчика. С помощью кнопки прокрутки можно получить доступ к другим умным кнопкам.

Начало работы

1 Включите монитор.

2 Подключите датчики. **Плотно** вставьте разъемы в гнезда.

3 Наложите датчики на пациента.

4 На экране отображаются результаты измерений.

SpO₂

нАД

Любой датчик плода подключается к любому гнезду

(в зависимости от модели)




Убедитесь, что индикаторы качества сигнала заполнены во время мониторинга; в случае необходимости повторно наложите датчики на пациента.

Ввод сведений о пациенте

При использовании системы OB TraceVue подключите/отключите пациента через эту систему. В остальных случаях сведения о пациенте вводятся в окне **Личные сведения о пациенте** на экране монитора.

1 Коснитесь серой информационной строки в верхней части экрана, затем нажмите **Подключ./Отключ.**:

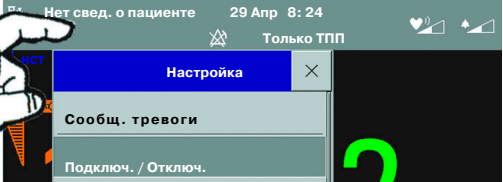

- 2 Нажмите всплывающую кнопку **Подключ.Пациента**.

3 С помощью экранной клавиатуры введите фамилию пациента и нажмите клавишу ввода.

4 Повторите указанные действия, чтобы ввести имя пациента и номер истории болезни, затем нажмите **Принять**.

Отсоединение пациента

По окончании мониторинга отключите пациента.

1 Откройте окно **Личные сведения о пациенте**.

2 Нажмите всплывающую кнопку **Отключ. пациента**.

3 Нажмите **Принять**.

Загрузка бумаги

1 Если регистратор включен, отключите его.

2 Откройте выдвижной лоток для бумаги.

3 Отогните верхнюю страницу пачки и расположите шкалу сократительной активности матки справа (бумага размещается в лотке нижней стороной вниз, последняя страница помечена словом «STOP»).

4 Положите пачку бумаги в лоток.

5 Задвиньте крышку выдвижного лотка для бумаги обратно до щелчка.

Запуск/Остановка регистратора


Либо

Нажмите умную кнопку **Пуск/Стоп**.

Либо

1 Нажмите **значок состояния регистратора**.
Откроется меню фетального регистратора.

2 Выберите **Пуск/Стоп**.

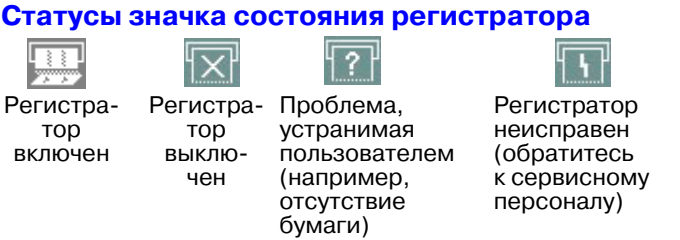

Нажмите этот значок, чтобы войти в меню фетального регистратора.

Сохранение данных кривой, если в регистраторе закончилась бумага

Данные кривой за период отсутствия бумаги сохраняются в памяти и автоматически выводятся на печать с высокой скоростью при перезапуске регистратора.

Отметка события на бумажной ленте

• Либо выберите умную кнопку **НастрМаркер**,

• либо нажмите кнопку дистанционного маркера событий.

Ввод примечаний

1 Нажмите умную кнопку **Ввод примеч.**.
Откроется меню **Ввод примечаний**.

2 Выберите примечание (при необходимости прокрутите список).

3 Нажмите **Принять**. Примечание отобразится в строке состояния дисплея и на кривой, при условии, что фетальный регистратор включен.

Отрывание бумаги

1 Нажмите кнопку

, чтобы остановить регистратор.

2 Для FM20/30: нажмите умную кнопку «Прокр. бум.»

, чтобы автоматически прокрутить бумагу до следующей линии перфорации.**Не** тяните бумагу руками.

3 Оторвите бумагу.

Изменение громкости звука сердечных сокращений плода

1 Нажмите значок

.

2 Установите необходимый уровень громкости на всплывающей шкале громкости.

Выбор прослушивания звука сердечных сокращений плода

Можно услышать звук сердечных сокращений плода только от одного ультразвукового датчика за один раз. Рядом с числовым значением ЧСС плода для прослушиваемого канала отображается значок источника звука : **ЧССп**


1 Войдите в меню **Настройка ЧССпл** для канала, в котором предполагается прослушивать звук.

2 Нажмите кнопку **Выбор звук. сигн.** До появления символа источника звука может пройти несколько секунд.

Идентификация датчиков

Нажмите числовое значение ЧСС плода на экране,...

...и на соответствующем датчике, с помощью которого осуществляется мониторинг данного канала, загорится ярко-голубой **светодиод обнаружения**.

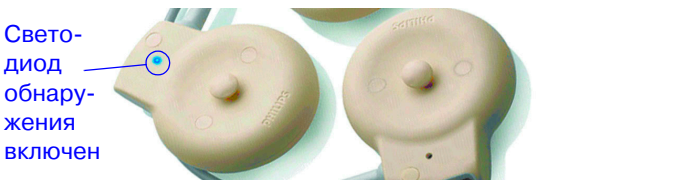

Перекрестная проверка каналов

Функция перекрестной проверки каналов позволяет определять совпадения ЧСС матери и плода; при этом на экране отображается символ , а на записываемой кривой - символ .



Проверьте кривую и измените при необходимости положение одного из датчиков, используя метод аускультации.

Разделение кривых

Чтобы облегчить интерпретацию кривых с похожими базовыми линиями:

- 1 Нажмите значок состояния регистратора.
- 2 Прокрутите меню и установите для пункта **Разд. кривой** значение **Вкл** или **Выкл**.

Сброс базовой линии токо-датчика

-  Нажмите умную кнопку **ТокоБазЛиния**, чтобы установить базовую линию токо-датчика на 20.

Обнуление ВМД (только на FM30/50)

- 1 Войдите в меню **Настройка ВМД**.
- 2 Нажмите **Обнул. ВМД** (устанавливает для дисплея и кривой значение «0»).

При обнулении датчик должен находиться на уровне мечевидного отростка матери.

Выбор шкалы ВМД (только на FM30/50)

- 1 Войдите в меню **Настройка ВМД**.
- 2 Нажмите **шкалу ВМД**, чтобы иметь возможность переключаться между **мм рт. ст.** и **кПа**.

Установка времени запуска таймера нестрессовой проверки

- 1 Нажмите серую информационную строку в верхней части экрана и выберите в меню пункт **Таймер НСТ**.
- 2 Нажмите **Время запуска** и выберите желаемое время из раскрывающегося списка.

Изменение громкости сигнала тревоги



Индикатор громкости сигнала тревоги
в правой верхней части экрана монитора показывает текущий уровень громкости.

- 1 Нажмите **индикатор громкости сигнала тревоги**.
- 2 Установите необходимый уровень громкости на всплывающей шкале громкости.

Изменение пределов сигнала тревоги (режим тревоги «Все»)

- 1 Войдите в меню настройки, нажав соответствующее числовое значение измерения.
- 2 Коснитесь предела, который необходимо изменить, и выберите новое значение из раскрывающегося списка.

Реагирование на сигналы тревоги

Монитор реагирует на сигналы тревоги трех уровней: **Технические сигналы тревоги (сообщения о неполадках)**: отображается сообщение в голубом поле, подается звуковой сигнал неполадки.

Например: **ЧССпл1 ОТСОЕДИНЕН**

Сигналы тревоги «желтого» уровня: отображается сообщение в желтом поле, подается звуковой сигнал тревоги среднего приоритета.

Например: ****ЧССпл1 94 110**

Сигналы тревоги «красного» уровня: на экране отображается красное сообщение тревоги, подается звуковой сигнал тревоги высокого приоритета.

Например: *****ЭКСТРЕМ. ТАХИ**



Нажмите кнопку **Выкл. звук**, чтобы подтвердить все активные сигналы тревоги путем выключения звуковых индикаторов сигналов тревоги.



Нажмите кнопку **Пауза тревог**, если требуется временно приостановить подачу сигнала тревоги (в зависимости от настроек длительность паузы равна 1, 2, 3 минутам либо не ограничена).



Если длительность паузы не ограничена, то на данной кнопке появляется надпись **Тревоги откл**.

Настройки звуковых индикаторов сигнала тревоги для монитора зависят от стандартов сигнализации тревоги, принятых в вашем медицинском учреждении.

Неинвазивное артериальное давление (НАД): запуск и остановка измерений

- Либо коснитесь числового значения **НАД** , чтобы войти в меню **Настройка НАД**, а затем выберите необходимый параметр,
- Либо нажмите соответствующую умную кнопку.

Действие	Меню настройки	Умная кнопка
Запуск/остановка измерения в ручном режиме	Пуск/Стоп	
Запуск серий измерений в автоматическом режиме		
Прекращение текущего автоматического измерения в ходе выполнения серии измерений		
Прекращение измерений в автоматическом/ручном режиме И серии измерений	Остановить все	

НАД: включение автоматического режима и установка времени повторения


Войдите в меню **Настройка НАД**:

- 1 Выберите пункт **Авто/Ручн** (установите нужное значение).
- 2 Выберите пункт **Время повторения**, чтобы установить интервал между автоматическими измерениями НАД.


Приоритет измерений ЧСС матери/частоты пульса

В ходе мониторинга...	...источником данных ЧСС и пульса является:
ЧСС матери, определяемая по ЭКГ матери, и SpO ₂	ЧСС матери, определяемая по ЭКГ матери
SpO ₂ , но не ЧСС матери, определяемая по ЭКГ матери	Пульс, определяемый по измерениям SpO ₂
Ни ЧСС матери, определяемая по ЭКГ матери, ни SpO ₂	Пульс, определяемый по НАД (сигналы тревоги не используются)

ЧСС матери/ЭКГ матери: наложение электродов

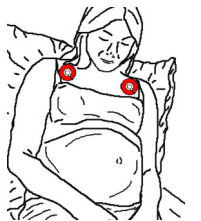

Для мониторинга ЧСС матери

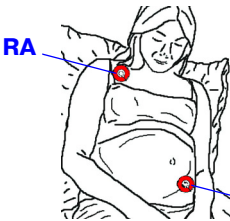

Для мониторинга ЭКГ матери (только на FM30/FM50)

ЭКГ матери: печать кривой (только на FM30/50)



Фетальн. регист.



Кривая ЭКГ




Разделить/ Наложить

Разделить: запись шестисекундного фрагмента кривой ЭКГ матери в режиме быстрой печати. Запись кривой плода временно приостанавливается до окончания распечатки ЭКГ матери.



Наложить: запись отложенного шестисекундного мгновенного снимка кривой ЭКГ матери на бумажной ленте для кривой плода без прерывания записи кривой плода.

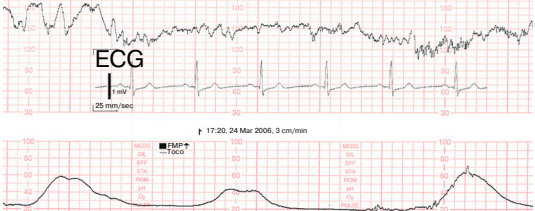

Если также осуществляется мониторинг прямой ЭКГ плода (ПЭКГпл), кривая прямой ЭКГ плода выводится на печать поверх кривой ЭКГ матери.

Включение/выключение подавления артефактов (определение аритмии) (только на FM30/50)

- 1 Нажмите числовое значение прямой ЧСС плода, чтобы войти в меню «ПЧССпл».
- 2 Выберите пункт **Подавл. артеф.**, чтобы иметь возможность переключаться между значениями:
 - **Вкл** (подавление артефактов);
 - **Выкл** (отсутствие подавления артефактов, используется при подозрении на аритмию плода).

Получение дополнительных сведений
Полная информация о безопасной эксплуатации монитора содержится в инструкции по эксплуатации монитора. Перед вводом монитора в эксплуатацию и началом мониторинга пациентов ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации. Настоящее краткое руководство является дополнением к инструкции по эксплуатации и не заменяет ее.