

1.1 Начало инфузии

- Убедитесь, что насос надежно установлен. Если насос подключен к сети, на экране отражаются заряд аккумулятора, символ подключения к сети и предыдущий инфузионный профиль.
- Включите насос, нажав . Начнется автоматическое самотестирование: появится сообщение «Самопроверка активирована» и версия программного обеспечения, подаются два звуковых сигнала и однократно загораются три светодиода – желтый, зеленый/красный и синий. На экране отображается источник питания (батарея или сеть), установленный уровень окклюзионного давления и тип шприца, если он уже установлен. Затем выдвигается привод насоса.

Насос позволяет хранить в памяти до четырех языков (зависит от специфических для данного языка знаков), из которых можно выбрать необходимый для работы. При самом первом включении насоса появляется полный список языков, из которых выберите не более четырех, отметив их . Затем выбор должен быть подтвержден выбором в последнем пункте меню . Выберите язык, используемый по умолчанию кнопками , затем подтвердите . Ответьте на следующий вопрос с , чтобы активировать выбранный язык.

- Нажмите для прямого ввода параметров инфузии или откройте переднюю крышку насоса и держатель шприца, чтобы начать установку шприца.
- Установите шприц так, чтобы упорная планка цилиндра располагалась вертикально в пазу справа от корпуса. Закройте держатель шприца и переднюю крышку насоса. Фиксатор плунжера втянется в держатель шприца.

Внимание: Не оставляйте насос без контроля во время установки шприца.

- Подтвердите тип шприца с . Указанный на экране тип шприца должен соответствовать установленному.
- Привод движется к пятке плунжера шприца и захватывает ее.

Внимание: Не трогайте руками движущийся привод.

Примечание: Убедитесь, что фиксатор штока втянут в держатель шприца.

- Если функция заполнения линии активирована, нажмите для заполнения со скоростью 1200 мл/ч (одно нажатие кнопки = 1 мл). Чтобы прервать заполнение нажмите . Повторяйте процедуру, пока линия не заполнится. Для продолжения работы нажмите .
- Подсоедините линию к пациенту.
- Кнопками ответьте соответственно на вопросы Меню Пуск, пока скорость не появится в Главном Меню.

Установка скорости инфузии:

- Нажмите и задайте скорость инфузии используя .

- Нажмите , чтобы начать инфузию. Бегущие стрелки на экране и зеленый индикатор над экраном указывают на идущую инфузию.

Примечание: Чтобы остановить инфузию в любой момент нажмите . Насос можно выключить в любой момент нажав в течение 3 сек (Исключение: Блок данных Уровень 2, и если шприц не извлечен из насоса).

1.1 Начало инфузии

- Убедитесь, что насос надежно установлен. Если насос подключен к сети, на экране отражаются заряд аккумулятора, символ подключения к сети и предыдущий инфузионный профиль.
- Включите насос, нажав . Начнется автоматическое самотестирование: появится сообщение «Самопроверка активирована» и версия программного обеспечения, подаются два звуковых сигнала и однократно загораются три светодиода – желтый, зеленый/красный и синий. На экране отображается источник питания (батарея или сеть), установленный уровень окклюзионного давления и тип шприца, если он уже установлен. Затем выдвигается привод насоса.

Насос позволяет хранить в памяти до четырех языков (зависит от специфических для данного языка знаков), из которых можно выбрать необходимый для работы. При самом первом включении насоса появляется полный список языков, из которых выберите не более четырех, отметив их . Затем выбор должен быть подтвержден выбором в последнем пункте меню . Выберите язык, используемый по умолчанию кнопками , затем подтвердите . Ответьте на следующий вопрос с , чтобы активировать выбранный язык.

- Нажмите для прямого ввода параметров инфузии или откройте переднюю крышку насоса и держатель шприца, чтобы начать установку шприца.
- Установите шприц так, чтобы упорная планка цилиндра располагалась вертикально в пазу справа от корпуса. Закройте держатель шприца и переднюю крышку насоса. Фиксатор плунжера втянется в держатель шприца.

Внимание: Не оставляйте насос без контроля во время установки шприца.

- Подтвердите тип шприца с . Указанный на экране тип шприца должен соответствовать установленному.
- Привод движется к пятке плунжера шприца и захватывает ее.

Внимание: Не трогайте руками движущийся привод.

Примечание: Убедитесь, что фиксатор штока втянут в держатель шприца.

- Если функция заполнения линии активирована, нажмите для заполнения со скоростью 1200 мл/ч (одно нажатие кнопки = 1 мл). Чтобы прервать заполнение нажмите . Повторяйте процедуру, пока линия не заполнится. Для продолжения работы нажмите .
- Подсоедините линию к пациенту.
- Кнопками ответьте соответственно на вопросы Меню Пуск, пока скорость не появится в Главном Меню.


Установка скорости инфузии:

- Нажмите и задайте скорость инфузии используя .

- Нажмите , чтобы начать инфузию. Бегущие стрелки на экране и зеленый индикатор над экраном указывают на идущую инфузию.

Примечание: Чтобы остановить инфузию в любой момент нажмите . Насос можно выключить в любой момент нажав в течение 3 сек (Исключение: Блок данных Уровень 2, и если шприц не извлечен из насоса).


ПЕРФУЗОР СПЭЙС / ОБЗОР

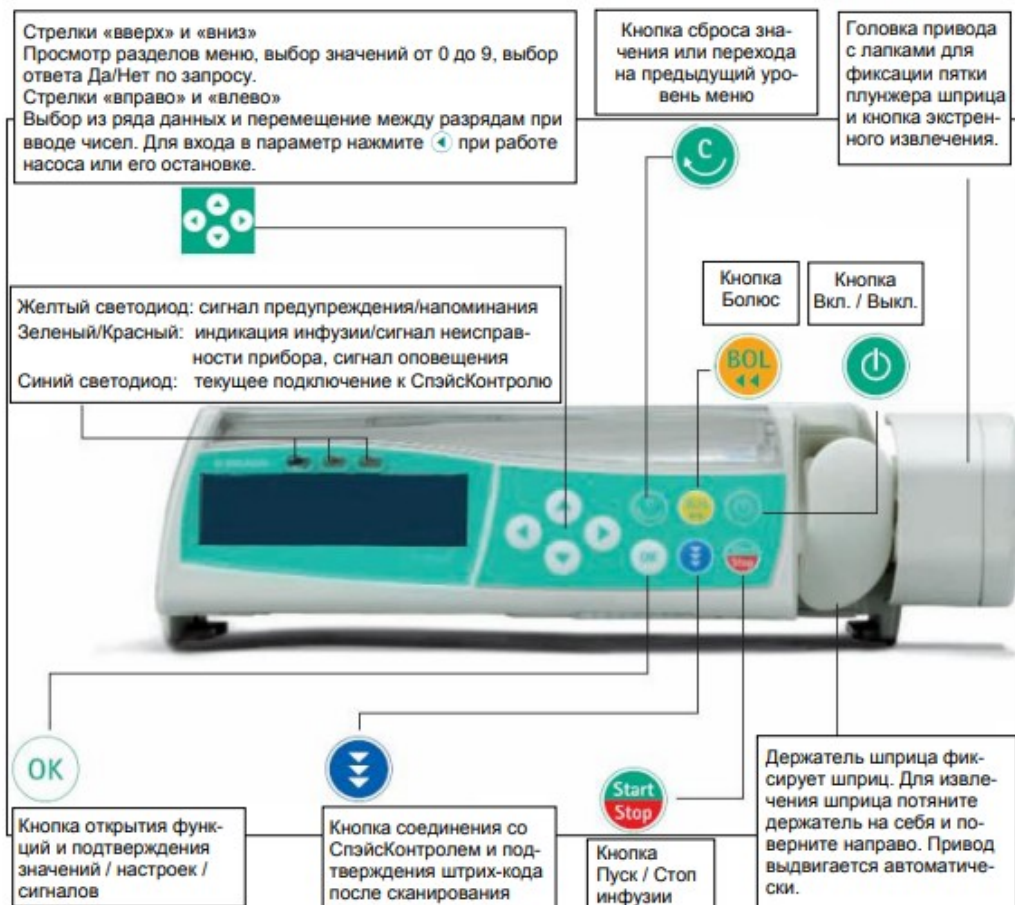

Обработка

Для обработки использовать мягкую безворсовую ткань смоченную дезинфицирующим средством.
После дезинфекции дать просохнуть 20 минут перед следующим использованием.

ПЕРФУЗОР СПЭЙС / ОБЗОР

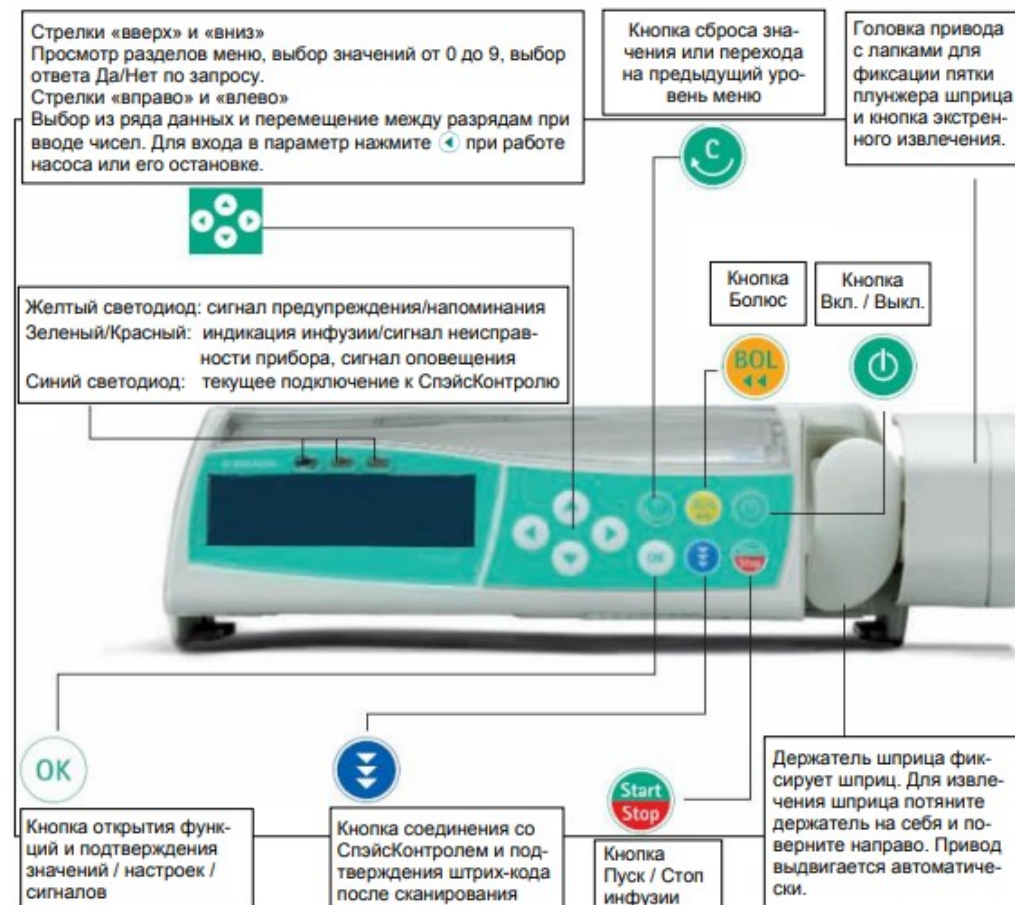

Обработка

Для обработки использовать мягкую безворсовую ткань смоченную дезинфицирующим средством.
После дезинфекции дать просохнуть 20 минут перед следующим использованием.