


СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ OP-850

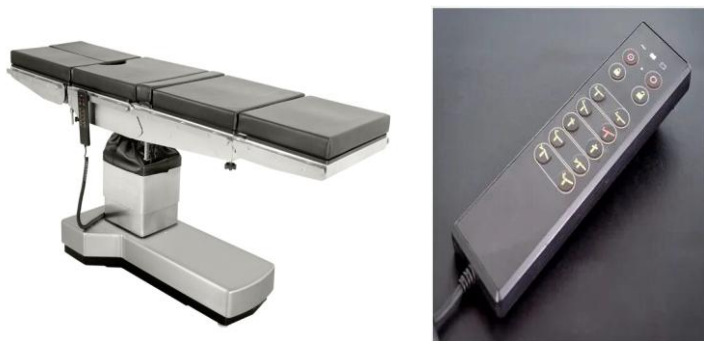

Правила эксплуатации

- Весь персонал должен быть ознакомлен с инструкциями по эксплуатации и обслуживанию стола.
- Перед использованием стола рекомендуется проверить его состояние и убедиться, что все механизмы функционируют должным образом.
- Перед началом операции регулируйте высоту стола согласно needs хирургической команды. Убедитесь, что стол закреплен надежно и не будет двигаться в процессе операции. Регулировка высоты стола, спинной секции осуществляется с помощью ручного пульта управления или панели управления на колонне .
- Во время работы избегать резких движений и ударов.

ВНИМАНИЕ!!! Когда стол используется для операции, уберите сетевой кабель и используйте встроенную аккумуляторную батарею в качестве источника питания!

Не более 18 часов для полностью разряженной батареи,
Не более 5–10 часов для зарядки на 90%

ОБРАБОТКА

- Очистку и дезинфекцию операционного стола необходимо выполнять после каждой операции. Для этого используйте только не вызывающие эрозию чистящие и дезинфицирующие средства.
- После дезинфекции удалите остатки дезинфицирующего средства с операционного стола с помощью чистой воды.