

Дефибриллятор

автоматический

наружный ДА-Н

AXION




1. Включить аппарат



2. Убедитесь, что пациент не касается телом электропроводящих поверхностей. Освободите грудную клетку пациента от одежды

3. Вскройте пакет с одноразовыми электродами, следуя инструкциям на упаковке пакета

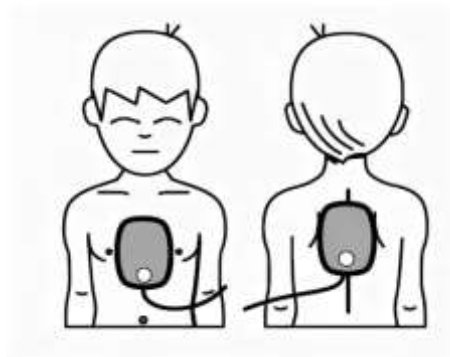

4. Вставьте разъем электродов в гнездо аппарата. Если электроды не подключены, то аппарат дублирует голосовые и визуальные подсказки

5. Для подтверждения дефибрилляции нажмите кнопку разряда



Мониторинг от отдельного кабеля ЭКГ



6. Для выключения аппарата нажать меню над программными кнопками



круется

Нажать « Выкл.»



Дезинфекция корпуса, клавиатуры, кабелей проводится протираем дезинфицирующей салфеткой

Проверка аппарата

Проверить на отсутствие механических повреждений

Проверить сроки годности multifunctional electrodes

Проверить на работоспособность (пункты 1 и 6)