

Дефибриллятор

автоматический

наружный ДА-Н

AXION

РАЗЪЕМ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОДОВ




1. Включить аппарат



2. Убедитесь, что пациент не касается телом электропроводящих поверхностей. Освободите грудную клетку пациента от одежды

3. Вскройте пакет с одноразовыми электродами, следуя инструкциям на упаковке пакета

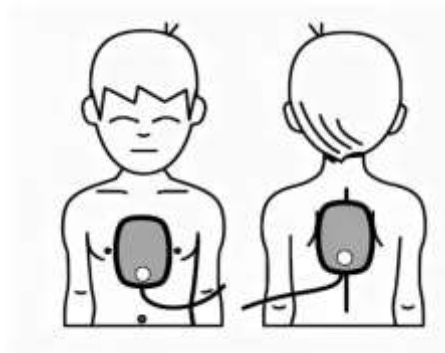

4. Вставьте разъем электродов в гнездо аппарата. Если электроды не подключены, то аппарат дублирует голосовые и визуальные подсказки

5. Для подтверждения дефибрилляции нажмите кнопку разряда



6. Для выключения аппарата нажать и откроется меню над программными кнопками

Нажать «  П.»

Дезинфекция корпуса, клавиатуры, кабелей проводится протиранием дезинфицирующей салфеткой

Проверка аппарата

Проверить на отсутствие механических повреждений

Проверить сроки годности многофункциональных электродов

Проверить на работоспособность (пункты 1 и 6)

•