

Аппарат ИВЛ HAMILTON-C2



Дезинфекция:


1. Выключить от сети
2. Снять одноразовые расходные материалы и выкинуть в мешок кл. Б
3. Многоцветные контуры снять и отправить в ДСО
4. Поверхность аппарата обработать дезинфицирующей салфеткой
5. Собрать заново аппарат, провести проверку
6. Заполнить «Журнал санации ИВЛ»

Внимание!

Не использовать формальдегид, дезсредства на основе фенола.

Не использовать слишком сильные дезинфектанты.

Аппарат ИВЛ HAMILTON-C2

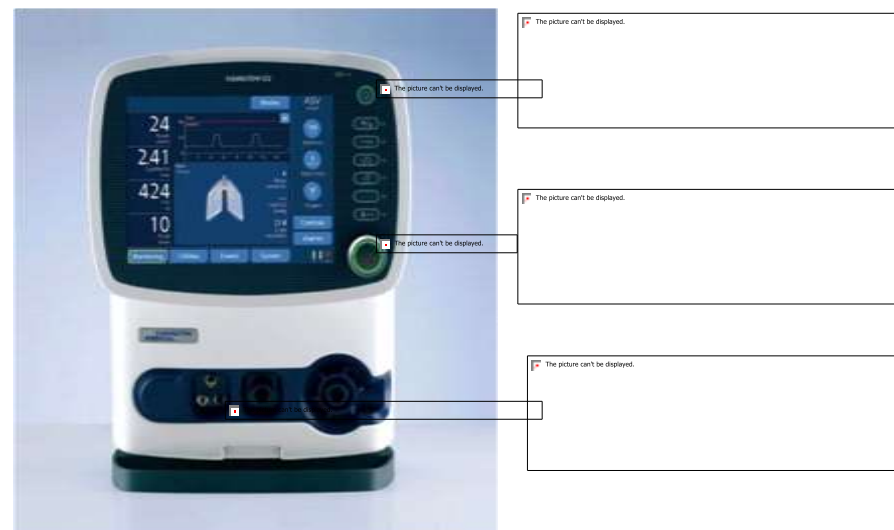

1. Включить основной выключатель сзади аппарата к сети 220В
2. Чтобы включить аппарат ИВЛ, нажмите и удерживайте кнопку ПИТ
- 2.1. Аппарат в течение 1 мин проходит самотестирование Self-Test
- 2.2. При выявлении ошибок загорится сигнальная лампа желтым цветом
- 2.3. Калибровка и тестирование. Нажать на дисплее СИСТЕМА
3. Чтобы перевести аппарат в режим ожидания, нажмите и отпустите к
4. Чтобы выключить аппарат ИВЛ, нажмите и отпустите клавишу (отк
7. Заполнить формуляр