


Порядок работы двухдверного парового стерилизатора ГКД-100-4- «ТЗМОИ»

- 1 включить стерилизатор повернуть в положение «I» ключ «Сеть»
- 2 нажать в панель управления нажмите «ВХОД В систему»
- 3 выбрать программу стерилизации «свободная»
- 4 открыть дверь повернув ручки
- 5 загрузить погрузочную тележку в «стерилизационную камеру»
- 6 закрыть дверь повернув ручки
- 7 если индикатор «закрыт дверь» загорится
- 8 нажмите кнопку «старт»
- 9 стадии программы
 - откачка
 - разогрев камеры
 - стерилизация
 - откачка пара
 - сушка
 - конец цикла
- 10 после сигнала нажмите на «панель управления» кнопку «сброс»
- 11 после разблокировки двери откройте повернув ручки
- 12 дайте остыть **ОСТОРОЖНО ГОРЯЧО!!!**



Метод укладки

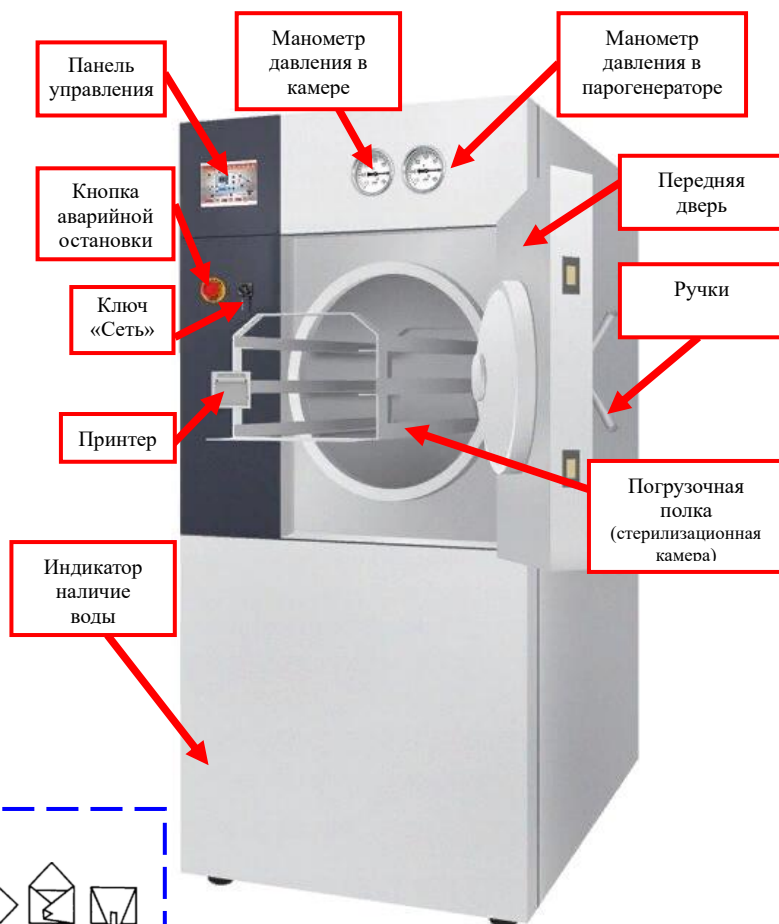

Выбрать программу «свободная»

Обработка производится 2-х протиранием с интервалом 15 мин дез. раствором

Данные о состоянии стерилизатора и управление (Запуск/остановка)



Визуальное наблюдение за работой (Стадии работы)



Открыто красный /
Закрото синий

