

Порядок работы молокоотсоса LACTEA

- 1- Вставьте сетевой адаптер в розетку 220В
- 2- Приложите воронку к груди. Убедитесь, что сосок располагается по центру воронки.
- 3- Нажмите кнопку включения прибора. Молокоотсос начнет работать в фазе **СТИМУЛЯЦИЯ**. Светодиодный индикатор мигает **желтым** цветом.
- 4- Кнопками и подберите себе наиболее комфортный уровень вакуума.
- 5- Фаза **СТИМУЛЯЦИЯ** будет продолжаться **2 минуты**, после чего молокоотсос автоматически переключится в фазу «Сцеживание». В фазе «Сцеживание» светодиодный индикатор будет мигать **зеленым** (**синим** или **белым**) цветом.
- 6- Если прилив молока начнется раньше автоматического завершения фазы **СТИМУЛЯЦИЯ** коротким нажатием кнопки переключения фаз/режимов переключитесь в фазу «Сцеживание».
- 7- Если 2-х минут не хватило для достижения прилива молока, то сразу после автоматического переключения в фазу «Сцеживание» коротко нажмите для возврата в предшествующую фазу **СТИМУЛЯЦИЯ**.
- 8- В фазе «Сцеживание» кнопками и подберите себе наиболее комфортный и эффективный уровень вакуума.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ




Совет: последовательно увеличивайте вакуум кнопкой до появления небольшого дискомфорта. После этого уменьшите вакуум на одну ступень и продолжайте сцеживание. Данный уровень вакуума будет наиболее эффективным для Вас.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ДИСПЛЕЙ (LACTEA Smart™ Plus/Pro)

1. Таймер – время сцеживания
2. Индикатор уровня вакуума
3. Индикатор фазы/режим

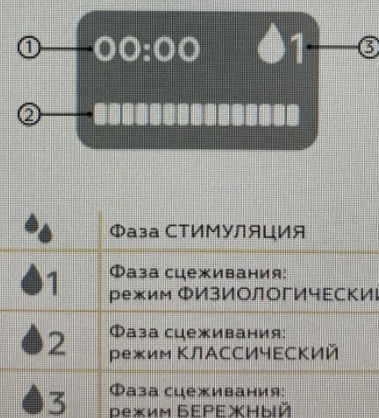

Дезинфекция

Протрите аппарат дез. Раствором 2 раза с интервалом 15 мин

Полностью разберите комплект для сцеживания на части

Промойте все детали чистой теплой водой.

Промойте все детали обильным количеством мыльной теплой воды.

Снова тщательно промойте все детали чистой теплой водой.

Прокипятите детали комплекта для сцеживания в течении 5 минут. Следите, чтобы вода всегда полностью закрывала все детали

Просто поместите их на чистое полотенце до высыхания.