


Cardiology

Neurology

Patient Monitoring

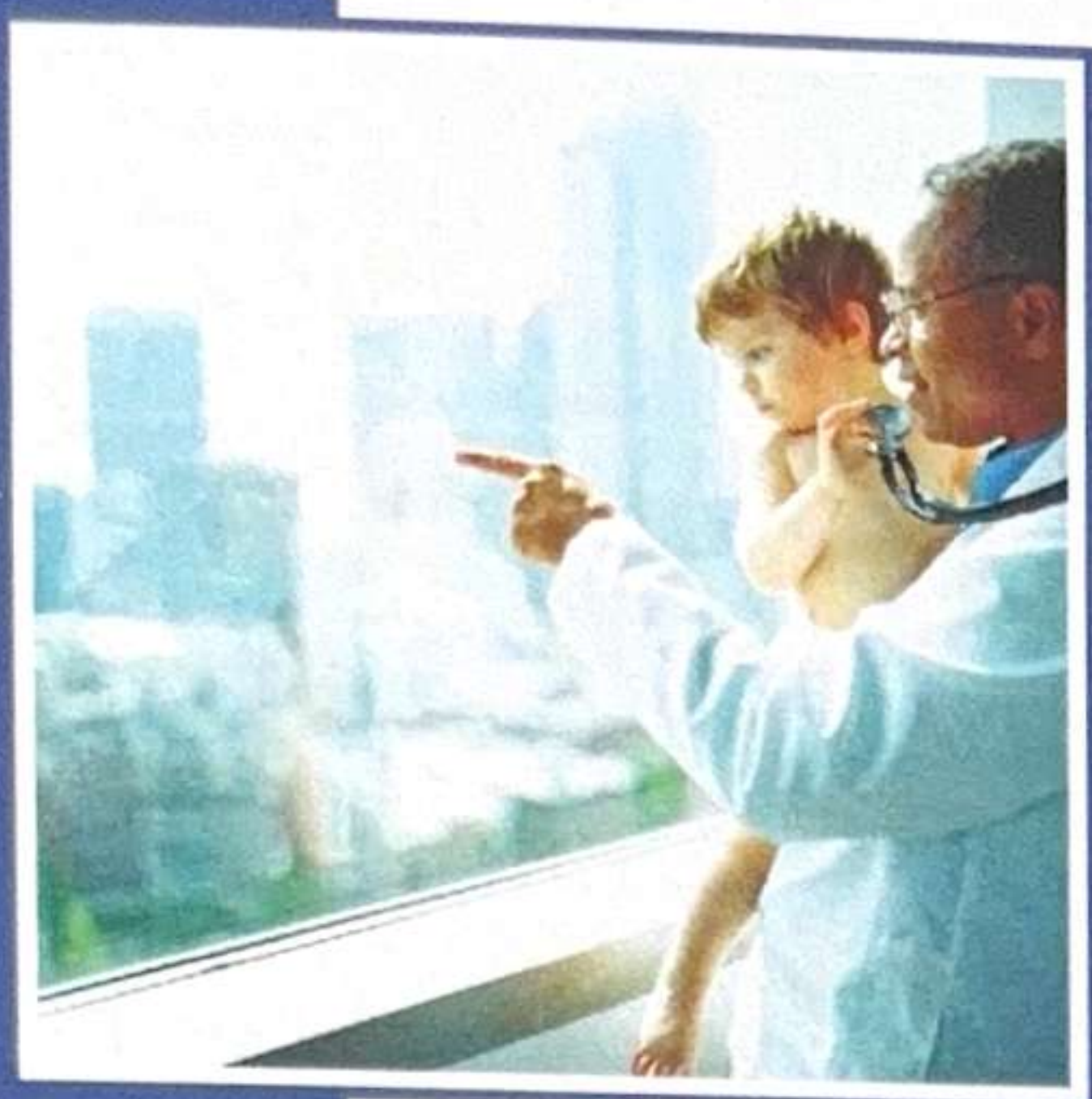

 **NIHON KOHDEN**

ActiBiphasic







cardiolife
ДЕФИБРИЛЛЯТОР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

TEC-5521
TEC-5531

4. ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ, СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ КАРДИОВЕРСИЯ и AED

Порядок работы

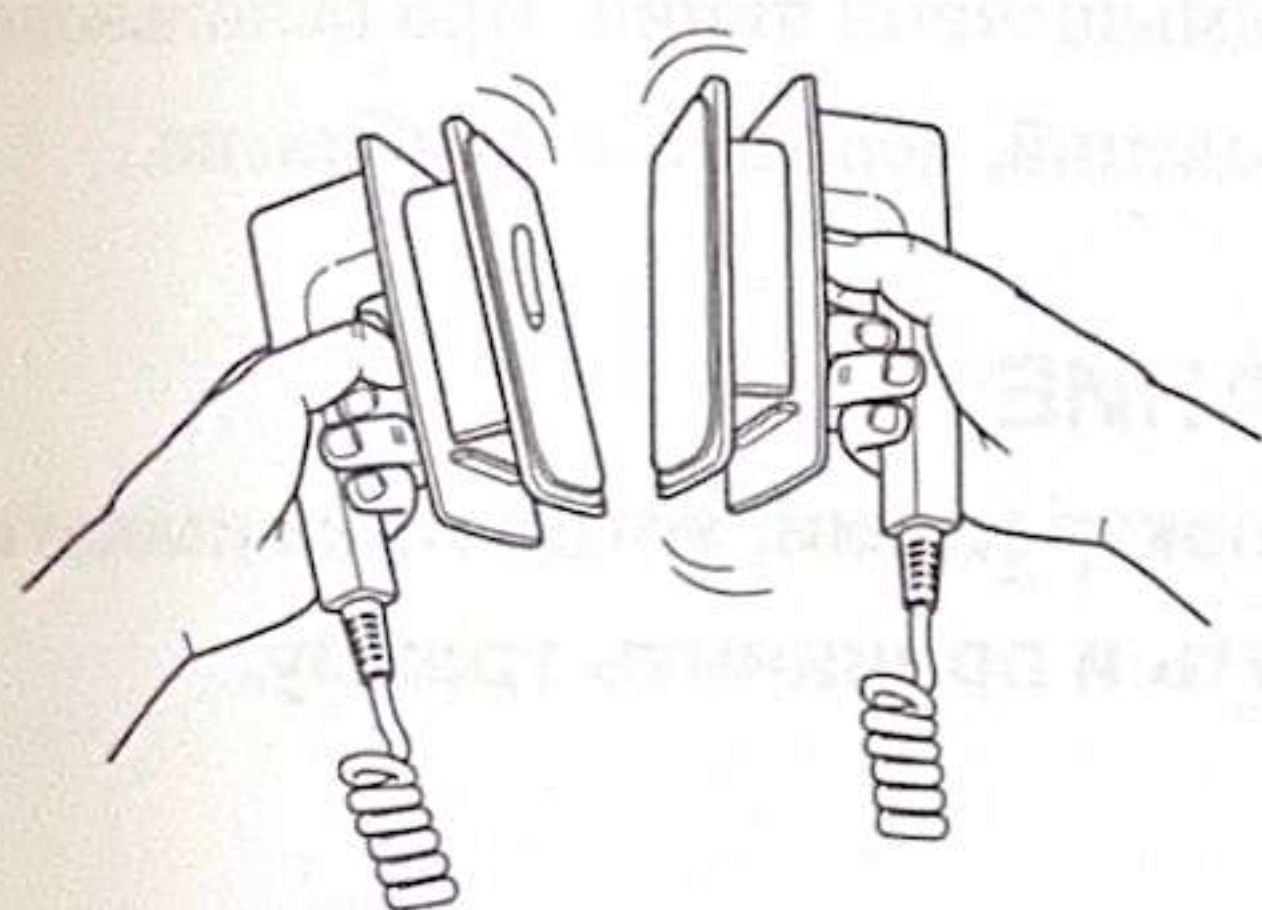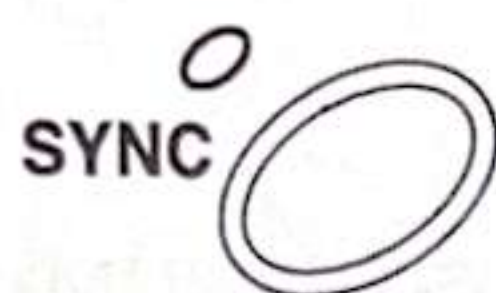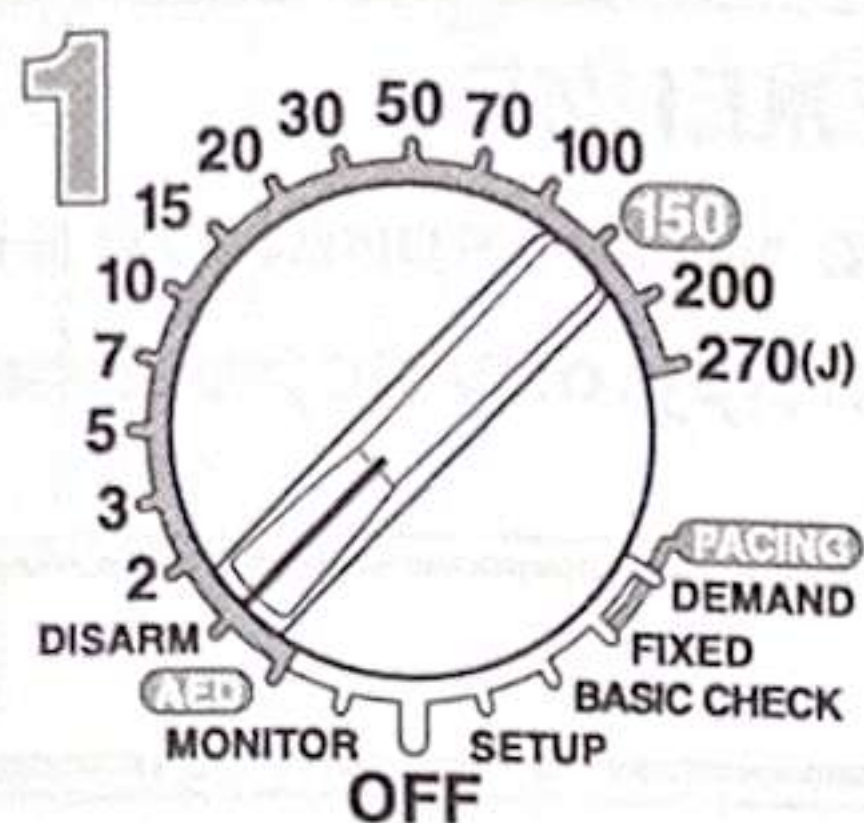

1. Проверьте, что внешние накладные электроды подключены к дефибриллятору.
2. Поверните переключатель выбора Energy/Mode в положение DISARM для включения питания. Убедитесь, что на экране нет сообщений об ошибках. В случае сообщений об ошибках, обратитесь к разделу 9. При работе с питанием от сети, убедитесь, что горит лампочка-индикатор сети AC.
3. Убедитесь, что отведение ЭКГ установлено на PADDLE. Если выбрано другое отведение, то установите PADDLE с помощью кнопки отведения ЭКГ.
4. Проверьте, что лампа SYNC не светится. Если она светится, нажмите кнопку SYNC на передней панели для выключения.
5. Подготовьте накладные электроды
 - 1) Снимите внешние накладные электроды с их держателей, взявшись за рукоятки и поднимая вверх.
 - 2) Нанесите контактный гель на контактные пластины каждого накладного электрода.
 - 3) Слегка потрите пластины друг о друга для размазывания геля по поверхностям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Наносите контактный гель только на электродные пластины. Если гель попадет на другие части дефибриллятора, это может привести к удару током оператора.
- Не наносите контактный гель рукой. Нарушение этого может привести к ожогу, шоку или другим травмам.
- Не беритесь за ручки накладных электродов мокрыми руками или руками, измазанными гелем. Нарушение этого может привести к электрическому шоку оператора.
- Обязательно наносите контактный гель на пластины. Использование без геля может вызвать сильный ожог кожи пациента.

6. Выберите уровень энергии
Поверните переключатель Energy/Mode в положение энергии нужной величины.

7. Приложите накладные электроды к пациенту

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не касайтесь пластин электродов. Это может привести к серьезному электрическому ожогу, шоку, или другому поражению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если тело пациента влажное, тщательно протрите его так, чтобы электроды не могли быть закорочены через влагу.

Расположение

- 1) Поместите левый накладной электрод (STERNUM) на правую сторону грудины ниже ключицы.
- 2) Поместите правый накладной электрод (APEX) на уровне пятого межреберного промежутка и среднеподмышечной линии. При использовании накладных электродов как отведений, держите их стабильно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не наклоняйтесь над накладными электродами, когда прижимаете их к пациенту. Они могут соскользнуть и причинить травму.



8. Проверьте кривую ЭКГ

Убедитесь, что кривая ЭКГ пациента имеет шоковый ритм, такой, как вентрикулярная фибрилляция или безпульсовая вентрикулярная тахикардия.

Если ЭКГ пациента требует синхронизированную кардиоверсию, выполните процедуру, как описано в параграфе “Синхронизированная кардиоверсия” в данном разделе.


4. ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ, СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ КАРДИОВЕРСИЯ и AED

9. Зарядите энергию
- Когда подтверждено, что пациент нуждается в дефибрилляции, нажмите кнопку CHARGE на накладном электроде APEX или кнопку CHARGE/AED на передней панели аппарата для начала накопления заряда.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Во время заряда и разряда не касайтесь ничего, кроме рукояток. Иначе, это может привести к удару током оператора.
- Не переносите и не двигайте дефибриллятор, если в нем осталась заряженная энергия. При случайном падении дефибриллятор может разрядиться, что вызовет электрический шок.

Во время зарядки прозвучат прерывистые звуки, отображается сообщение "CHARGING" на экране, и мигает лампа CHARGE.

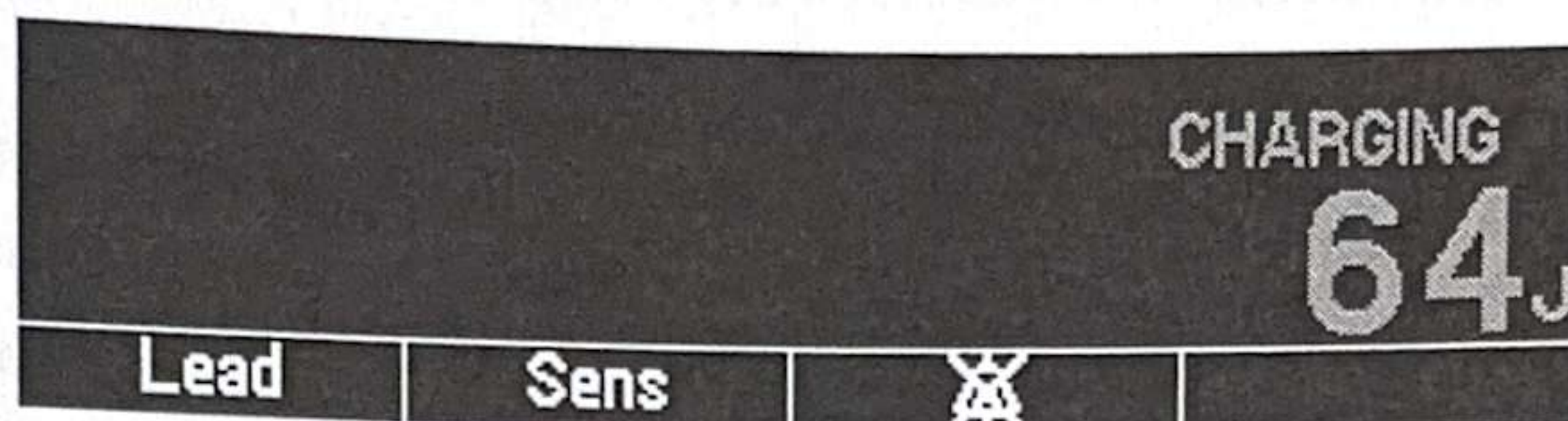

Когда заряд завершается, подается непрерывный звонок, появляется сообщение "CHARGED", и светится лампа CHARGE.



Для изменения уровня энергии после завершения заряда


Поверните переключатель выбора Energy/Mode в положение нужной величины энергии. Дефибриллятор отрегулирует величину энергии в течение одной секунды.

Если дефибриллятор стал не нужен после накопления энергии

Поверните переключатель выбора Energy/Mode в положение DISARM или в положение OFF. Дефибриллятор выполняет внутренний разряд энергии в течение 20 секунд.


Дефибриллятор автоматически выполняет внутренний разряд энергии, если проходит время удержания энергии. Это время выбирается на экране System Setup -Configuration.

10. Проверьте сопротивление контакта кожи с электродом
- Сопротивление контакта кожи с электродом отображается лампой CONTACT на внешнем накладном электроде STERNUM. Прижмите накладные электроды в месте их установки так, чтобы загорелась зеленая лампочка. Подробнее смотрите "Сопротивление контакта кожи с электродом" в данном разделе.

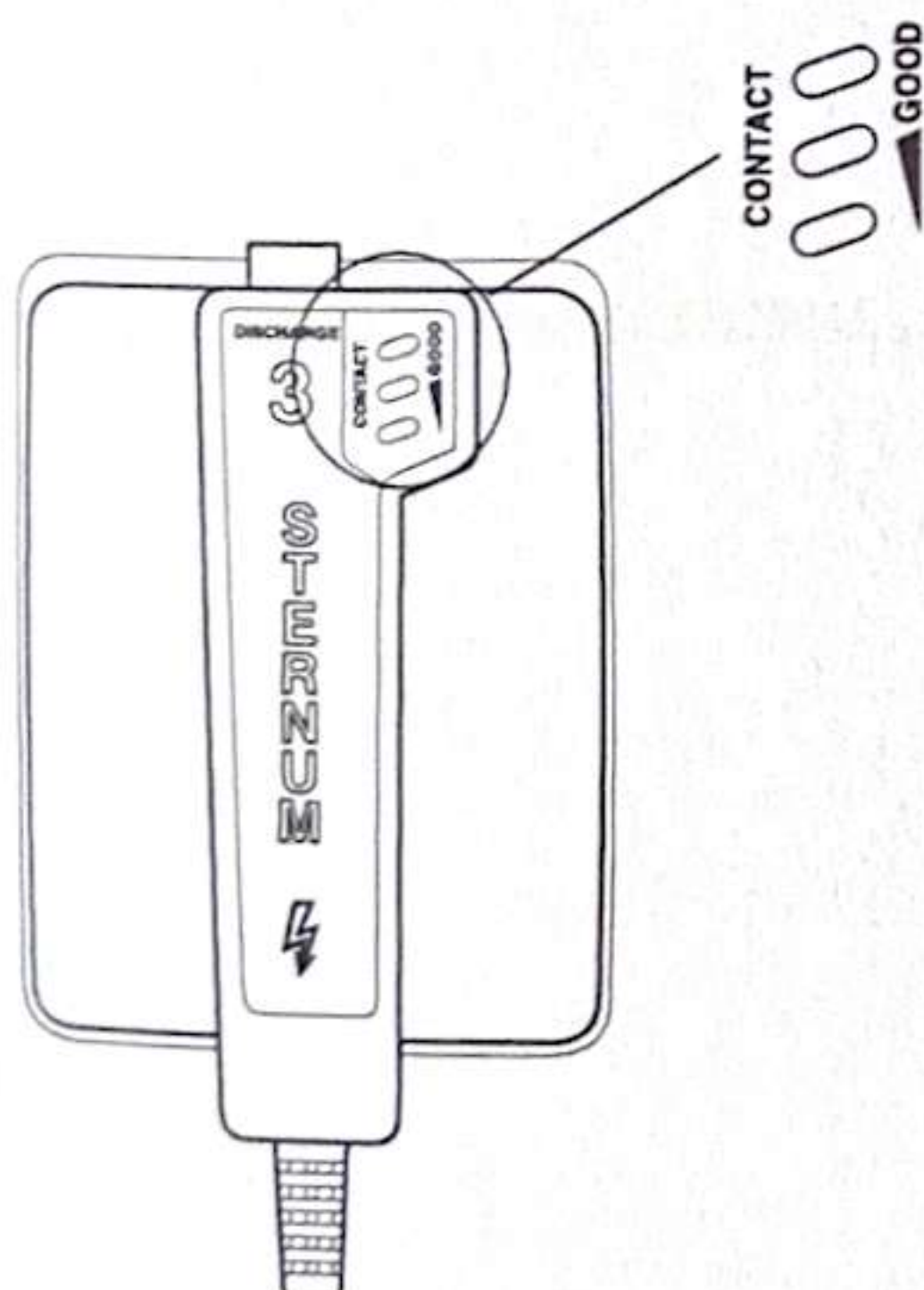

4. ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ, СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ КАРДИОСИНХРОНИЗИРОВАННАЯ АСД


Кнопка разряда DISCHARGE

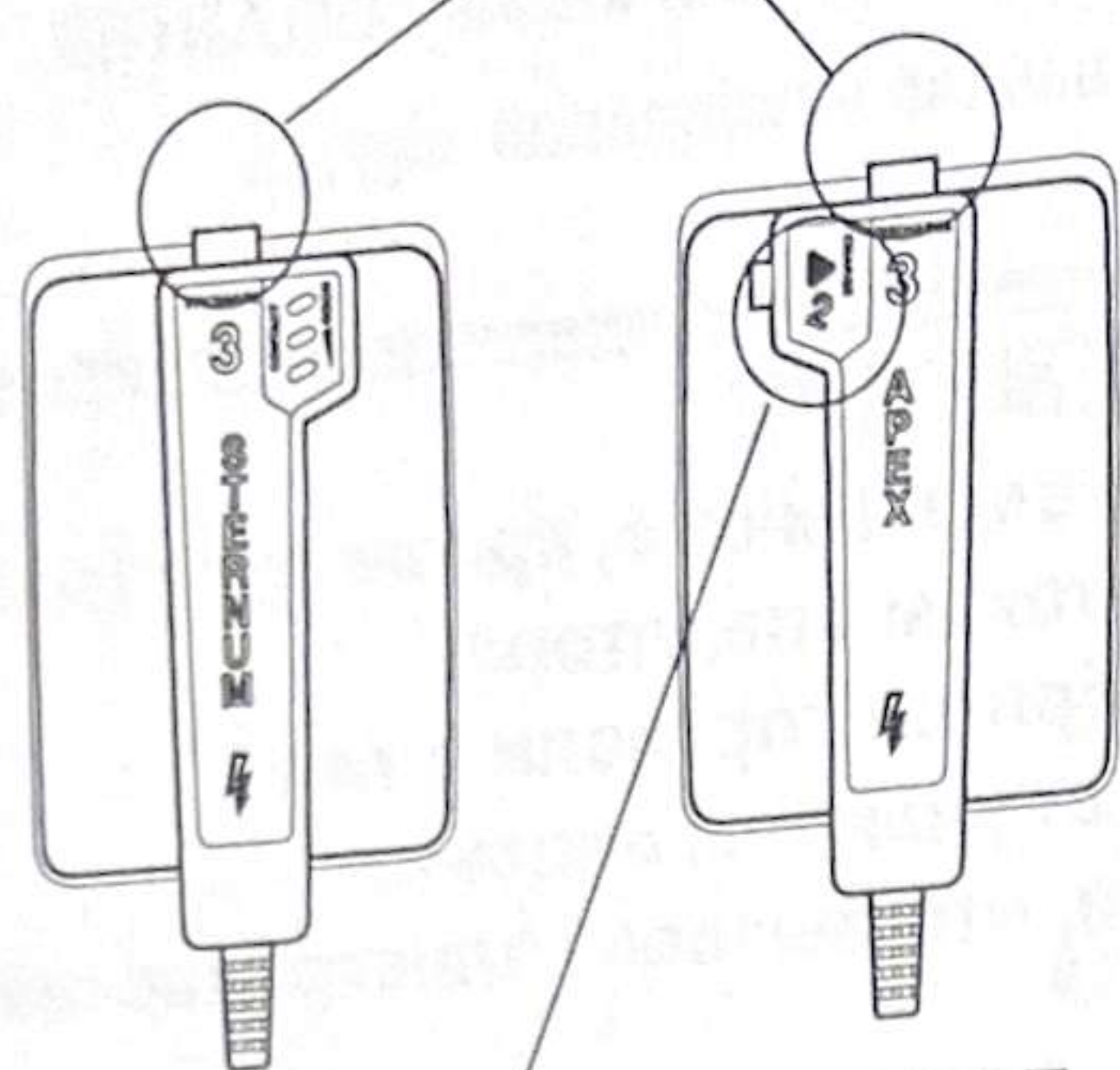

Кнопка разряда DISCHARGE

11. Разрядите энергию на пациента

После проверки, что лампа CHARGE светится, одновременно нажимайте обе кнопки DISCHARGE на накладных электродах для разряда энергии на пациента.

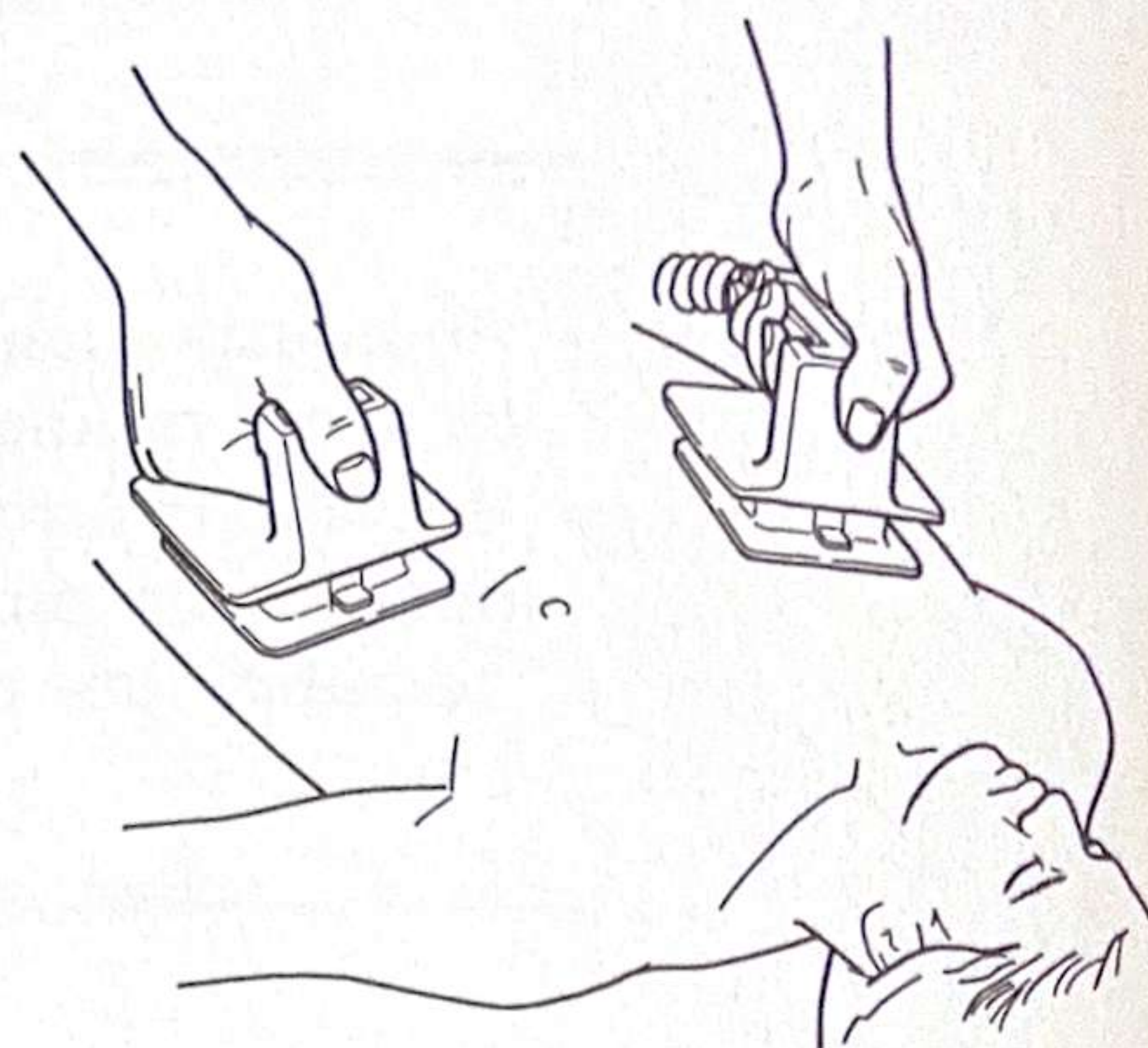

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- Перед дефибрилляцией убедитесь, что никто не имеет контакта с пациентом и металлическими частями оборудования или кабелей, которые подсоединены к пациенту.
- Перед разрядом убедитесь, что пластины плотно прижаты к груди пациента. Иначе, это приведет к сильному ожогу кожи и недостаточной энергии разряда на сердце.
- Не выполняйте разряд вблизи другого человека или объекта, кроме пациента или тестовой пластины или устройства контроля энергии. Это может привести к электрическому шоку другого человека.
- Не выполняйте открытый разряд в воздухе. Это может вызвать электрический шок оператора или повреждение дефибриллятора.
- Не разряжайте энергию, если пластины имеют контакт между собой через контактный гель. Иначе, это приведет к сильному ожогу кожи и недостаточной энергии разряда на сердце.

Неправильно




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не выполняйте разряд, если пластины касаются друг друга. Это может повредить дефибриллятор.

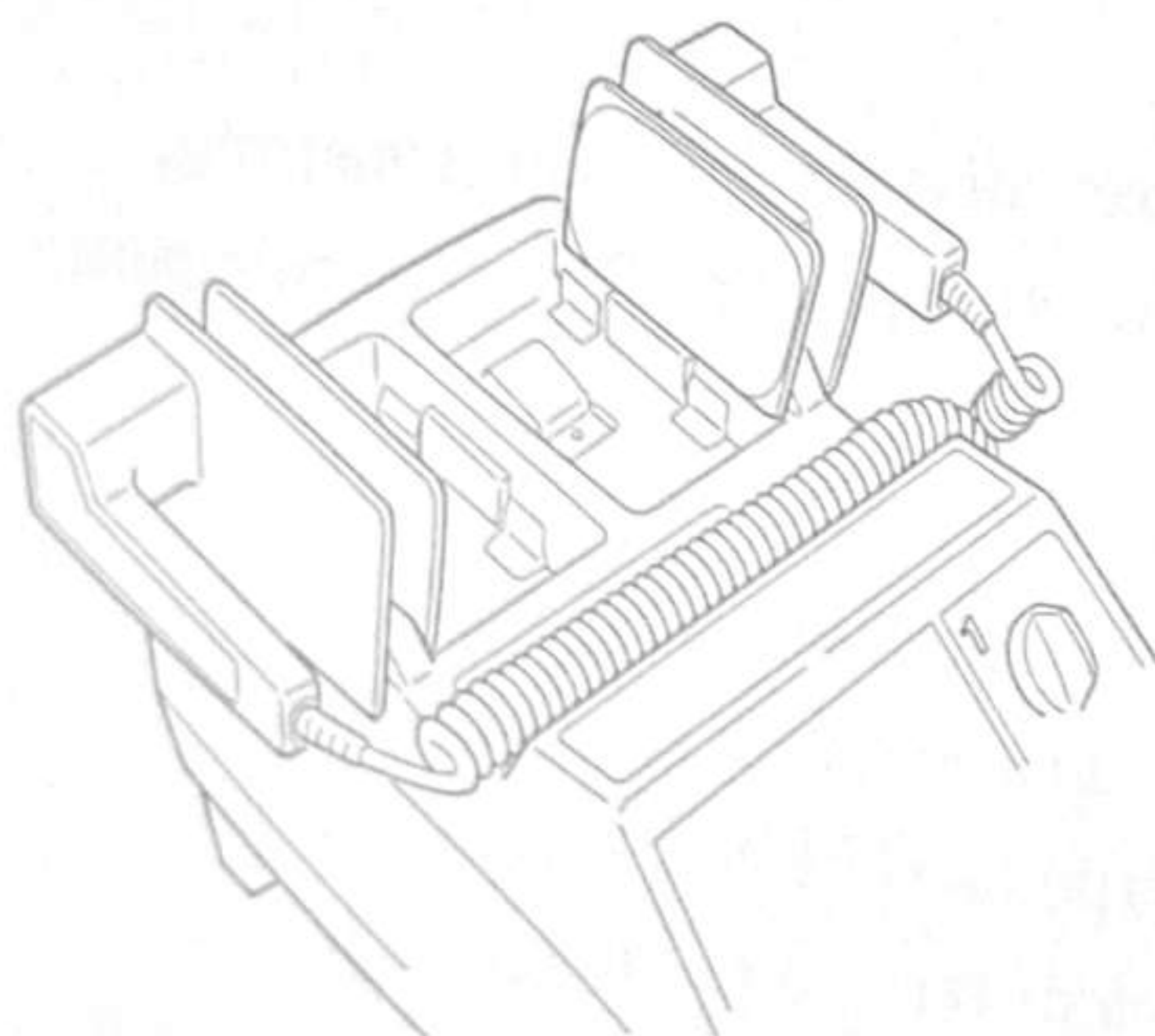

- #### 12. Если требуется следующая дефибрилляция, выполните необходимые лечебные действия и повторите пункты 5 – 11.

4. ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ, СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ КАРДИОВЕРСИЯ и AED

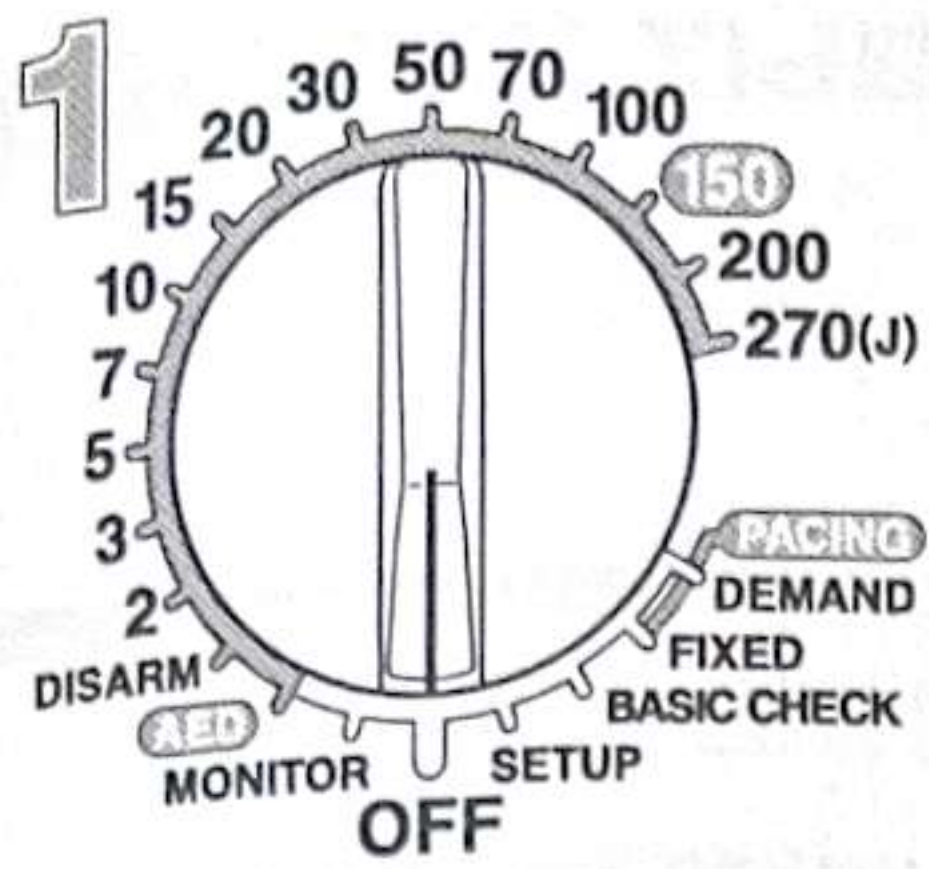

Используйте края вокруг каждого держателя пластин для временного хранения накладных электродов так, чтобы контактный гель не попал на дефибриллятор. Эти держатели могут использоваться только для взрослых накладных электродов.

13. Выключите питание

Поверните переключатель выбора Energy/Mode в положение OFF для выключения питания дефибриллятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пока на экране отображается сообщение “Shutdown NOW” (идет выключение), не отсоединяйте шнур питания от дефибриллятора и от розетки, и не извлекайте батарею из дефибриллятора. Иначе, могут быть повреждены данные в дефибрилляторе.

Тщательно протрите внешние накладные электроды и дефибриллятор от контактного геля. Обратитесь к разделу 10 “Чистка, дезинфекция и стерилизация”. Поместите внешние накладные электроды на держатели.