



Fresenius_CATS_

- Вскрываем внешнюю упаковку дренажа аспирации и антикоагуляции и, не касаясь внутренней упаковки, протягиваем комплект операционной сестре, чтобы она могла взять его корнцангом.
- Подсоединение к источнику вакуума Прикрепите вакуумный тракт источника вакуума к вакуумному порту резервуара сбора крови.
- Перед пуском процесса промывки резервуар сбора должен быть заполнен до объёма примерно 500 мл.
- Запуск программы. После того, как аппарат был включён, программа запускается и появляется начальный экран: Нажмите клавишу **SelectProgram Program** (выбрать программу).; Используйте клавишу **↓** для выбора нужной программы промывки.; Нажмите клавишу **Enter** (ввод) для подтверждения выбора программы и чтобы загрузить параметры.
- Установка комплекта автопереливания AT1. Нажимая клавишу **Continue** (продолжить) оператор вводит фазу программы **InstallSet** (установить комплект)
- Откройте крышку центрифуги: Нажмите клавишу **OpenCentrif** (открыть крышку центрифуги) и поднимите крышку центрифуги в поднятое положение
- Подвесьте мешок для обратного вливания: Достаньте мешок для обратного вливания из упаковки и подвесьте его на верхнюю поперечину стойки для внутривенного вливания.
- Достаньте мешок для отходов из упаковки и подвесьте его на трёх крюках сбоку аппарата.
- Достаньте соединительные тракты для солевого раствора (острия, белый зажим) и резервуар для крови (ступенчатый адаптер, красный зажим) из упаковки и поместите их на рукоятку.
- Достаньте из упаковки промывочную камеру и адаптер насоса.
- Вставьте адаптер насоса в станину насоса. Адаптер следует протолкнуть на направляющем стержне в основание насоса до остановки.

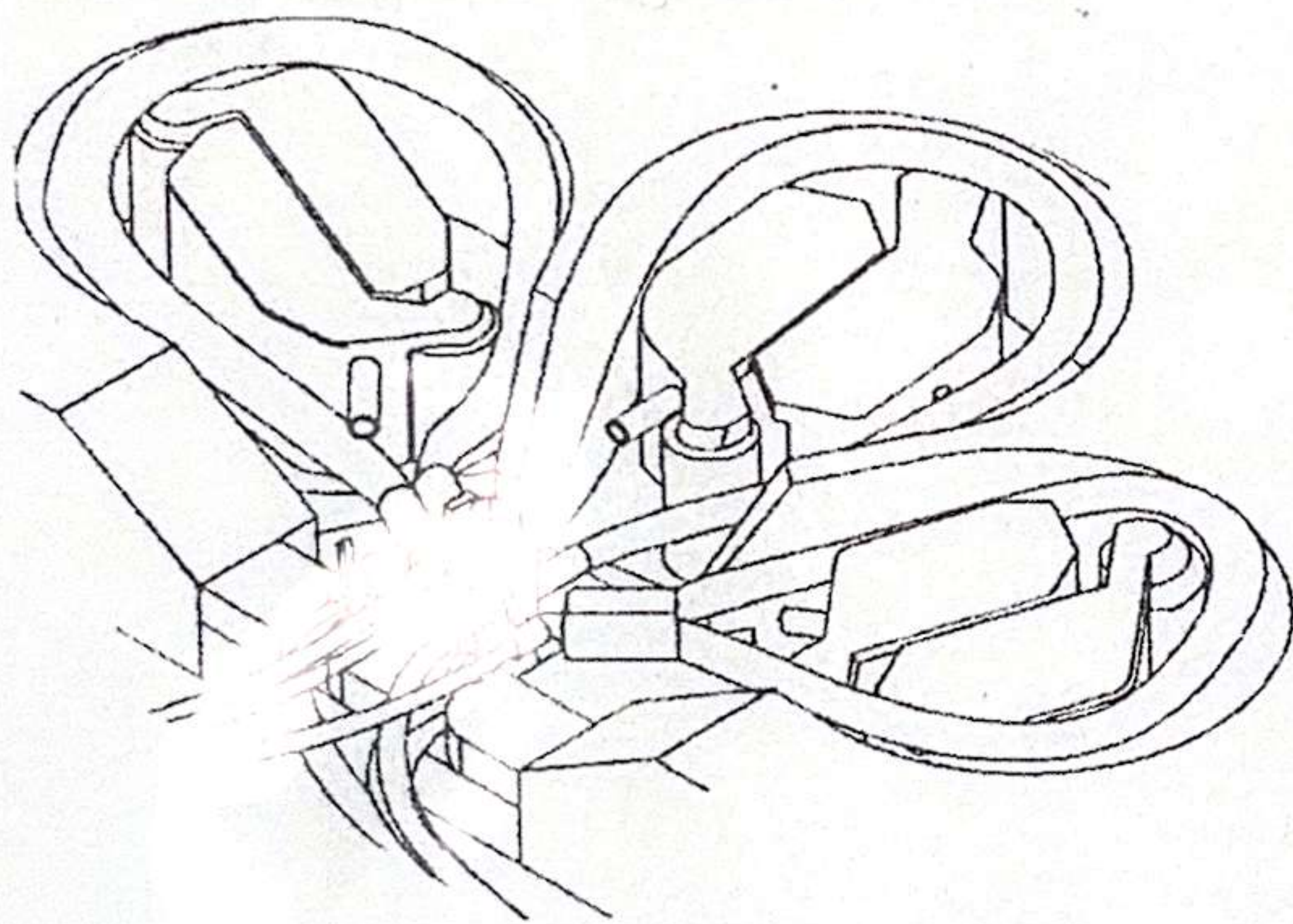


- Вставьте адаптер насоса в станину насоса. Адаптер следует протолкнуть на направляющем

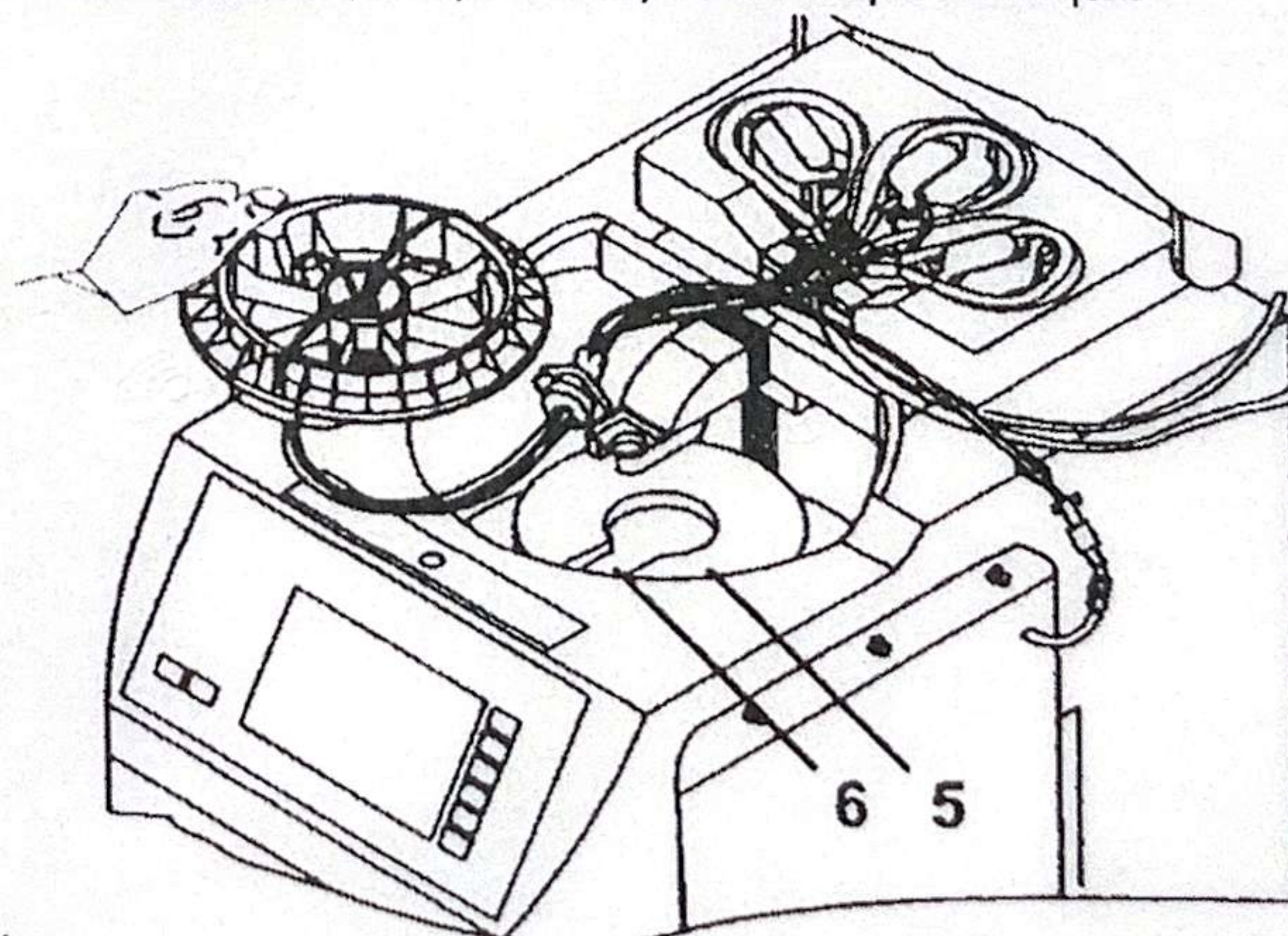

стержне в основание насоса до остановки.

- Установите промывочную камеру на ротор центрифуги сверху. Зубчатка на промывочной камере должна сесть в центральное отверстие ротора центрифуги, так чтобы промывочная камера плоско сидела на роторе центрифуги.
- Трубопровод центрифуги должен быть размещён в V-образном вырезе ротора центрифуги. Он не должен быть зажат

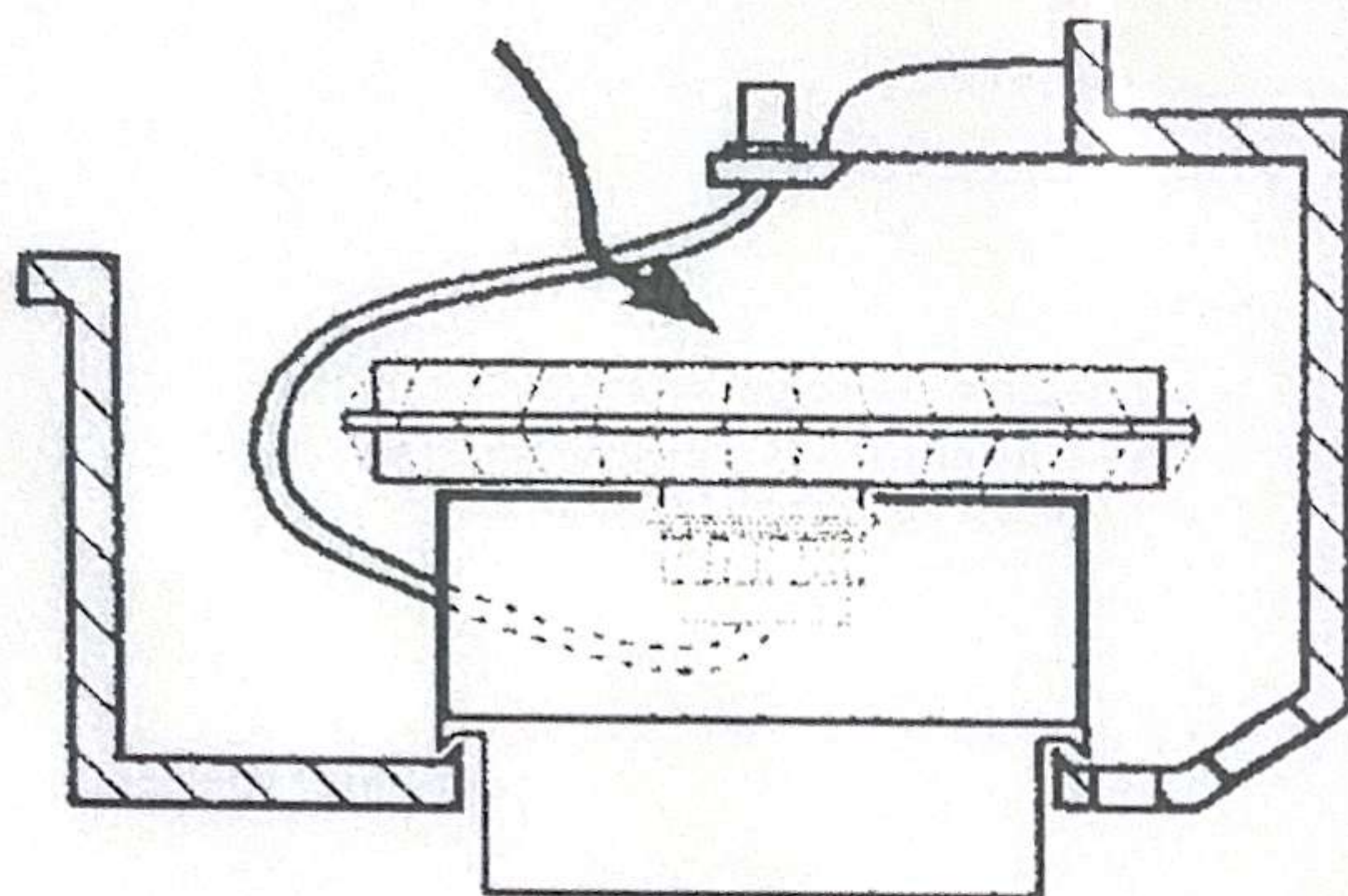

- Нажмите клавишу **LockChamber** (запереть камеру).
- Нажмите клавишу **LoadPumps**(загрузить насосы) и проследите за процедурой загрузки
- Установите адаптер центрифуги в кронштейн держателя сверху и убедитесь в том, что он прочно заперт.
- Плотнo закройте крышку центрифуги до появления щелчка
- Подвесьте мешок с солевым раствором на нижнюю поперечину стойки для внутривенного вливания. Подсоедините тракт солевого раствора (белые зажимы) к мешку солевого раствора с помощью спайка (острия).
- После того, как комплект был установлен и солевой раствор подсоединён, комплект автоматически заливается солевым раствором после нажатия клавиши **Prime**(залить)
- После завершения фазы заливки автоматически начинается фаза промывки.
- Подсоедините резервуар сбора крови к тракту крови (красные зажимы, ступенчатый адаптер).
- После того, как резервуар крови был подсоединён, непрерывная процедура обработки крови начинается нажатием клавиши **START** (пуск). Она выполняется автоматически до тех пор, пока резервуар крови не оказывается пустым, мешок солевого раствора пустым или мешок для отходов полным.