


ОТСАСЫВАТЕЛЬ «ОГАРИТ»

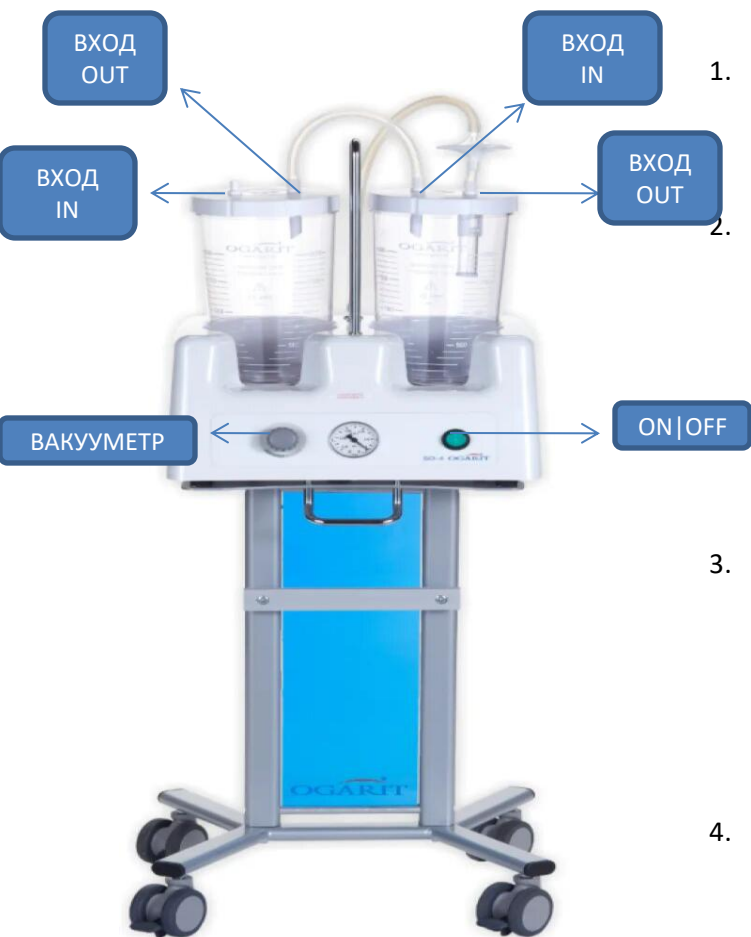

1. Подключите шнур питания к отсасывателю и подключите изделие к электрической сети. Включите аппарат при помощи выключателя в положение (ON), либо педали при отключенном выключателе (OFF).
2. Проверка работоспособности (герметичности трубочного соединения)
Пережав входное отверстие шланга пациента, установите максимальную величину вакуума, пользуясь показаниями вакуумметра и регулятором вакуума. По истечении некоторого короткого промежутка времени вакуумметр аппарата должен показывать разрежение (вакуум) не менее 80кПа (0,08Мпа), что указывает на герметичность системы и хорошую работу отсасывателя. Разожмите входное отверстие трубки, стрелка вакуумметра опустится ниже 20кПа (0,02Мпа)
3. Подсоедините к входу (IN) 1-ой банки-сборника стерильную аспирационную трубку (в дальнейшем - шланг пациента). Соедините (OUT) 1-ой банки с (IN) 2-ой, а (OUT) 2-ой банки воздушным фильтром.
Примечание: Синяя отметка (точка) на воздушном фильтре обозначает вход воздуха, его следует соединять с выходным отверстием (OUT) крышки банки-сборника, с обратной стороны которой подключено поплавковое устройство.
4. Выключать аппарат можно только полностью сбросив вакуум.
Аспирационные трубки и банки-сборники стерилизуйте автоклавированием в течение 20 минут. При этом предварительно снимите поплавков и пластмассовые части с крышек. Детали из пластмасс и резиновые крышки продезинфицировать в дез.растворе