


Инструкция по работе на комплексе рентгеновском диагностическом «ДИАКОМ»

по ТУ 9442-001-86112671-2009, исполнение 3, с принадлежностями
ООО «Севкаврентген-Д»

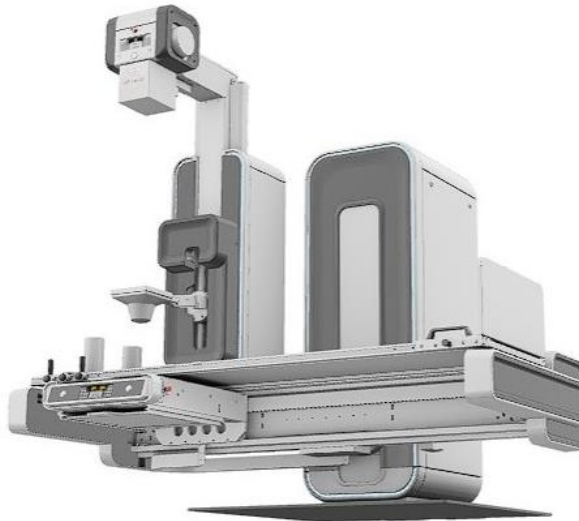

Общие рекомендации

Обращайтесь с оборудованием аккуратно и бережно. Внимательно изучите правила эксплуатации, и всегда следуйте им для максимального увеличения срока службы. Соблюдайте сроки и правила технического обслуживания.

Меры безопасности:

Эксплуатация комплекса должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии с техническим и требованиями, изложенным и в данном руководстве относительно безопасности. Необходимо принять меры предосторожности и не допускать к работе с комплексом неквалифицированный и/или не аттестованный персонал. Перед выполнением любых операций, персонал, допущенный к работе с комплексом, должен ознакомиться с техникой безопасности и средствам и защиты, указанным и в данном руководстве и с правилами и их применения. Технический персонал, проводящий установку, а также плановое и внеплановое обслуживание, должен предварительную получить аттестацию у производителя.

Контроль мер безопасности

Перед включением оборудования проверьте следующее; - Опасные зоны оборудования, где существуют потенциальные риски столкновения или раздавливания. - Опасные зоны оборудования, где пациент или оператор могут получить травму. - Опасные движения, которые могут привести к повреждению оборудования.

Стандартный порядок включения и выключения комплекса

1. Установить выключатель на главном щите питания кабинета в положение «включено»;
2. Убедиться в том, что выключатель (при его наличии) на корпусе генератора находится в положении «включено»;
3. Если в составе комплекса имеются стабилизаторы напряжения, блок контроля сети либо шкаф питания и защиты, проверить, что он и также включены. При необходимости включить их соответствующими кнопками /выключателями;

4. Нажать кнопку ВКЛ на пульте управления (при его наличии). Загорится индикатор включения электропитания ;
5. Включите ИБП АРМ (при его наличии), нажав на кнопку ВКЛ на его о лицевой панели. После включить АРМ и запустить программное обеспечения (если оно не запускается в автоматическом режиме). Появится окно авторизации.
Для выключения комплекса следует:
1. Нажать на кнопку на пульте управления (при его наличии). Индикатор электропитания погаснет;
2. Завершить работу А РМ (при его наличии);
3. Выключить ИБП АРМ (при его наличии) нажав на кнопку на его и лицевой панели;
4. Перевести автоматический выключатель на главном щите питания кабинета в положение «выключено». Н а рисунке 1.2 показаны основны е компоненты стола-штатива поворотного.

Аварийное отключение

Если во время выполнения исследования возникает ситуация, несущая в себе потенциальную или реальную опасность для пациента, оператор должен вмешаться, нажав красную аварийную кнопку, расположенную на внешней стороне стола.

Данная операция блокирует все движения стола и его компонентов, кроме перемещения ЭСУ от стола для исследований, которое производится при помощи джойстика 30, расположенного на основном пульте управления. Возникновение аварийной ситуации оповещается звуковым сигналом и указывается на основном пульте управления. Для восстановления рабочего состояния устройства, аварийную кнопку необходимо о повернуть по часовой стрелке до конца. Кроме того, если в момент нажатия аварийной кнопки, рентгенографическая кассета находилась на поле прицельной съемки или панорамной съемки, для возобновления работы устройства для прицельной рентгенографии кассету необходимо вынуть при помощи клавиши 10

Чистка и дезинфекция

Очищающие и дезинфицирующие средства могут образовывать в соединении с воздухом взрывчатые пары. Перед очисткой и дезинфекцией комплекс следует отключить от питающей сети.

Перед очисткой комплекс следует выключить и отключить автоматы электропитания. При влажной очистке необходимо соблюдать осторожность, так как вода, в случае проникновения в устройства комплекса, вызывает короткие замыкания во внутренней электросети и коррозию механических деталей. Лакированные детали и алюминиевые поверхности устройств комплекса очищаются влажной тряпкой и неагрессивным очищающим средством с последующим обтиранием сухой шерстяной тряпкой. Не применять едких, растворяющих или абразивных очищающих или полировальных средств! Хромированные детали следует обтирать сухой шерстяной тряпкой. Для очистки устройств комплекса допускается применять водный растворный мыла, 5% раствор водного аммиака, 5% раствор карбоната натрия, 30% раствор перекиси водорода. Следует учесть, что применение высокоспиртовых веществ (96% этанола и 96% изопропанола) может лишить акриловые пластмассовы е детали поверхностного глянца или сделать их хрупкими.

Дезинфекция

Перед дезинфекцией комплекс следует выключить и отключить автоматы электропитания. Дезинфекцию устройств комплекса, включая части изделия и соединительные кабели, следует производить протиранием. Для дезинфекции устройств комплекса допускается применять 1% раствор хлорамина, формалин, 96% этанол, 96% изопропанол, 3% раствор перекиси водорода. Следует учесть, что применение высокоспиртовых веществ (96% этанола и 96% изопропанола)

может лишить акриловые пластмассовые детали поверхностного глянца или сделать их хрупкими. Не применять едких или растворяющих дезинфицирующих средств! Применение газообразных дезинфицирующих средств не допускается. Дезинфекция устройств комплекса опрыскиванием не рекомендуется, так как при этом в них может проникнуть дезинфицирующее средство. Перед дезинфекцией помещения с помощью аэораспылителя следует тщательно закрыть полиэтиленовой пленкой, находящуюся в нем аппаратуру. Чтобы предотвратить при возможном возникновении тепловых потоков проникновение в аппаратуру капель, аппаратура заранее должна быть выключена и охлаждена. После дезинфекции помещения и осаждения аэрозольного тумана удалить защитную пленку и протереть наружные поверхности аппаратуры дезинфицирующим раствором. При применении дезинфицирующих средств, образующих в соединении с воздухом взрывчатые пары, следует обратить внимание на то, чтобы они перед повторным включением комплекса полностью улетучились. Применяемый способ дезинфекции должен соответствовать действующим нормам и правилам по технике дезинфекции и взрывобезопасности

Не пользуйтесь аварийным выключением при нормальной работе — такое выключение может привести к выходу оборудования из строя