




Инструкция по работе рентгеновском диагностическом телеуправляемом аппарате «ТелеКОРД-МТ»

1. Включить рубильник для подачи высокого напряжения
2. Затем включить питание аппарата на основной панели
3. Работа согласно установленным параметрам исследований
4. По завершению рабочего времени отключить аппарат и обесточить на рубильнике

Меры безопасности: При внештатных ситуациях обесточить на панели аппарата, выключить рубильник подачи высокого напряжения

1. Аварийная красная кнопка - под рентгеновским столом на панели управления с двух сторон
2. Аварийная красная кнопка - на панели аппарата в пультовой
3. Аварийная красная кнопка - на панели рубильника в пультовой

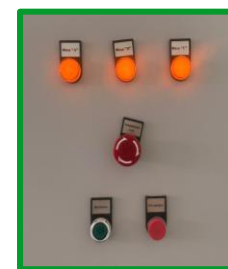

К аппарату допускаются врачи рентгенологи и рентгенолаборанты, связанные с проведением рентгенологических исследований, которые проходят обучение по радиационной безопасности и по правилам работы с источниками ионизирующего излучения.

Очистка и дезинфекция аппаратуры:

Перед началом очистки необходимо: **отключить аппарат от сети; снять все съёмные элементы (кассеты, сенсоры и т.д.).**

Этапы очистки:

Чистка внешних поверхностей. Используйте мягкую ткань, слегка смоченную в воде с нейтральным моющим средством. Протирайте корпус и экран, избегая попадания влаги в чувствительные части аппарата.

Очистка рентгеновской трубки. Удалите пыль и загрязнения с помощью безворсовых салфеток. Применяйте только средства, рекомендованные производителем, чтобы не повредить поверхность трубки.

Очистка сенсоров и датчиков. Используйте антибактериальные салфетки или жидкости, которые не содержат агрессивных химикатов. Важно избегать попадания жидкости в электрические компоненты.

Дезинфекция

После очистки проводится дезинфекция с использованием средств, подходящих для медицинского оборудования. Важно, чтобы они не оставляли следов и не повреждали поверхности аппарата.

Особые зоны для дезинфекции:

- места, контактирующие с пациентами и персоналом (ручки, кнопки управления, блоки для прикуса, височные крепления, опоры, поручни);
- поверхности, которые могли быть загрязнены в процессе работы.

Рекомендуемые средства: спиртовые растворы с концентрацией 70%; средства на основе хлора (если разрешены для применения в медицинской технике); дезинфицирующие средства широкого спектра действия (например, «ДЕЗЭКСПРЕСС»), которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы, грибки и вирусы.

Запрещено использовать:

- аэрозольные распылители—влага может проникнуть внутрь корпуса и привести к поломке;
- средства на основе аммиака, спиртов (в некоторых случаях), силикона, ацетона, масла;
- сухую ветошь—это может привести к распространению свинцовой пыли.

После обработки тщательно проверьте, чтобы на аппарате не осталось влаги, а все части были высушены.

Важные предостережения

- Не проводите обработку перед началом рентгенологических исследований или при работающем оборудовании. Перед использованием аппарата все поверхности и компоненты должны быть сухими.
- Не используйте средства, не разрешённые производителем оборудования.
- Не сокращайте и не увеличивайте время экспозиции средств — это может повредить материалы.
- Работайте в средствах индивидуальной защиты (перчатки, защита органов дыхания).

«ТелеКоРД-МТ» экспертного класса



Отличительной особенностью цифрового комплекса экспертного класса является возможность выполнять на одном приемнике рентгенографические и флюороскопические (до 30 кадров в секунду) исследования высокого разрешения. Эта возможность достигается благодаря использованию плоскочастичного полноформатного динамического цифрового приемника размером 43 x 43 см. Переключение режимов работы аппарата (рентгеноскопия / рентгенография) происходит мгновенно.

Плоская поверхность приемника позволяет избежать искажений изображения, связанных с масштабированием, а также захватывать области на 50% больше, чем при использовании 16-дюймового УРИ. Высокая чувствительность приемника и использование материалов с низким коэффициентом поглощения рентгеновского излучения позволяют существенно снизить лучевую нагрузку на пациента.


Широкий диапазон перемещений колонны излучателя позволяет проводить исследования любого органа без переукладки пациента



Пульт управления движениями стола



Комплектация

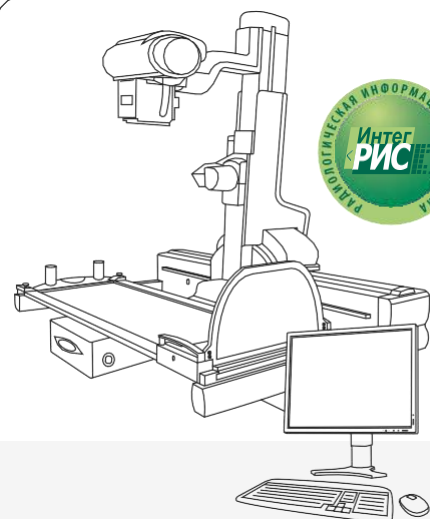

ДИАРМ-МТ

Аппаратно-программный комплекс (АРМ врача-рентгенолога)



Устройство печати цифровых медицинских изображений

ТелеКоРД-МТ

Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый с плоскочастичным цифровым динамическим приемником и АРМ лаборанта

Дополнительные опции:

- Сшивка изображений
- Ангиография

«ТелеКоРД-МТ» высокого класса



Дистанционный пульт управления штативом

Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый «ТелеКоРД-МТ» предназначен для выполнения всех видов рентгенографических и рентгеноскопических исследований, линейной томографии.



Комплекс оснащен 9 или 12-дюймовым УРИ с цифровой камерой, позволяющей записывать и хранить серии рентгеноскопических исследований неограниченной длительности.


Цифровые рентгенографические исследования выполняются с использованием мобильного плоскостанельного приемника высокого разрешения или системы компьютерной рентгенографии.

Материал деки стола обладает наименьшим показателем поглощения рентгеновского излучения.

Режим томографии доступен при любом положении стола и в любом направлении.

Отличительной особенностью комплекса является возможность проведения на одной рабочей станции цифровых рентгенографических и рентгеноскопических исследований.

Комплектация

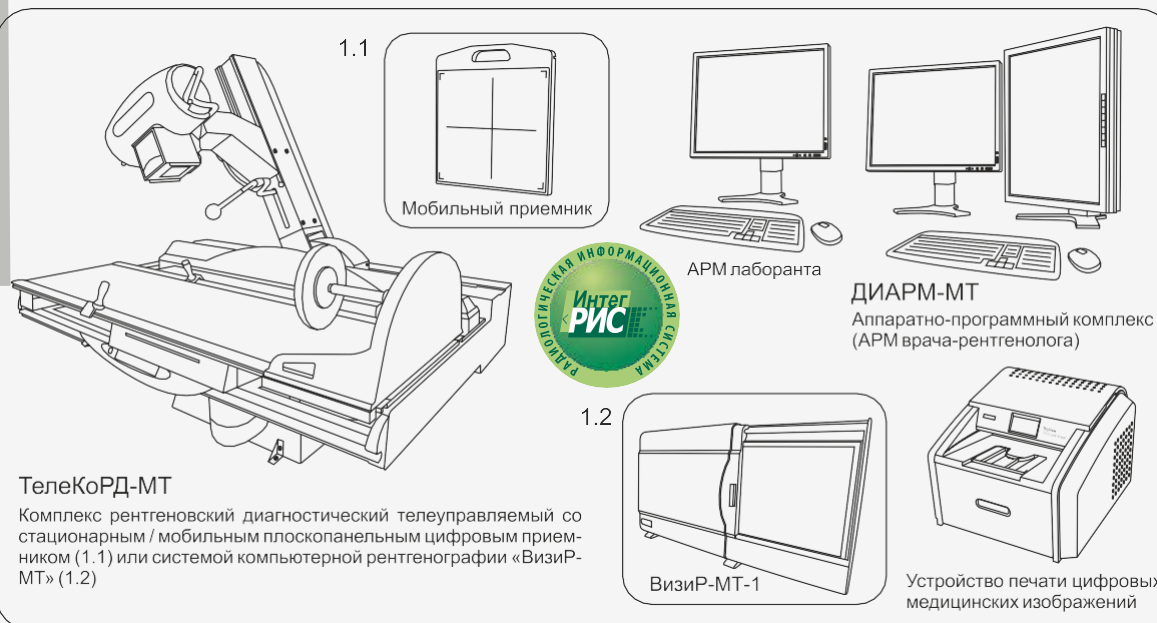

Дополнительные опции

- Лифт для облегчения укладки пациентов с ограниченной подвижностью
- Легкосъемный стул для выполнения исследований в положении сидя


«ТелеКоРД-МТ» среднего класса



Комплекс позволяет проводить рентгеноскопические исследования с помощью цифрового УРИ и рентгенографические исследования на рентгеновскую пленку форматов от 13х18 см до 35х43 см.




Комплектация

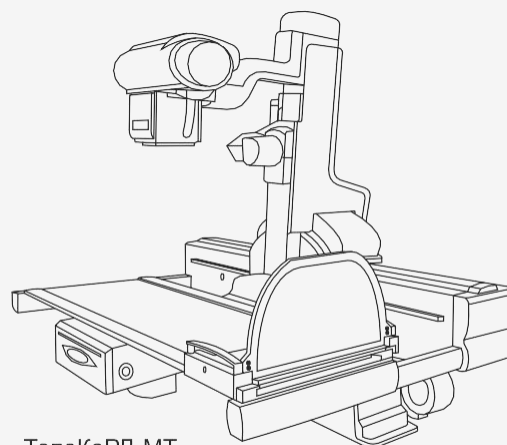

ТелеКоРД-МТ

Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый

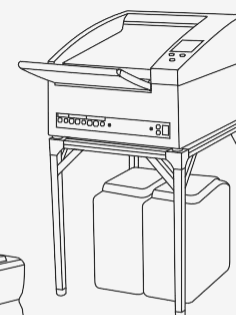

МиниМед-4МТ
Автоматическая
проявочная машина

