


Аппарат ЭКГ AXION



1. Для включения или выключения электрокардиографа необходимо нажать кнопку **ON/OFF** на клавиатуре.
2. После включения изделия автоматически выполняется **ТЕСТИРОВАНИЕ**

Аппарат ЭКГ AXION

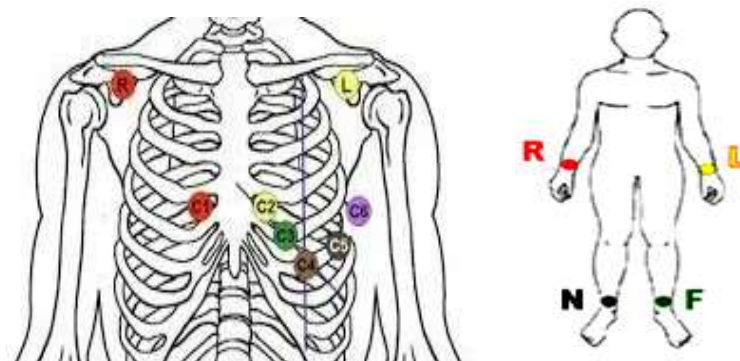

3. Подключить штекеры проводов отведений кабеля пациента к электродам.
4. Смочить места для установки электродов.
5. Наложить электроды на тело пациента в соответствии с данной схемы.
6. Установить мониторинг
 - на 6 отведений
 - скорость пленки на 25 мм
 - Вольтаж на 10
7. Нажатием кнопки «**Auto**» включить регистрацию.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ: наружную поверхность электрокардиографа и кабеля протирать дезинфицирующими салфетками двукратно.