


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПОРТАТИВНЫМ ПУЛЬСОКСИМЕТРОМ (AXION)

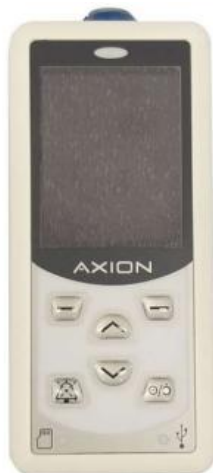

Порядок прикрепления многоцветного датчика SpO₂ тип «прищепка» к пациенту:

а) приложить палец к окошку датчика. Поверхность пальца должна полностью закрыть окошко детектора в нижней части датчика (рисунок 2.1). При этом зажимы датчика должны быть открыты, чтобы равномерно распределить захват датчика по всей длине пальца;

б) если датчик устанавливается на пальце руки, кончик пальца должен касаться поднятого пальцевого стопора внутри датчика;

в) проверить правильность расположения датчика. Положение считается правильным, когда верхняя и нижняя половинки датчика параллельны. Необходимо закрыть окошко детектора подушечкой пальца, чтобы обеспечить получение точных данных (рисунок 2.2). Расположить датчик так, чтобы провод был направлен вверх по руке пациента.

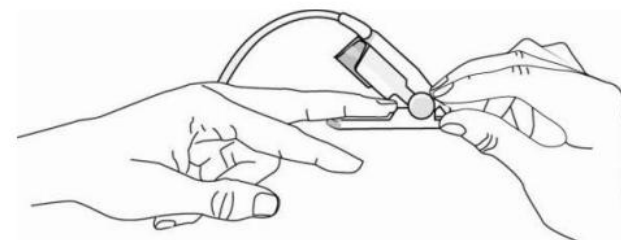


Рисунок 2.1 – Правильное положение пальца пациента на окошке детектора датчика SpO₂ тип «прищепка»



Рисунок 2.2 – Правильное расположение датчика SpO₂ тип «прищепка» на пальце пациента

2.2.4.3 Порядок прикрепления многоцветного датчика SpO₂ тип «манжета» к пациенту:

а) приложить палец к окошку датчика. Поверхность пальца должна полностью закрыть окошко детектора в нижней части датчика (рисунок 2.3);

б) проверить правильность расположения датчика. Расположить датчик так, чтобы провод был направлен вверх по руке пациента (рисунок 2.3).

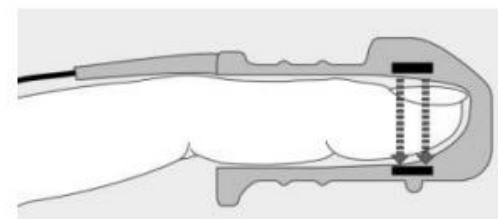


Рисунок 2.3 – Правильное расположение датчика SpO₂ тип «манжета» на пальце пациента