


Электроэнцефалограф «Нейрософт»

- Проверить соблюдение правил техники безопасности, затем подключить прибор к сети и включить сетевой тумблер.
- Обезжирить волосистую часть головы пациента спиртовой салфеткой.
- При использовании шапочки с предустановленными электродами (электродной системы) ее фиксировать на голове пациента так, чтобы расположение электродов соответствовало международной системе 10–20 и 10-10.
- При использовании отдельных электродов, требующих индивидуальной установки, их разместить согласно схеме, представленной на рисунке 2.

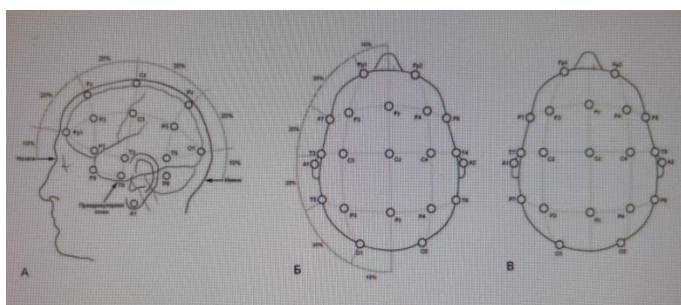

Схематичное изображение стандартизированной установки электродов согласно системе 10–20. А. Вид слева. Помимо системы 10–20 показано дополнительное расположение электродов нижней височной цепи (F9, T9, P9). Б. Вид сверху. В. Вид сверху, модифицированная номенклатура системы 10-20 [27].

- Установить референтный и заземляющий электрод (обязательно)
 - Набрать гель специальным шприцом для геля и ввести его через специальные отверстия в шапочке.
 - Выполнить исследование в необходимой последовательности согласно протоколу исследования.
- Остановить запись в программном обеспечении – убедиться, что запись данных прекращена, сохранить файл с указанием даты, времени и идентификатора пациента.
- Если регистрация ЭЭГ проводилась с использованием электродной шапочки - снять электродную шапочку с головы пациента. При регистрации ЭЭГ с помощью отдельных электродов (мостиковых, чашечковых) - аккуратно отсоединить электроды, начиная с затылочных и теменных областей, затем височных и лобных.
 - Обработать кожу пациента (при необходимости) – удалить остатки электродного геля салфеткой.
 - Проверить целостность электродов и проводов, убедиться в отсутствии повреждений оборудования.