


Порядок работы СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГП-160-"ПЗ"

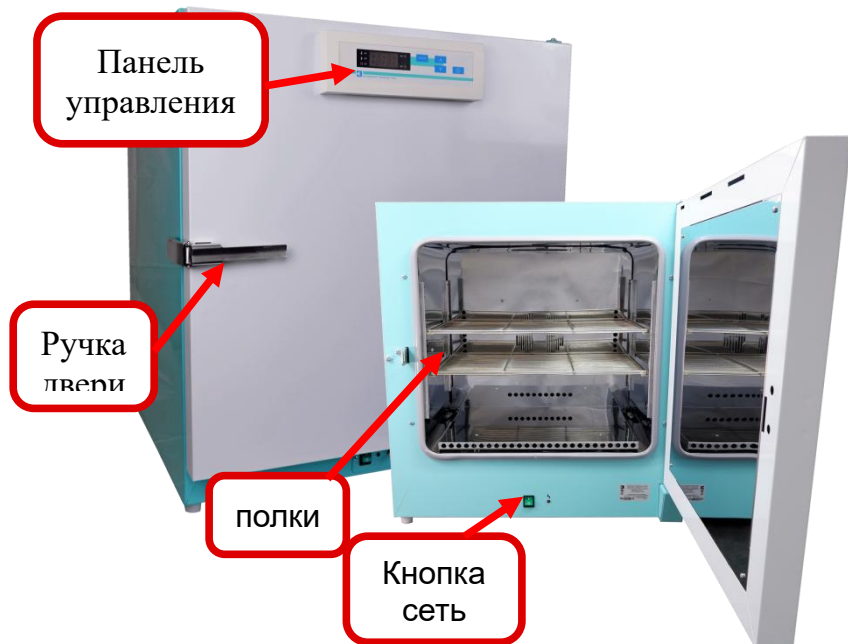

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. ПРОВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ;
2. ПРОИЗВОДИТЬ ЗАГРУЗКУ, ВЫГРУЗКУ И ЗАДАВАТЬ ДРУГОЙ РЕЖИМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАТОРА;
3. ПОМЕЩАТЬ В СТЕРИЛИЗАЦИОННУЮ КАМЕРУ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ А ТАКЖЕ ЕМКОСТИ С ЖИДКОСТЬЮ, СПОСОБНЫЕ К ИНТЕНСИВНОМУ ИСПАРЕНИЮ;

Порядок работы

- 1 Открыть дверь
- 2 включить **кнопкой сеть**
- 3 медицинские изделия следует загружать в таком количестве и таким образом, чтобы не препятствовать свободному прохождению воздуха к каждому медицинскому изделию на полках.
- 4 закрыть дверь
- 5 запустить **кнопкой пуск**

Помещать только
металлическое и
стеклянное.

Порядок работы СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГП-160-"ПЗ"

Установка температуры

Для изменения параметров выбранной программы удерживайте нажатым поле «РЕЖИМ» в течении 3-х секунд — блок управления перейдет в состояние редактирования выбранной программы. Индикатор температуры мигает. Нажатием на одно из полей выбора режима установите нужное значение температуры.

Установка времени

Вновь удерживайте нажатым поле «РЕЖИМ» в течении 3-х секунд — блок управления перейдет в режим редактирования времени выдержки. Индикатор времени начинает мигать. Нажатием на одно из полей выбора режима установите нужное значение времени.

Стерилизация Температура 180°C Время 60 мин

Обработка
производится
2-х
протиранием
с интервалом
15 мин
дез. раствором

