
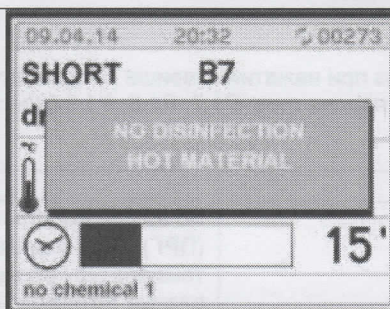


Рис. 6

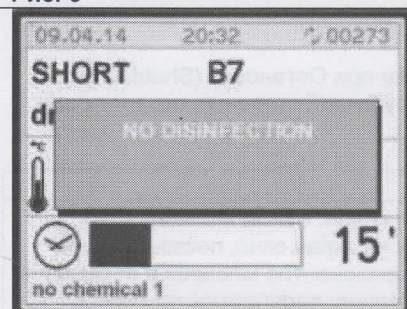

При остановке выполнения цикла появляется окно с сообщением о том, что дезинфекция не выполнена (Рис.6)

Окно на Рис. 6.A ("Дезинфекция не ОК") показывает, что не была достигнута температура 65°C. В иных случаях выводится окно, показанное на Рис. 6.B ("Дезинфекция не ОК Материалы горячие")

Рис. 6A

Рис. 6B

6.1.1 Клавиши

КЛАВИША		ОПИСАНИЕ
P1		Выбор программы "КОРОТКИЙ" цикл ("SHORT").
P2		Выбор программы "СТАНДАРТНЫЙ" цикл ("STANDARD").
P3		Выбор программы "ИНТЕНСИВНЫЙ" цикл ("INTENSIVE").
PRG (ПРОГРАММА)		Удерживайте клавишу PRG (Программа) нажатой в течение 5 секунд, чтобы вывести на экран Главное меню. Во время выполнения цикла эта клавиша позволяет вывести на экран информацию о температуре разных компонентов, показания аналоговых датчиков, тревоги и предупреждения.
P+		В режимах Wait (Ожидание) или Shutdown (Остановка) клавиша P+ позволяет выбирать другие сохраненные в памяти программы.
START (ПУСК)		После выбора нужной программы нажатие этой клавиши запускает цикл.
STOP (СТОП)		Эта клавиша позволяет остановить выполняемый цикл. Система управления прерывает процесс, выводит на дисплей сообщение о том, что дезинфекция не выполнена, удерживает дверь в заблокированном состоянии и, если необходимо, выводит сообщение о высокой температуре внутри камеры. Чтобы вернуть машину в нормальное состояние, нужно нажать клавишу еще раз.
		Открытие двери
		Закрывание двери
USB (Опция)		На панели управления имеется USB-порт, используемый для программирования машины и сохранения данных.
ДОСТУП К РЕЖИМУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИМЕЮТ ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫМ СООБЩЕН ПАРОЛЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ.		