



Стерилизатор «STEELCO»

1. Включить машину с помощью выключателя на передней панели
 2. Открываем дверь
 3. Загружаем
 4. Закрываем двери
 5. Нажмите клавишу «Меню», выбираем программу
 6. Нажмите клавишу «Стерилизация»
 7. Выбрать цикл: нажмите «Базовая программа»
 8. После выбора программы, нажмите клавишу «Подтвердить», затем «Пуск»
- 1 —включите машину спомощью выключателя напередней панели или,если машинаработает, нажатиеклавиіу "Меню"(MENU)напанелиуправления.

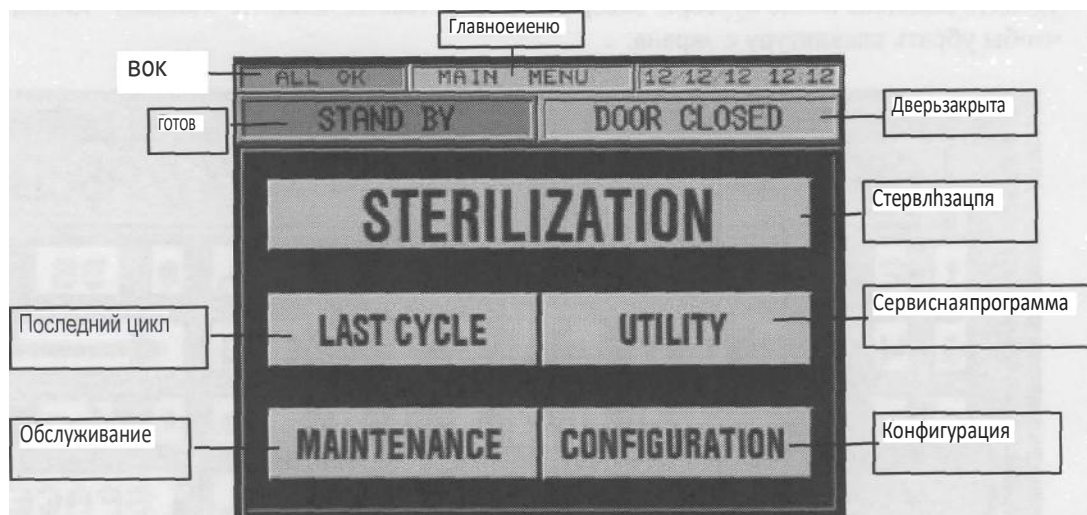

Меню

- 2 —Нажмтеклавишу"Стерилизация"(STERILIZATION)

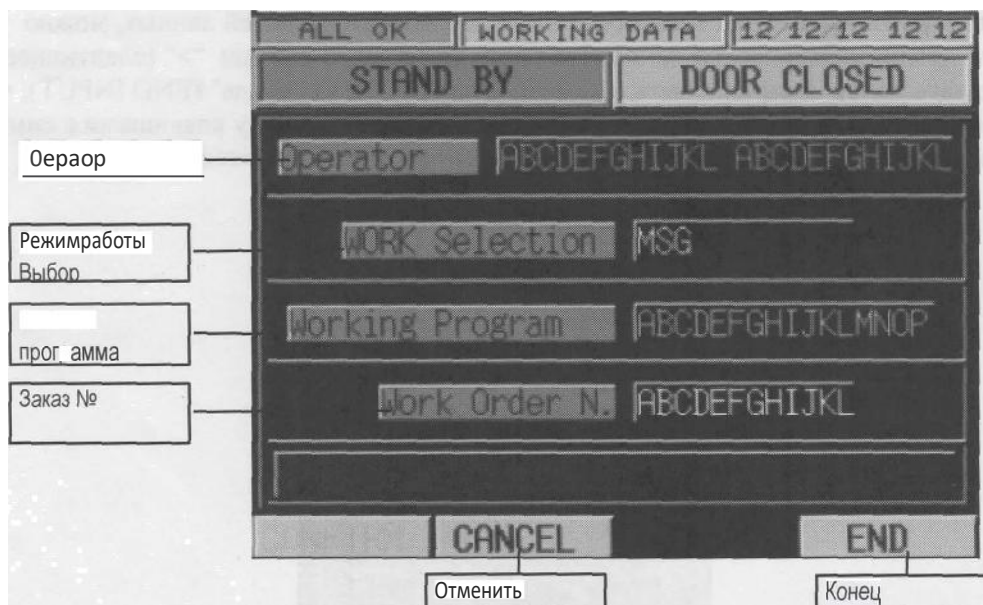

Стерилизация

- 3 —нажмите наполе рядом сознаком "Оператор"ивведите пароль оператора (который должен иметьсоответствующиестрава)спомощьюклавиатуры,появляющейсянаэкране,инажмите клавишу ввода на ней.
- 4 —еслимашинаработаетподуправлением программыSTEELCODATAислисистеманастроена такимобразом,чтоциклможнозадатьлибонапанели,либоперезадаюідуюсистему,нажав несколькоразнаполерядомсознаком"РежимработыВыбор"(WORKSelection)можновыбрать