


Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-02- «УОМЗ»



Облучатель ОФН-02 «УОМЗ» предназначен для эффективного лечения желтушки новорожденных без использования дополнительных лекарств в учреждениях родовспоможения, перинатальных центрах.

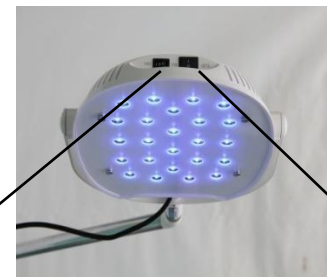

Переключатель ИЗЛУЧЕНИЕ

Выключение питания «СЕТЬ»

1. Перед проведением процедуры фототерапии необходимо закрыть плотной повязкой (специальными очками) глаза.
2. Установить облучатель около ложа ребенка;
3. Застопорить колеса, нажав ногой на педаль тормоза;
4. Установить осветитель на необходимой высоте за счет наклона верхней части;
5. Убедиться в том, что корпус осветителя установлен в горизонтальное положение;
6. Нажать на кнопку «СЕТЬ»
7. Установить переключатель ИЗЛУЧЕНИЕ в одно из положений («I» или «II») в зависимости от необходимой мощности.
8. Провести процедуру в соответствии с медицинскими методиками и указаниями врача;

ОБРАБОТКА: Дезинфекция. Изделия проводить двухкратным протиранием наружных поверхностей облучателя и стойки салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе. Через 1 час протереть поверхности салфеткой, смоченной чистой водой, а затем насухо протереть салфеткой.