

КОЛЬПОСКОП КС-02, вариант 302

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1 Установите кольпоскоп на ровную поверхность.
- 2 Ослабьте фиксатор рычага и отрегулируйте высоту и наклон головки.
- 3 Подключите кабель питания к сети 220 В.
- 4 Протрите оптику и рукоятки салфеткой.



2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Регулятор освещения – плавная настройка яркости.
- 2 СЕТЬ – включение питания.
- 3 БЕЛЫЙ / ЗЕЛЕНый – выбор режима освещения.
- 4 ЯРКОСТЬ – индикатор яркости.




3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1 Включите питание



Нажмите кнопку «СЕТЬ». Загорится индикатор.

- 2 Выберите режим освещения

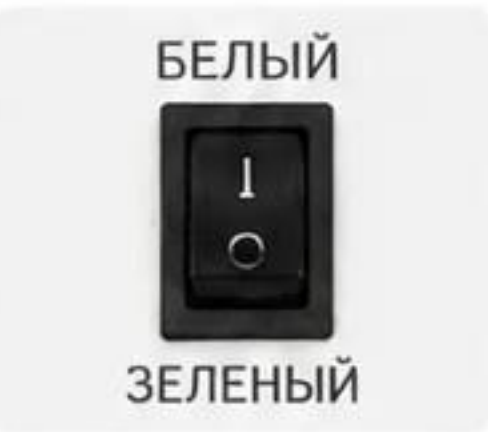

Кнопка «БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНый»:
• БЕЛЫЙ – обычное освещение
• ЗЕЛЕНый – для оценки сосудов и эпителия

- 3 Настройте яркость



Поверните регулятор освещения для комфортной яркости.

- 4 Отрегулируйте оптику



Установите межзрачковое расстояние и фокусировку окуляров.

- 5 Проведите осмотр



Позиционируйте головку с помощью рычага. Используйте удобное расстояние и угол обзора.

4. ПОСЛЕ РАБОТЫ

- Выключите питание кнопкой «СЕТЬ».
- Протрите оптические поверхности и рукоятки чистой мягкой салфеткой.
- Накройте кольпоскоп пылезащитным чехлом.
- При длительном перерыве – отключите кабель питания от сети.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте кольпоскоп только в закрытых помещениях.
- Избегайте попадания жидкости на прибор.
- Не разбирайте прибор самостоятельно.
- Регулярно проверяйте надежность креплений и чистоту оптики.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	КС-02, вариант 302
Увеличение	6,4х – 40х
Освещение	Светодиодное
Режимы освещения	Белый / Зеленый
Регулировка яркости	Плавная
Рабочее расстояние	300 мм (ном.)
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Мощность	20 ВА
Масса	не более 18 кг



Благодарим за выбор кольпоскопа КС-02, вариант 302!
Соблюдение этой инструкции обеспечит надежную и безопасную работу прибора.



Подробное руководство по эксплуатации – в комплекте поставки.