

КОМПЛЕКС МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» (КРЕСЛО СМОТРОВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ «ЗЕРЦ»)

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за выбор кресла «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН». Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



НАЗНАЧЕНИЕ

Кресло предназначено для проведения гинекологических, урологических и других диагностических и лечебных процедур.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кресло смотровое – 1 шт.
- Подколенники (опоры для ног) – 2 шт.
- Лоток из нержавеющей стали – 1 шт.
- Штатив для инфузий – 1 шт.
- Педаль управления – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь в исправности кресла и надежности фиксации всех элементов. Не превышайте допустимую нагрузку (до 200 кг).

1 РЕГУЛИРОВКИ КРЕСЛА

1. СПИНКА

Регулируется угол наклона спинки с помощью газовой пружины.

Поднимите рычаг с обеих сторон и установите нужный угол.

2. ВЫСОТА

Регулировка высоты кресла осуществляется с помощью электропривода.

Нажимайте на педали "↑" для подъема или "↓" для опускания.

3. ПОДКОЛЕННИКИ

Опоры для ног регулируются по высоте, углу и ширине.

Ослабьте фиксаторы, установите нужное положение и зафиксируйте.

4. СЕКЦИЯ СИДЕНЬЯ

Передняя часть сиденья имеет вырез для удобства процедур.

При необходимости используйте с лотком.

5. ЛОТОК

Лоток из нержавеющей стали устанавливается под сиденьем и легко вынимается для обработки.

Аккуратно выдвиньте лоток, проведите обработку и установите обратно.

2 УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАЛЮ


Педаль управления имеет 4 кнопки:

- ↑ – подъем кресла
- ↓ – опускание кресла
- ↗ – наклон спинки вверх
- ↘ – наклон спинки вниз



3 ШТАТИВ ДЛЯ ИНФУЗИЙ

Установите штатив в держатель и зафиксируйте винтом. Регулируется по высоте.

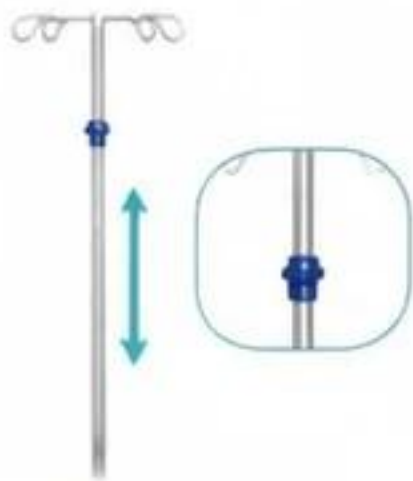

4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

Кресло оснащено 4 колесами с тормозами.



Перед перемещением отпустите тормоза на всех колесах.

5 УХОД И ОБРАБОТКА

Обрабатывайте поверхности кресла после каждого использования.

- Протирайте мягкие элементы влажной тканью с нейтральным моющим средством.
- Металлические части обрабатывайте дезинфицирующим раствором.
- Лоток вынимайте и стерилизуйте согласно требованиям.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура: +10...+35 °C
Относительная влажность: 30–75 %
Атмосферное давление: 700–1060 гПа

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Превышать допустимую нагрузку
• Использовать кресло на неровных поверхностях
• Допускать попадание жидкостей на механизм подъема
• Самостоятельно разбирать кресло

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
По всем вопросам обращайтесь к поставщику или производителю. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.