


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стоматологическая установка Intego Pro (Dentsply Sirona / Sirona)

⚠ БЕЗОПАСНОСТЬ: перед работой убедитесь, что установка исправна. При включении выполняется самотестирование привода кресла — пациент не должен находиться в кресле. Перед автоматическим движением кресла уберите элементы врача из зоны возможного столкновения.

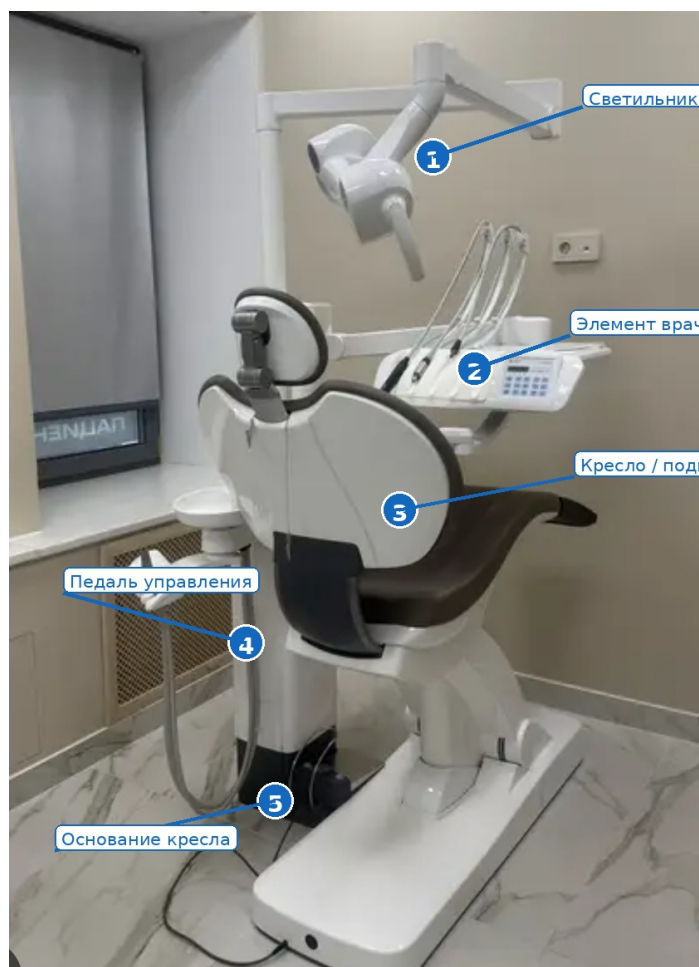

На фото отмечены основные видимые узлы. Комплектация Intego Pro может отличаться (EasyPad/EasyTouch, тип педали, инструменты, светильник и т. д.).

1. БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

№	Этап	Что делать
1	Включение	Включите главный выключатель на основании кресла. Дождитесь завершения загрузки и самотеста.
2	Подготовка	Проверьте воду/воздух, аспирацию, инструменты и наличие наконечников/насадок.
3	Посадка	Выберите положение входа/выхода; затем установите пациента и отрегулируйте кресло/подголовник.
4	Работа	Снимите нужный инструмент с держателя. Управляйте запуском и параметрами с педали/панели.

2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

□ Кресло	Положение входа/выхода, полоскания и рабочие программы выбираются с панели/сенсорного экрана или педали — в зависимости от комплектации.
□ Светильник	Включение/выключение и яркость зависят от установленной модели светильника. Не допускайте столкновения светильника с пациентом/оборудованием.
□ Инструменты	Турбина, мотор, ультразвуковой скейлер и другие инструменты имеют собственные режимы. Используйте настройки, предусмотренные для конкретного инструмента.
□ Вода	После лечения выполняйте промывку водяных линий по принятому в клинике протоколу. Не изменяйте параметры воды/дезинфекции без инструкции производителя.
□ Аспирация	После каждого пациента очищайте/промывайте аспирационные линии согласно гигиеническому протоколу клиники и инструкции к системе.

3. ГИГИЕНА И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Краткий чек-лист для медицинского персонала

ПОСЛЕ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

- Промыть водяные линии (purge) по протоколу.
- Очистить/дезинфицировать рабочие поверхности, панели и обивку подходящим средством.
- Обработать/стерилизовать инструменты и наконечники в соответствии с их IFU.
- Очистить аспирационные шланги/систему по принятому протоколу.

В НАЧАЛЕ ДНЯ

- Проверить готовность воды, воздуха, аспирации и инструментов.
- Выполнить автоматическую промывку водяных линий (Autopurge), если функция доступна и предусмотрена вашей комплектацией.
- Проверить работоспособность кресла, педали и светильника.

В КОНЦЕ ДНЯ

- Выполнить предусмотренную системой промывку/очистку водяных и аспирационных линий.
- Убрать и обработать инструменты согласно их IFU.
- Выключить установку главным выключателем на основании кресла.

4. ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

- Не перемещать кресло автоматически, если пациент или оборудование могут попасть в зону столкновения.
- Не разбирать узлы и не менять сервисные/калибровочные параметры самостоятельно.
- Не использовать для дезинфекции средства, не совместимые с материалами установки.
- Не эксплуатировать установку при неисправности, утечке воды/воздуха или повреждении кабелей — отключить и обратиться в сервис.

Важно: это краткая памятка, а не замена официальной инструкции. Функции и кнопки зависят от комплектации Intego Pro. Для точных процедур эксплуатации, очистки, дезинфекции, промывки и обслуживания используйте официальную IFU Dentsply Sirona.

Официальная инструкция: [Dentsply Sirona — Instructions for Use Intego / Intego Pro, 2024-11](#)