

ДЕФИБРИЛЛЯТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ ДА-Н

Краткая инструкция

1 ПРОВЕРЬТЕ состояние пострадавшего

- Убедитесь, что человек без сознания.
- Проверьте дыхание.
- Если дыхания нет или оно ненормальное — позовите на помощь и вызовите 112.



2 ВКЛЮЧИТЕ дефибриллятор

- Откройте сумку и извлеките дефибриллятор.



3 НАЛОЖИТЕ электроды

- Откройте упаковку с электродами.
- Снимите защитную пленку.
- Наложите один электрод под правую ключицу, как показано на рисунке.
- Наложите второй электрод под левую подмышку, сбоку.




4 СЛЕДУЙТЕ голосовым подсказкам

- Дефибриллятор проанализирует ритм сердца. Не касайтесь пострадавшего во время анализа.



5 ЕСЛИ РЕКОМЕНДОВАН РАЗРЯД

- Убедитесь, что никто не касается пострадавшего.
- Нажмите кнопку «Разряд».

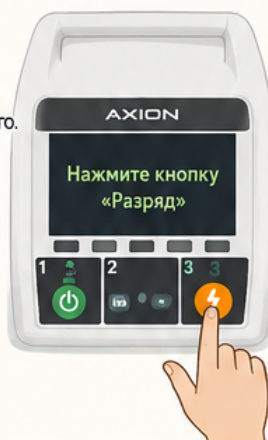


6 ПОСЛЕ РАЗРЯДА

- Немедленно начните СЛР.
- Делайте 30 нажатий на грудную клетку, затем 2 вдоха.



7 ПРОДОЛЖАЙТЕ до прибытия помощи

- Следуйте голосовым подсказкам дефибриллятора.

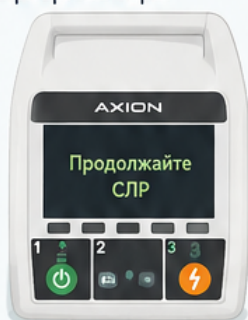

ВАЖНО

- Как можно скорее начните реанимацию.
- Следуйте голосовым командам.
- Не прекращайте СЛР, пока не придет медицинская помощь или пострадавший не начнет дышать.

112 Вызовите скорую помощь как можно скорее!

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Батарея



Электроды



Сумка



ПОМНИТЕ: Ваши действия могут спасти жизнь!