


ОПТИМА — краткая инструкция

Акушерское кресло-кровать • эксплуатация и обработка после пациента

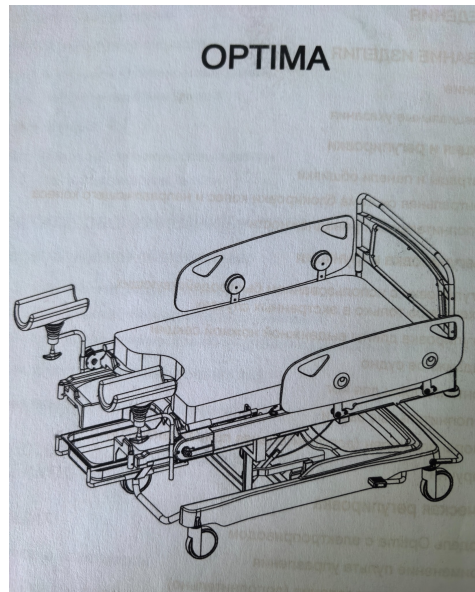

1. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕВОД В ПОЛОЖЕНИЕ

- 1** Проверьте устойчивость: колёса/опоры зафиксированы перед посадкой пациентки.
- 2** Отрегулируйте кресло: спинка, секции, опоры для ног и подголовник — под процедуру. Все фиксаторы должны быть надёжно закрыты.
- 3** Перед изменением положения предупредите пациентку; убедитесь, что руки, ноги и одежда не попадают в зоны движущихся механизмов.

2. ПОСЛЕ ПАЦИЕНТА — ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- 4** Удалите одноразовые материалы и утилизируйте их по локальному регламенту. Сначала удалите видимые загрязнения.
- 5** Обработайте поверхности: матрас/обивку, боковые ограждения, поручни, опоры для ног, ручки и доступные элементы каркаса. Нанесите средство согласно инструкции производителя средства. Не допускайте затекания жидкости в механизмы, электрику и органы управления.
- 6** Выдержите экспозицию строго по инструкции применяемого дезсредства. После этого — протереть/смыть остатки, если это требует инструкция средства или материала.
- 7** Высушите поверхности и проветрите зону. Перед следующим пациентом убедитесь, что обивка сухая, без остатков средства и повреждений.

3. ВАЖНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не использовать абразивы, металлические щётки и растворители без разрешения производителя.
- Не направлять струю жидкости/аэрозоля в электроприводы, разъёмы, пульты и подвижные узлы.
- Не менять положение кресла при наличии препятствий под секциями или при незакреплённых фиксаторах.
- Параметры конкретного дезсредства (концентрация, экспозиция, совместимость с обивкой) брать только из его официальной инструкции и документации на кресло.

Примечание: это краткая рабочая памятка по изображённому креслу «ОПТИМА». Она не заменяет руководство производителя. Для регламентной обработки в учреждении используйте утверждённое дезсредство и локальный СОП/СанПиН, совместимые с материалами кресла.