


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ХОЛОДИЛЬНИКА «ПОЗИС»

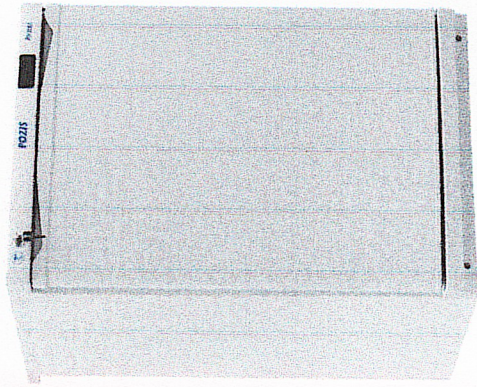

Холодильники фармацевтические «ПОЗИС» предназначены для хранения лекарственных препаратов, реагентов и биологических образцов в помещениях больниц и других учреждений здравоохранения.


Температурный режим обеспечивается заданием температуры T , выбираемой из диапазона от 4 до 13 °C, при этом температура в камере холодильника должна быть от $(T-2)$ °C до $(T+2)$ °C.

СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Тщательно промыть, перед этим отключить от сети, вынуть содержимое холодильника и насухо протереть.

ВНИМАНИЕ! Нельзя применять при уборке холодильника какие-либо порошки, пасты и щелочные растворы

Задание и регулировка температурного режима

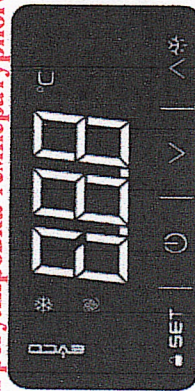

На экране блока управления отображается текущая температура в камере.

Символы:

☼ - индикатор работы компрессора;

- при нажатии на кнопку $\odot$ включается блок управления, на экране блока отображаются символы соответствующие состоянию холодильника / морозильника (текущая температура в камере, символ работы компрессора и т.д.), холодильник / морозильник работает.

Блок управления имеет функцию блокировки клавиатуры панели управления.

Для блокировки клавиатуры выполните следующее:

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- не выполняйте никаких действий с кнопками контроллера в течение 30 сек. На дисплее на 1 секунду появится надпись "Loc", после чего клавиатура будет автоматически заблокирована.

Для разблокировки клавиатуры:

- нажмите кнопку «SET» и удерживайте ее нажатой в течение 4 с. На дисплее в течение 4 секунд будет отображаться "UnL" (клавиатура разблокирована).

Изменение установленного значения температуры.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- одновременно нажмите кнопку «SET». При этом начнет мигать светодиод $\odot$ (индикатор компрессора: если индикатор светится постоянно, компрессор включен; если индикатор мигает - идет процесс изменения рабочей установки);

- нажатием кнопки $\vee$ или $\wedge$ выберите необходимое значение температуры; действие возможно в течение 15 секунд.