

AIR-FLOW MASTER PIEZON®


Пескоструйный и ультразвуковой аппарат

Краткая инструкция



1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подключите аппарат к сети и включите питание.

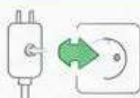

2. Установите порошок:

- AIR-FLOW – для наддесневой обработки
- PERIO-FLOW – для поддесневой обработки



3. Заполните резервуары водой до отметки MAX и установите обратно.



4. Подключите нужный наконечник; убедитесь в надежности соединения.



AIR-FLOW®
(пескоструй)



PERIO-FLOW®
(пескоструй поддесневой)



PIEZON®
(ультразвук)



Используйте только оригинальные порошки EMS и рекомендованную воду (без добавок).

2 РЕЖИМ AIR-FLOW® (ПЕСКОСТРУЙ)

1. Установите ручку AIR-FLOW®.



2. Выберите мощность (Power):

Рекомендовано: уровень 3–5.



3. Установите подачу порошка (Flow):

Рекомендовано: уровень 5–7.



4. Направьте струю под углом 45–60° на поверхность зуба. Работайте плавно, без давления.



Используйте AIR-FLOW® для снятия мягкого налёта и пигментации над десной.

3 РЕЖИМ PERIO-FLOW® (ПОДДЕСНЕВОЙ)

1. Установите ручку PERIO-FLOW®.



2. Выберите мощность (Power):

Рекомендовано: уровень 1–3.



3. Установите подачу порошка (Flow):

Рекомендовано: уровень 1–3.



4. Введите наконечник параллельно поверхности корня на глубину до 4 мм. Двигайтесь плавно.



Используйте PERIO-FLOW® для бережной обработки пародонтальных карманов.

4 РЕЖИМ PIEZON® (УЛЬТРАЗВУК)

1. Установите насадку PIEZON®.



2. Выберите мощность (Power):

Рекомендовано: уровень 2–6 в зависимости от клинической задачи.



3. Работайте лёгкими движениями.

Не используйте силу.

Орошение водяной струёй – обязательно.



Используйте PIEZON® для снятия твёрдых отложений и окончательной обработки.

5 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



1. Уменьшите подачу порошка и воды.



134°C



3 мин



2. Промойте систему чистой водой (прогон воды 20–30 сек).



3. Снимите и автоклавируйте наконечники/насадки.



4. Протрите корпус аппарата дезинфицирующей салфеткой.

6 ВАЖНО



Не направляйте струю на мягкие ткани и глаза.



Не используйте абразивы, не рекомендованные EMS.



Регулярно очищайте и обслуживайте аппарат.



Соблюдайте инструкции производителя и нормы дезинфекции.

Правильное использование – залог эффективности и безопасности!

EMS