

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ В МАШИНЕ

1. Включите питание. Для этого необходимо включить вводный автомат, а также кнопку включения
2. Откройте подачу воды на машину, проверьте наличие моющих средств
3. После загрузки панели оператора нажмите кнопку «Вход в систему», машина перейдет в главное меню
4. Откройте дверь машины, для этого находясь в главном меню панели оператора нажмите кнопку «Дверь», в появившемся окне нажмите кнопку «Разблокировка двери». После этого плавно опустите дверь.
5. Выкатите моечную вставку из моечной камеры на дверь машины.
6. Аккуратно разместите в корзинах предметы, предназначенные для обработки, корзины разместите на полках моечной вставки, поместите моечную вставку внутрь дезинфекционно-моющей машины.
 - Старайтесь не класть предметы друг на друга
 - Резервуары следует располагать так, чтобы вода легко вытекала из них
 - Длинные или тяжелые предметы, а также инструмент с замковыми частями лучше класть по центру корзины
 - Убедитесь что ничего не блокирует коромысла, и они могут свободно вращаться
 - Перед обработкой в машине производитель рекомендует проводить предварительную обработку ручным способом с применением моющих средств, зарегистрированных в установленном порядке на территории Таможенного союза и разрешенных для этих целей
7. Закройте и заблокируйте дверь. После успешной блокировки двери, индикатор будет подсвечен голубым цветом.
8. Запустите программу. Для запуска программы вернитесь на главный экран панели оператора нажмите кнопку «Прогр», появится экран «Выбор программы» после выбора программы нажмите кнопку «Выбор программы», в появившемся окне выберите нужную программу. В окне программа появится название выбранной программы, далее нажмите кнопку «Назад», система перейдет в главный экран, нажмите кнопку «Старт». Подтвердите запуск программы – в появившемся окне нажмите кнопку «Да». Машина начнет автоматическое выполнение цикла.
9. После завершения программы на дисплее появится сообщение «Цикл завершен»
10. Разблокируйте дверь машины.
11. Откройте дверь машины.

8 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС МАШИНЫ

Интерфейс оператора дезинфекционно-моечной машины состоит из нескольких экранов. Экран – это то, что отображается на дисплее в данный момент времени. На различных экранах отображается различная информация: температура, объем воды в камере, текстовые сообщения, иконки включения/выключения узлов установки, кнопки перехода к другим экранам и т.д. Для перехода к тому или иному экрану, оператору необходимо, нажать соответствующую кнопку.

Экран приветствия

При включении системы управления на дисплее отображается экран приветствия, показанный ниже.

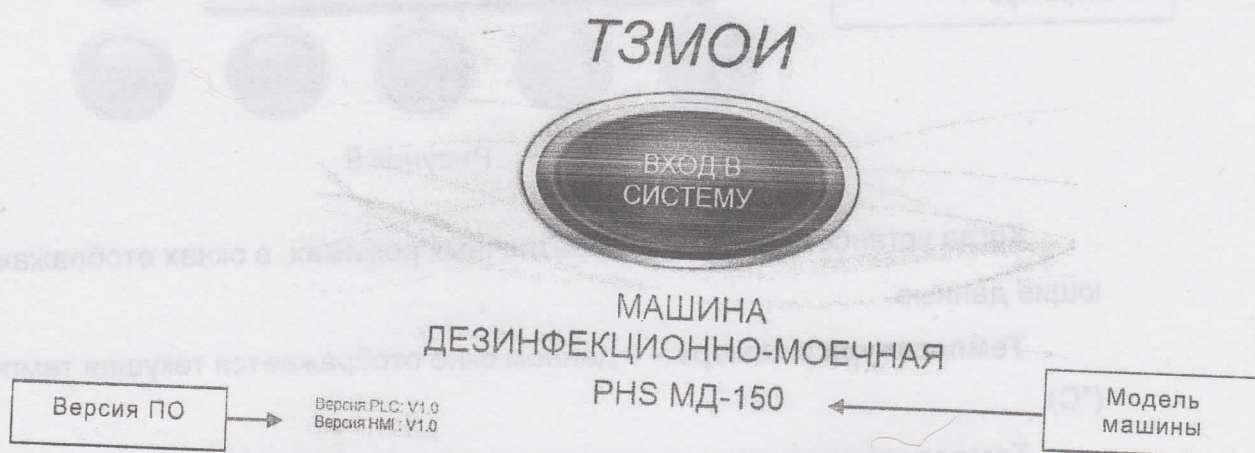


Рисунок 4

Вход в систему – кнопка для перехода к экрану главного меню.

PHS МД-150 – модель машины.

Версия ПО – версия программного обеспечения HMI и PLC.

Для перехода к главному меню (рис. 5), нажмите кнопку «Вход в систему».

Экран «Главное меню»

Главный экран предназначен для отображения данных о состоянии установки (температура, выбранная программа, текущая фаза программы и пр.), а также для пуска/останова процесса мойки и перехода к другим экранам управления.

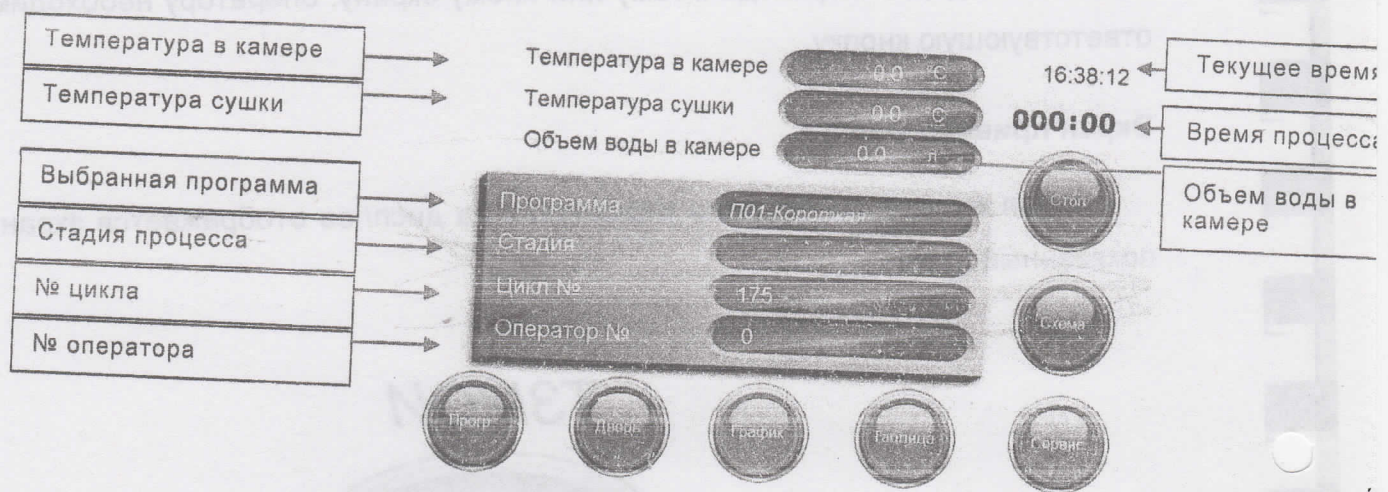


Рисунок 5

Когда установка находится в различных режимах, в окнах отображаются соответствующие данные.

Температура в камере – в данном окне отображается текущая температура в камере (°C).

Температура сушки – в данном окне отображаются текущие показания датчика температуры сушки (°C).

Объем воды в камере – в данном окне отображается текущий объем воды в камере (л).

Выбранная программа – в данном окне отображается выбранная программа. В зависимости от выбранной программы, в окне отображается:

П01 Коростая	П11 Пластмасса 75С	П21 Свободная 6	П31 Свободная 16
П02 Стандартная	П12 Пластмасса 60С	П22 Свободная 7	П32 Свободная 17
П03 Интенсивная	П13 Энзимная	П23 Свободная 8	П33 Свободная 18
П04 Кровь, 90С, 3мин	П14 Сушка	П24 Свободная 9	П34 Свободная 19
П05 Кровь, 90С, 10мин	П15 Пред. мойка	П25 Свободная 10	П35 Свободная 20
П06 Термодез, 93С, 3мин	П16 Свободная 1	П26 Свободная 11	П36 Свободная 21
П07 Термодез, 93С, 10мин	П17 Свободная 2	П27 Свободная 12	П37 Свободная 22
П08 Хим. дезинфекция	П18 Свободная 3	П28 Свободная 13	П38 Свободная 23
П09 Посуда	П19 Свободная 4	П29 Свободная 14	П39 Свободная 24
П10 Инструмент	П20 Свободная 5	П30 Свободная 15	П40 Свободная 25
Симуляция.			