

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ НА СТЕРИЛИЗАТОРЕ

1. Подайте электропитание на стерилизатор, путём включения вводного автомата стерилизатора, при этом должен загореться индикатор кнопки включения, расположенной на лицевой панели стерилизатора. После подачи питания, автоматически включатся ТЭНы камеры и дверей. Заданная температура нагрева – $50 \pm 5^\circ\text{C}$. При достижении заданной температуры камеры и дверей, процесс может быть запущен.

2. Нажмите на кнопку «вкл./выкл.» на лицевой панели, одновременно с этим включится сенсорная панель. После появления экрана приветствия (см. рис. 14), подтвердите вход в систему путём нажатия на сенсорной панели клавиши «Вход в систему». После этого на экране появится главное меню (см. рис. 15);

3. При помощи ножной педали (см. рис. 13) или сенсорного управления на панели НМІ (см. рис. 21), откройте дверь загрузки камеры стерилизатора. Во время цикла стерилизации открытие двери блокируется.

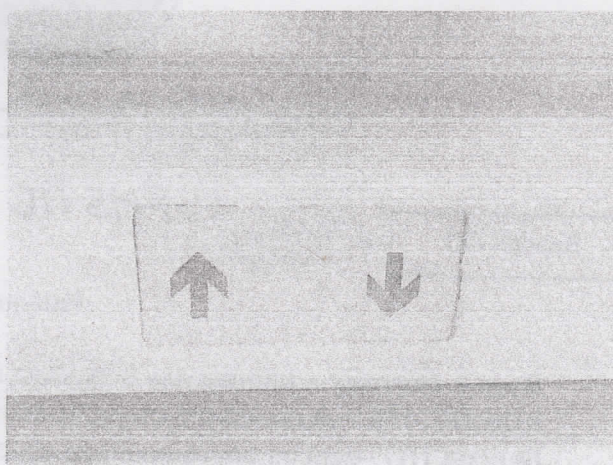


Рисунок 13

4. Подготовьте изделия к стерилизации (см. п 5);
5. Разместите изделия, подготовленные к стерилизации, на встроенные полки или в корзины стерилизатора;

6. Разместите химические и биологические индикаторы (при необходимости).

7. Закройте дверь камеры стерилизатора с помощью ножной педали (см. рис. 13) или сенсорного управления на панели НМІ (см. рис. 21);

8. Выберите необходимый для запуска цикл стерилизации. Программа должна быть выбрана в зависимости от типа и полоты загрузки камеры (см. п.5). Для выбора программы, находясь в главном меню (рис. 15), нажмите кнопку «Прогр.», произойдёт переход к экрану выбора программ (рис. 20). Для выбора программы нажмите на соответствующую кнопку с названием программы. Подтвердите запуск выбранной программы, после появления информационного сообщения, путём нажатия кнопки «Ок».

9. После выполнения стерилизационного цикла, на экране появится сообщение (см. рис. 49), после этого дверь камеры необходимо открыть и произвести разгрузку.

Экран главного меню

Главный экран предназначен для отображения данных о состоянии стерилизатора (температура, давление, выбранная программа, текущая фаза программы и пр.), а также для запуска/остановки процесса стерилизации и перехода к другим экранам управления.

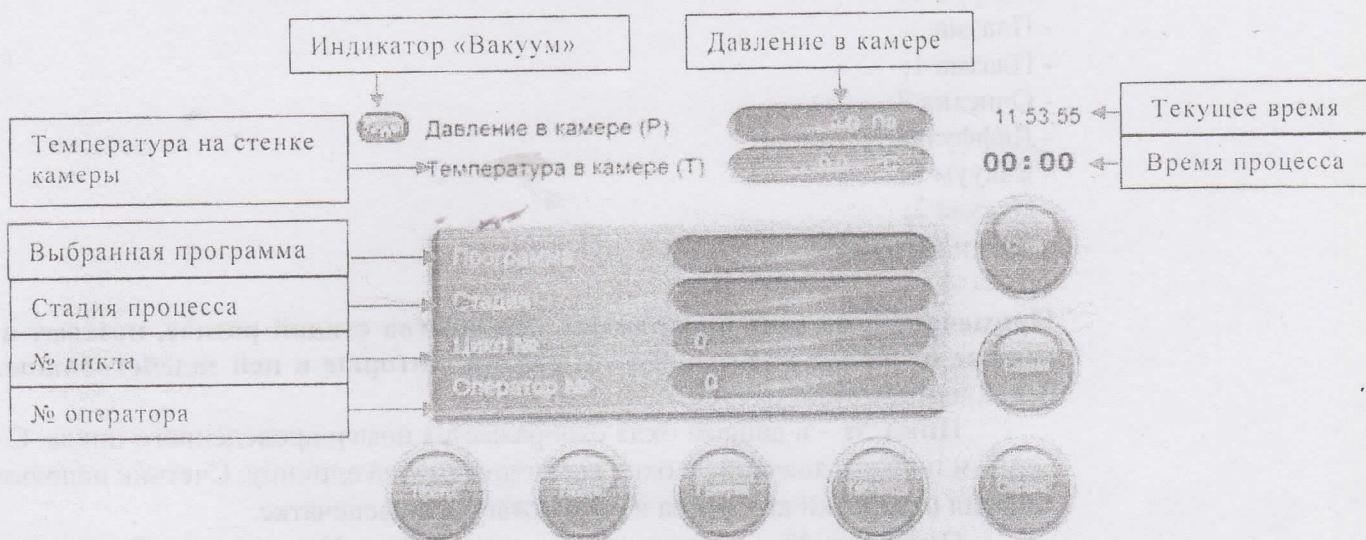


Рисунок 15

Когда установка находится в различных режимах, в окнах отображаются соответствующие данные.

Давление в камере (P) – в данном окне отображается текущее давление в камере (Па).

Температура на стенке камеры (T) – в данном окне отображается текущая температура на стенке камеры (°C).

Индикатор «Вакуум» – индикатор появляется, если давление в камере ниже 96кПа.

Выбранная программа – в данном окне отображается выбранная программа. В зависимости от выбранной программы, в окне отображается:

- Стандартный цикл;
- Увеличенный цикл;
- Ускоренный цикл;
- Симуляция.

Программа «Симуляция» отображается в данном окне при запуске теста принтера. Также данное окно может быть пустым, если ни одна из программ не выбрана. Для выбора соответствующей программы, необходимо перейти в экран выбора программ (кнопка «Программа») и нажать соответствующую кнопку. После проведения цикла, выбранная программа сохраняется.

Примечание: выбор программ возможен только до запуска процесса. Если процесс запущен, а оператору необходимо выбрать другую программу, то необходимо остановить текущий процесс кнопкой «Стоп», подтвердить его завершение и только потом выбрать новую программу.

Стадия – в данном окне отображается текущая стадия программы.