


Обработка производится специальными салфетками для обработки аппаратуры.



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА КТГ

РЕЖИМ «ДО РОДОВ»

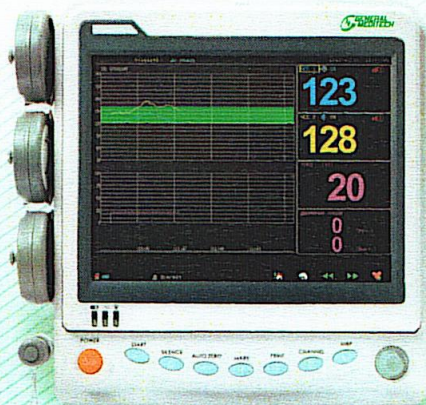

Кнопки	G6B	Значение кнопок
POWER		Включение/выключение монитора
START		Меню «Информация о пациенте»
SILENCE		Включение/выключение звуковых тревог на 2 мин
AUTO ZERO		Обнуление токометрии/запуск/завершение анализа
MARK		Маркировка специалиста
PRINT		Запуск/завершение печати
CHANNEL		Переключение каналов ЧСС1 и ЧСС2
NIBP		Мониторинг НИАД

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите кнопку «POWER» и удерживайте в течение 3-х секунд для включения/выключения монитора.

2. НАЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКОВ: Нанесите тонкий слой ультразвукового геля на датчик ЧСС, затем наложите датчики ЧСС и ТОСО на живот пациентки до появления устойчивого сигнала и закрепите при помощи ремней.

! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАНЕСЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ГЕЛЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ТОСО ДАТЧИКА

3. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ПАЦИЕНТЕ: Нажмите кнопку «START» и введите следующую информацию при помощи вращающегося джойстика : «номер ID» (создать автоматически или ввести номер карты/истории болезни), «Пациент», «Врач», «Неделя беременности», и установите режим «ДО РОДОВ», при необходимости введите комментарии в «Примечание», затем нажмите «ОК» для сохранения данных.

4. ЗАПУСК АНАЛИЗА: Нажать кнопку «AUTOZERO» для обнуления ТОСО датчика и начала анализа, затем нажать кнопку «PRINT» для начала печати анализа в режиме реального времени. В строке состояния запускаются таймеры в виде двух числовых значений (в секундах) анализа и печати.

5. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА: По истечении заданного фиксированного времени распечатается автоматический анализ КТГ. Результаты сохраняются в памяти монитора, просмотреть и распечатать их можно при нажатии на значок , далее «История анализа»/«График обследования».

! ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО КРИТЕРИИ БЫЛИ НЕ СОБЛЮДЕНЫ, МОНИТОР ЗАПУСТИТ АНАЛИЗ ПОВТОРНО.

Есть возможность распечатать/сохранить результат анализа по истечении 10 минут после начала обследования нажатием на кнопку «AUTOZERO» при этом анализ завершится.