

Краткая инструкция по работе с монитором

Индикатор
тревоги

Кнопка для
включения/
выключения
прибора



Окно ввода
интервала НИАД

Манипулятор для
управления
прибором

Кнопка "NIBP" для
измерения АД

Включение монитора:


1. Нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»
2. Надеть манжету и пульсоксиметр пациенту
3. Нажать кнопку «NIBP»
4. Задать время измерения в «Окне ввода интервала»

Допускается применение дезинфицирующих средств отечественного и зарубежного производства по МУ-287-113 с учётом методических документов по их применению;

Краткая инструкция по работе с монитором

Индикатор
тревоги

Кнопка для
включения/
выключения
прибора

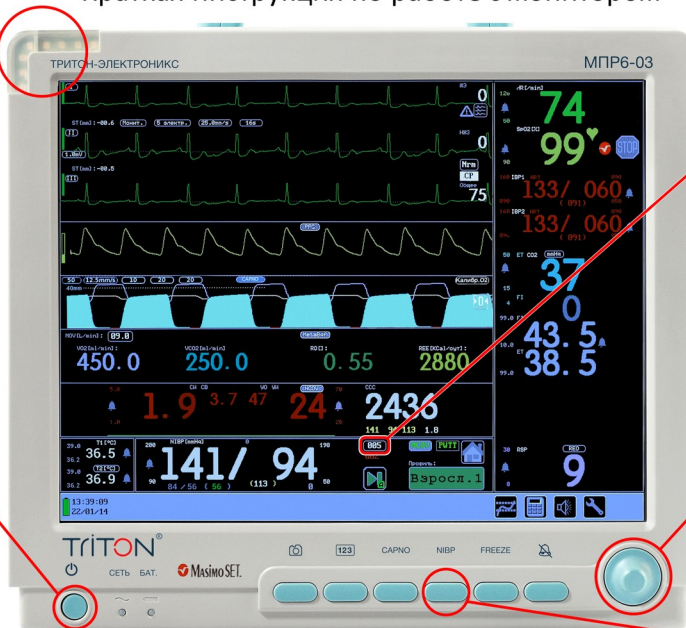

Окно ввода
интервала НИАД

Манипулятор для
управления
прибором

Кнопка "NIBP" для
измерения АД

Включение монитора:

1. Нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»
2. Надеть манжету и пульсоксиметр пациенту
3. Нажать кнопку «NIBP»
4. Задать время измерения в «Окне ввода интервала»

Допускается применение дезинфицирующих средств отечественного и зарубежного производства по МУ-287-113 с учётом методических документов по их применению;

Для дезинфекции пользоваться безворсовой салфеткой, смоченной в дезинфицирующем средстве или готовой дезинфицирующей салфеткой и осторожно протереть: корпус, экран, манжету, датчики и кабели.