

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР МОЧИ ERBA LAURA



НАЗНАЧЕНИЕ

Полуавтоматический анализатор мочи предназначен для анализа физико-химических параметров мочи с использованием тест-полосок.




ВАЖНО!

- ✓ Прибор полуавтоматический: тест-полоску вставляет оператор.
- ✓ Никаких кнопок нажимать не нужно.
- ✓ В анализаторе нет реагентов.
- ✓ Прибор не выполняет самоочистку – его необходимо регулярно протирать.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1** Убедитесь, что анализатор установлен на ровной поверхности.

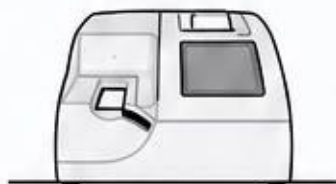

- 2** Подключите кабель питания и включите анализатор.



- 3** Анализатор автоматически выполнит самопроверку и будет готов к работе.




- 4** Подготовьте свежий образец мочи и тест-полоску.



2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1** Окуните тест-полоску в образец мочи на 1–2 секунды и удалите излишек жидкости, проведя краем полоски о край контейнера.

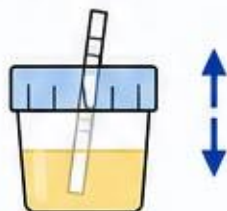

- 2** Держите полоску горизонтально 60 секунд для завершения реакции.



- 3** Вставьте тест-полоску в паз анализатора цветными полями вверх до упора.



- 4** Анализатор автоматически считывает результаты. Результаты отобразятся на экране.



3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



Извлеките использованную тест-полоску и утилизируйте как медицинские отходы.



При необходимости протрите прибор мягкой тканью.



Выключите питание и отсоедините кабель, если не планируется дальнейшая работа.

4. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Ежедневно протирайте внешние поверхности анализатора мягкой тканью, слегка смоченной в воде.



Особое внимание уделяйте области входа для тест-полоски.



Не используйте абразивные средства, спирт, ацетон и агрессивные растворители.



Анализатор не имеет системы самоочистки – чистота прибора влияет на точность измерений.



ПОМНИТЕ!

Чистый и ухоженный анализатор – залог точных и надежных результатов!