

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

АНАЛИЗАТОР МОЧИ LABUMAT 2 URISED



НАЗНАЧЕНИЕ

Анализатор мочи предназначен для автоматического анализа физико-химических и микроскопических параметров мочи.




ВАЖНО!

- ✓ Используйте только оригинальные реагенты и расходные материалы.
- ✓ Не открывайте дверцы во время работы.
- ✓ Не перемещайте анализатор во время работы.
- ✓ Перед обслуживанием выключите питание и отсоедините кабель питания.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1** Установите анализатор на ровную поверхность.

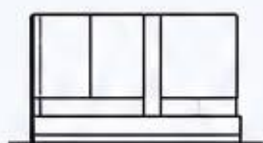

- 2** Подключите кабель питания и включите анализатор.



- 3** Включите компьютер и запустите программу LabUMat 2.



- 4** Проверьте уровень реагентов и отходов, при необходимости замените.




- 5** Дайте анализатору прогреться в течение 10–15 минут.



2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1** Тщательно перемешайте образец мочи и установите пробирку в штатив.

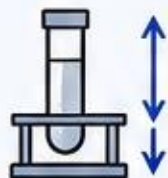


- 2** Установите штатив с образцами на подачу (anaMat intake).



- 3** Выберите образец в программе и нажмите «Старт».



- 4** Анализатор автоматически выполнит анализ физико-химических и микроскопических параметров.

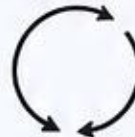

- 5** По завершении анализа результаты отобразятся в программе.



- 6** Извлеките штатив с образцами и утилизируйте отходы в соответствии с требованиями.



3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



Извлеките все образцы и штативы.



Проверьте уровень реагентов и отходов.



Очистите поверхности анализатора мягкой тканью.



Выключите анализатор и компьютер.

4. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Ежедневно очищайте поверхности и зону забора.



Регулярно проверяйте уровень реагентов и отходов.



Выполняйте плановое обслуживание согласно руководству пользователя.



Используйте только оригинальные расходные материалы и реагенты.



ПОМНИТЕ!

Чистота системы и правильное обслуживание – залог точных и надежных результатов!

