

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ТРОМБОЭЛАСТОГРАФ HEMOSCOR



НАЗНАЧЕНИЕ

Анализатор тромбоэластографии предназначен для оценки свертывающей системы крови и функциональной активности тромбоцитов методом тромбоэластографии.





ВАЖНО!

- Использовать только реагенты и расходные материалы, рекомендованные производителем.
- Не перемещайте прибор во время работы.
- Не прикасайтесь к держателям кювет и пинам.
- Соблюдайте чистоту рабочих поверхностей.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1 Подключите прибор к электросети 220 В.
- 2 Включите питание (кнопка POWER).
- 3 Дождитесь выхода прибора на рабочую температуру 37,0 °C.
- 4 Установите кюветы и пины на свои места.
- 5 Запустите программное обеспечение на компьютере.

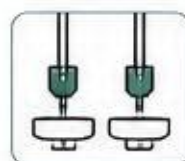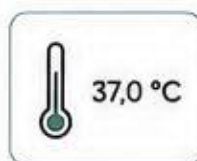

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1 Подготовьте образец крови согласно протоколу.
- 2 Заполните кювету образцом до метки.
- 3 Установите кювету в слот прибора.
- 4 Установите пин в кювету.
- 5 Запустите анализ в программе.
- 6 Дождитесь завершения анализа и сохраните результаты.



3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- 1  По окончании анализа извлеките пины и кюветы.
- 2  Утилизируйте использованные образцы и расходные материалы.
- 3  Очистите кюветы и пины согласно инструкции производителя.
- 4  Выключите питание прибора.
- 5  Протрите рабочие поверхности.

4. ИНДИКАТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ



 **POWER** (зелёная кнопка)
Включение / выключение прибора.

 **SPEED** (жёлтая кнопка)
Старт / стоп анализа.

Дисплей
Отображает температуру (°C) и скорость (мм/мин).



ПРИМЕЧАНИЕ!

Подробные сведения см. в Руководстве пользователя HEMOSCOR.