

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Центрифуга Bio-Rad ID-Centrifuge 12 S II



ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Компактная настольная центрифуга
- ✓ Простое управление
- ✓ Надежная и безопасная работа
- ✓ Подходит для лабораторных исследований

1 ПОДГОТОВКА



Подключить центрифугу к электросети.




Установить пробирки в ротор **симметрично**, напротив друг друга.



Проверить, что пробирки установлены устойчиво и крышка ротора закрыта.

2 ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

- 1 Поместить подготовленные пробирки в центрифугу.
- 2 Закрыть крышку.
- 3 Установить необходимые параметры центрифугирования согласно методике исследования.
- 4 Нажать кнопку **START** для запуска.
- 5 Дождаться полной остановки ротора.

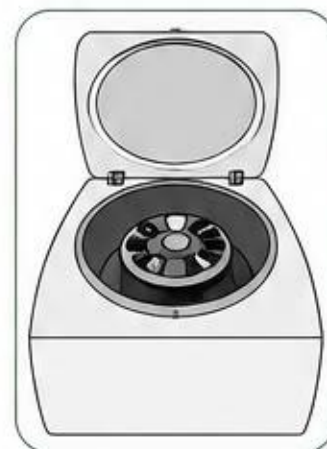


3 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



После полной остановки ротора нажать кнопку **STOP/OPEN**.



Открыть крышку и осторожно извлечь пробирки.

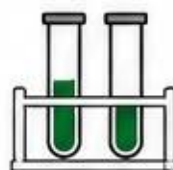

Проверить пробирки и при необходимости перейти к дальнейшим действиям.




После окончания работы выключить прибор (отключить от сети при необходимости).



ВАЖНО!

- Не открывать крышку до полной остановки ротора.
- Не запускать центрифугу при неравномерной загрузке ротора.
- Следить за исправностью ротора и отсутствием повреждений пробирок.
- Не превышать максимально допустимые значения скорости и времени, указанные в методике исследования.

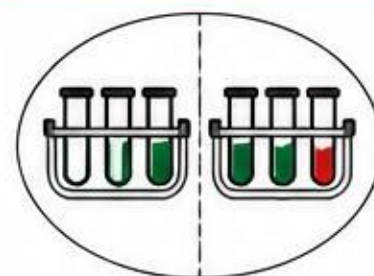

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО



Перед началом работы убедитесь в исправности прибора и отсутствии посторонних предметов в роторной камере.

BIO-RAD