

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРИФУГА ELMi CM-6MT



ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Компактная и бесшумная
- ✓ Цифровое управление параметрами
- ✓ Точный контроль скорости и времени
- ✓ Автоматическое торможение ротора
- ✓ Подходит для лабораторных исследований

1 ПОДГОТОВКА



Подключите центрифугу к электросети.



Установите пробирки в ротор симметрично (напротив друг друга).



Убедитесь, что пробирки надежно закреплены и ротор установлен правильно.



Закройте крышку до щелчка. Откроется блокировка кнопок.

2 ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

- 1 Нажмите кнопку Settings  для входа в меню настроек (при необходимости).
- 2 Кнопками ▲ / ▼ установите необходимые параметры:
 - RPM – скорость вращения (об/мин)
 - RCF – относительное центробежное ускорение (g)
 - Timer – время работы (мин:сек)
- 3 Кнопками – / + установите значение параметра.
- 4 Нажмите кнопку START/STOP  для запуска центрифугирования.
- 5 Во время работы на дисплее отображаются текущие значения и оставшееся время.



3 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- 1 Дождитесь полной остановки ротора.
- 2 Откройте крышку, нажав кнопку OPEN. 
- 3 Извлеките пробирки из ротора.
- 4 После окончания работы выключите прибор (при необходимости отключите от электросети).

4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


	Открытие крышки (доступно после полной остановки ротора)
	Запуск / остановка центрифугирования
SETTINGS 	Вход в меню настроек и выбор параметра
▲ / ▼	Выбор параметра / изменение значения
– / +	Уменьшение / увеличение значения параметра
RPM RCF Timer	RPM – скорость вращения (об/мин) RCF – относительное центробежное ускорение (g) Timer – время работы (мин:сек)



ВАЖНО!

- Не открывайте крышку до полной остановки ротора.
- Всегда устанавливайте пробирки симметрично.
- Не превышайте максимальные значения скорости и времени, указанные в инструкции к ротору.
- При неисправности прибора прекратите работу и сообщите ответственному лицу.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОБИРОК

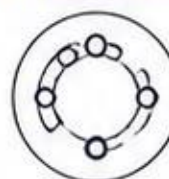

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации центрифуги ELMi CM-6MT.

ELMI