

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Центрифуга Medcaptain ТХК-4



ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Надёжная и простая в использовании
- ✓ Электронное управление
- ✓ Тихая работа
- ✓ Автоматическое торможение ротора при открытии крышки
- ✓ Подходит для лабораторных исследований

1 ПОДГОТОВКА



Подключите центрифугу к электросети.



Установите пробирки в ротор симметрично (напротив друг друга).



Убедитесь, что пробирки надёжно зафиксированы и ротор установлен правильно.



Закройте крышку до щелчка. Откроется блокировка кнопок.

2 ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

1 Нажмите кнопку MODE для выбора необходимого режима (RPM или TIME).

2 Кнопкой START запустите центрифугирование.

3 Во время работы на дисплее отображаются текущие значения параметров и время.

4 После завершения работы ротор остановится автоматически.



Выбор режима

Запуск

Остановка / открытие крышки

3 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Нажмите кнопку **MODE** для переключения режима:

RPM

Режим **RPM** – установка скорости вращения (об/мин).
Диапазон: 500–4000 об/мин.

TIME

Режим **TIME** – установка времени работы.
Диапазон: 1–99 мин.
Шаг: 1 мин.

+

Увеличение значения параметра

–

Уменьшение значения параметра

4 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



Нажмите кнопку STOP OPEN после полной остановки ротора. Откройте крышку.



Извлеките пробирки из ротора. Будьте осторожны.




После окончания работы выключите прибор (при необходимости отключите от сети).



ВАЖНО!

- Не открывайте крышку до полной остановки ротора.
- Всегда устанавливайте пробирки симметрично.
- Не превышайте максимальные значения скорости и времени, указанные в методике исследования.
- При неисправности прибора прекратите работу и сообщите ответственному лицу.

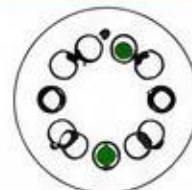

ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО



Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации центрифуги Medcaptain TXK-4.

Medcaptain