

АКВАДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СО ВСТРОЕННЫМ НАКОПИТЕЛЕМ

LISTON A 1125



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, работой и правилами эксплуатации аквадистиллятора электрического с накопителем (в дальнейшем именуемого “аквадистиллятор”) и распространяется на аквадистилляторы электрические с накопителем Liston A 1104, Liston A 1110, ListonA 1125

К работе с аквадистиллятором допускается только персонал, ознакомленный с настоящим руководством по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Аквадистилляторы электрические предназначены для производства дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях. Дистиллированная вода соответствует Государственной фармакопее ФС 42-2619 .

1.2. Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 (с рабочей температурой от плюс 10°C до плюс 35°C и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре +25°C).

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ АКВАДИСТИЛЛЯТОРА

При включении аквадистиллятора с помощью переключателя «СЕТЬ» (переключатель подсвечивается при включении) – загорается сигнальная лампа «СЕТЬ», происходит срабатывание клапана поз.21 подачи исходной воды (Рисунок 1) - загорается сигнальная лампа «ПОДАЧА ИСХОДНОЙ ВОДЫ». Как только уровень воды в испарителе достигнет нижнего датчика контроля уровня в испарителе поз. 9, загорается сигнальная лампа «ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В ИСПАРИТЕЛЕ», далее автоматика включает нагревательные элементы поз.17, при этом загорается сигнальная лампа «НАГРЕВ».

2.1.1. Установление рабочего режима происходит за время не более 15 минут для аквадистилляторов Liston A 1104 и не более 30 минут - для аквадистилляторов Liston A 1110 и Liston A 1125

2.1.2. При кипении воды в Испарителе поз.2, образуется водяной пар, который сепарируется и попадает через Канал поз.5 в Конденсатор поз. 6 Сепаратор состоит из Рассекателя потока пара поз.3 и Диафрагмы поз.4, размещённой внутри Канала поз.5.

2.1.3. В Конденсаторе поз. 6 и на Теплообменнике поз.19, пар конденсируется с образованием дистиллированной воды. Уровень воды в

испарителе поддерживается автоматически Уравниателем поз.7 за счет перелива воды в Сливную трубу уравнивателя поз.18.

2.1.4. Корпус Конденсатора поз.6 является одновременно и сборником для дистиллированной воды.

2.1.5. Дистиллированную воду можно получать в непрерывном режиме, не используя Сборник поз.6, отбирая дистиллят через Сливной кран на передней панели в другие емкости.

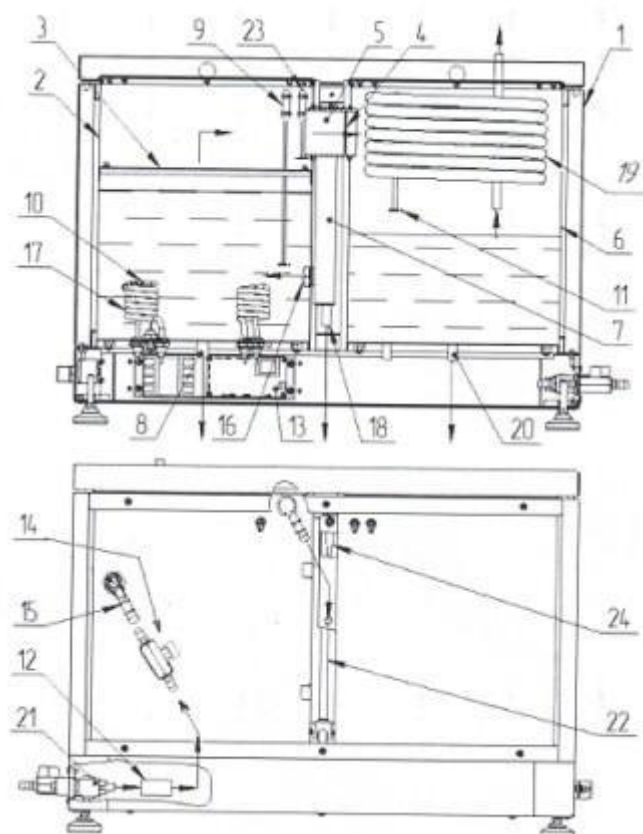


Рисунок 1 Устройство аквадистиллятора электрических Liston A 1125, где:

1 – Корпус; 2 – Испаритель; 3 – Рассекатель потока пара; 4 – Диафрагма; 5 – Канал движения пара, 6 – Конденсатор; 7 – Уравнитель; 8 – Сливной патрубок испарителя; 9 – Нижний датчик контроля уровня в испарителе; 10 – Термостат; 11 – Датчик уровня дистиллята; 12 – Водоподготовитель (опция);	13 – Компоненты электрической схемы; 14 – Кран ограничения расхода; 15 – Вход в конденсатор; 16 – Вход в испаритель; 17 – Нагреватель; 18 – Сливная труба уравнивателя; 19 – Теплообменник; 20 – Сливной патрубок конденсатора; 21 – Клапан подачи исходной воды; 22 – Трубка уровня дистиллята в сборнике; 23 – Верхний датчик контроля уровня в испарителе; 24 – Датчик контроля уровня в уравнителе
---	--

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация аквадистиллятора без подключения к магистрали защитного заземления.

5.2. Дополнительная клемма заземления аквадистиллятора расположена на боковой стороне основания и промаркирована соответствующим знаком.

5.3. Заземляющий контакт розетки питающей сети (к которой осуществляется подключение аквадистиллятора) должен быть соединен с магистралью защитного заземления.

5.4. ВНИМАНИЕ! Предприятие - изготовитель не несет ответственности за безопасность при эксплуатации аквадистиллятора в случае отсутствия заземления или неправильном заземлении во внешней электрической сети.

5.5. Предприятие - изготовитель не несет ответственности за безопасность при эксплуатации аквадистиллятора Liston A 1104 в случае подключения аквадистиллятора к внешней электрической сети без использования кабеля с вилкой, которые поставляются вместе с изделием.

5.6. Перед включением аквадистиллятора Liston A 1104 в электрическую сеть визуально убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.

5.7. Все работы по устранению неисправностей и ремонту аквадистиллятора должны выполняться организациями, имеющими право на ремонт и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АКВАДИСТИЛЛЯТОРА ОТ СЕТИ.

5.8. К эксплуатации аквадистиллятора допускаются только лица, ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации и прошедшие инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок».

5.9. ВНИМАНИЕ: Воспрещается - оставлять включенный аквадистиллятор без присмотра; - открывать крышки аквадистиллятора во время его работы (во избежание поражения горячим паром!)