

Краткая инструкция гематологического анализатора Elite-3

Средства индивидуальной защиты





Что сделать?	Как сделать?	Фотография
Включение аппарата	Порядок измерения общего анализа крови на ELITE 3. 1. Включение аппарата. Включите анализатор на задней панели с помощью кнопки включения. Когда загрузиться, отобразится главное меню.	
Проведение исследования	2. Проверить реактивы. 3. В главном меню нажимаем измерить и измеряем бланк. 4. Проведение контроля качества: - Зайти в меню нажимаем на контроль качества. - Выбрать лот, нажимаем на кнопку START. 5. Исследование образца крови. - В главном меню нажать измерять, затем новая проба. - Выбираем тип образца в ID пробы. - Ввести номер пробы. - Перевернуть пробирку образца 8 раз для достижения гомогенности результата. - Удалить крышку. - Поместить пробирку с образцом в ротор образца. - Нажать кнопку START. Результаты исследования отправляются в компьютер через интернет по программе РТ МИС.	

Зарегистрируйте данные и ID образца в журнал «Для исследований ОАК».


6. Обслуживание.

При выключении аппарата делаем грубую очистку:

- В главном меню выбрать тех. поддержка.
- Нажать очистка, затем грубая очистка.

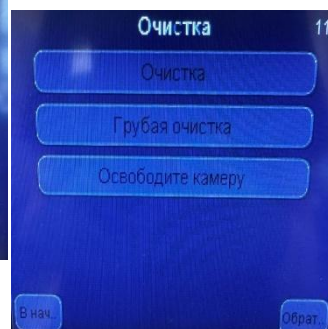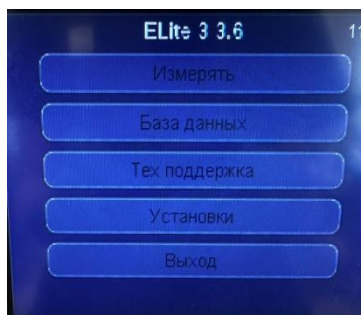


- Разместить очищающий раствор, пробирку с гипохлоридом в ротор и нажимаем кнопку START.
- Извлекаем пробирку с гипохлоридом.

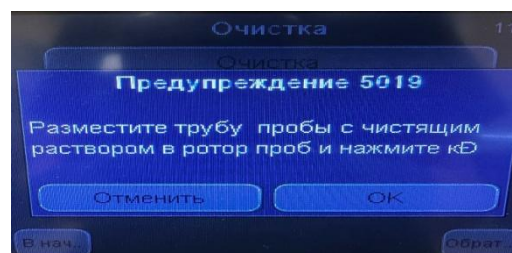

7. Выключение аппарата.

- В главном меню выбрать выход.
- Нажимаем выйти из системы, затем остановка.
- Выключаем кнопку с задней панели.

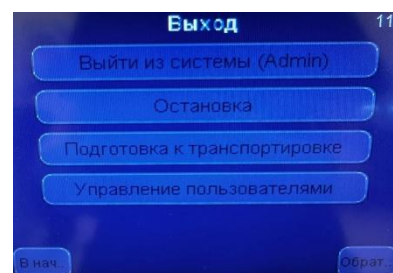

Отходы обеззараживаем с рабочим раствором средства в соотношении указанной в инструкции и выливаем после каждой смены.

