
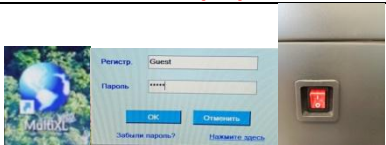


Краткая инструкция для биохимического аппарата ERBA XL 200

Средства индивидуальной защиты

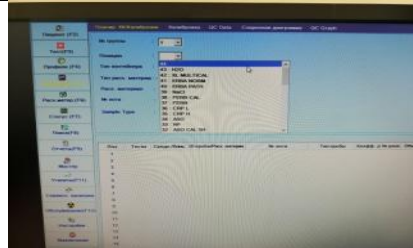

Что сделать?	Как сделать?	Фотография
<u>Включение</u>	Включаем компьютер, нажимаем на ярлык “MultiXL” вводим логин и пароль Guest/Guest и аппарат кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ на задней панели прибора и боковой	
<u>Проверка реактивов</u>	Проверяем уровень реактивов в статусе Реактивы, проверяем уровень промывающего раствора в канистре и в роутере с реактивами и с пробами.	
<u>Проведение контроля качества</u>	Выбираем необходимые позиции для контроля и запускаем контроль качества, при необходимости калибруем с последующим контролем качества	
<u>Исследование образцов</u>	Кликните по кнопке «пациент», введите ID пробы, укажите позицию, тип пробы, тип объема, укажите какие параметры нужны, вернитесь ротор пробы, пуск. Результат распечатать через принтер.	
<u>Обслуживание</u>	В раздел обслуживание и начинаем промывку аппарата	
<u>Выключение</u>	Выход из программы, выключение аппарата кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ на боковой панели прибора и задней, выключение компьютера	