
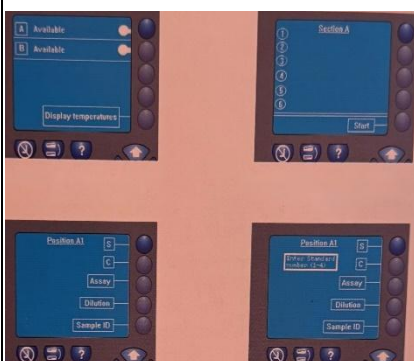


Краткая инструкция для анализатора MINI VIDAS

Средства индивидуальной защиты

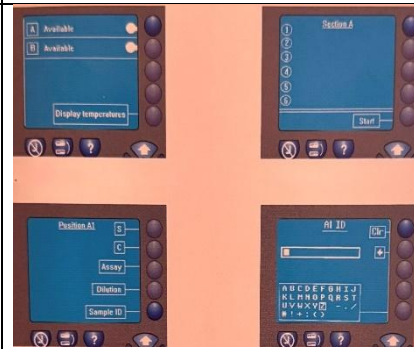

Что сделать?	Как сделать?	Фотография
<u>Включение</u>	Включите анализатор с помощью выключателя питания, расположенного на задней стороне прибора.	
<u>Проведение калибровки со стандартами (s) и контроля (c)</u>	Выберите STATUS SCREEN 1. выберите секцию A или B 2. выберите 1-ю позицию, введя цифру 1. 3. выберите S для стандарта или C для контроля. 4. введите 1 для стандарта под номером 1... Затем нажмите на ввод  . повторите эту операцию для каждого стандарта и контроля, используемого в тесте. Внесите стандарты и контроли в стрипы. Загрузите наконечники SPR и стрипы в анализатор. Запустите анализ выбрав START.	
<u>Проведение идентификации образца на экране статуса</u>	1. выберите свободную секцию (A или B) 2. введите 1 для образца под номером 1... 3. выберите пункт sampleID 4. введите идентификацию образца Затем нажмите на ввод  После ввода данных последнего образца нажимайте на кнопку  пока не появится рабочий список для данной секции.	
<u>Проведение анализа</u>	Поместите стрип (стрипы) и наконечники SPR в секцию, указанную на экране. Внесите необходимый объем образца в соответствующую лунку стрипа. Повторите те же действия для каждого образца. Затем запустите анализ образцов START. Через 30 мин результаты распечатываются автоматически. В конце извлеките стрип (стрипы) и наконечники SPR из секции.	
<u>Обслуживание</u>	Ежемесячно: -очистка блока наконечников SPR -очистка оптической линзы -выполнение теста контроля качества QCV: 1.поместите наконечники и стрипы в каждую позицию каждой секции 2.нажмите START (идентификация позиций не требуется).	
<u>Выключение</u>	Выключите анализатор с помощью выключателя питания.	