

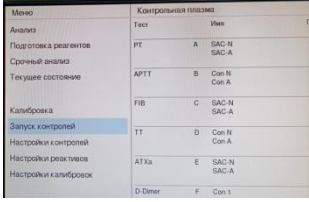
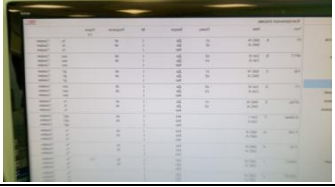
Краткая инструкция для анализатора Trombolyzer

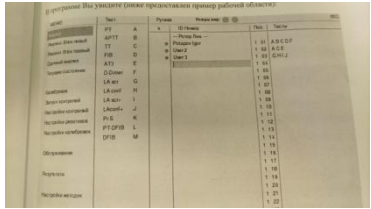
Средства индивидуальной защиты



Перед включением прибора убедись в том что:

1. Трубки, идущие к иглам, корректно установлены, отсутствует течь жидкости из трубок и мест их соединений(в области для оператора)
2. Емкость для подачи деонизированной воды к прибору заполнена;
3. Емкость для слива отходов опустошена;
4. Кюветы установлены на борту прибора;
5. Установлены штатив предразведений;
6. Реагенты станции корректно установлены, поставлены растворы « Clean», **крышки с флаконов сняты.**

Что сделать	Как сделать	Фото
<u>Включение</u>	Кнопка включения находится на левом боку прибора, под наклейкой с серийным номером. Затем включите ПК. В окне входа введите пароль «Labhead», подтвердите ввод клавишей «Enter» 2 раза	
ВНИМАНИЕ! После входа в программу, прибор начнет выполнять самодиагностику, при этом будут движения приводов диспенсеров.		
<u>Проведение контроля качества</u>	Когда в левом нижнем углу появится надпись «Compact X готов» -Вы можете приступить к работе. Расставьте реагенты на борту. Для КК используются стандартные контрольные материалы. В области «МЕНЮ», используя навигационные стрелки на клавиатуре , выбираем «Запуск контролей», нажимаем клавишу «Enter» . курсор перемещается в область «Контрольная плазма» → «Запуск»→ «Нет». Для запуска нужного КК используем клавишу «Пробел» на клавиатуре. Статус «Запуск» изменится на «ДА»→ нажимаем клавишу «ESC».	  

<u>Проведение анализа</u>	Загрузите пробирки с кровью на борт анализатора и выполняйте исследование. В меню выбрать «Анализ» «Enter» номер → выберите тесты используя аббревиатуры → выйти в «Меню» → «F2» (запуск работы)	
<u>Обслуживание</u>	Каждый день : 1. Проверка исходного положения иглы; 2. Проверка жидкостной системы; 3. Проверка системы трубок Еженедельный уход: 1. Автоматическая чистка иглы; 2. Чистка поверхности иглы в ручную; 3. Очистка измерительного блока	
<u>Включение</u>	Выберите меню «Выход» в программе, подтвердите нажав клавишу «Enter» два раза. ВНИМАНИЕ! Приводы диспенсеров начнут движение, будет выполнен процесс промывки. Интерфейс программы сменится окном входа. Мышкой выберите «Menu» → Shut down → Turn off computer для выключения ПК. Выключить с помощью кнопки на левом боку прибора.	