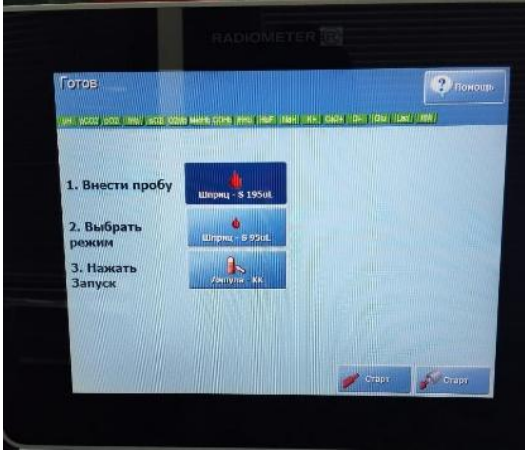


Безопасная эксплуатация газоанализатора «ABL800FLEX»

Этапы выполнения работ:

Средства индивидуальной защиты	
	

Что сделать?	Как сделать?	Фотография
Включение аппарата	1. Порядок измерения пробы газов крови. 1.1. Включение аппарата. Кнопкой ВКЛ и ВЫКЛ включите аппарат. Дождитесь полного включения и готовности аппарата. Надпись ГОТОВ в левом верхнем углу монитора свидетельствует о полной готовности анализатора к	
Проведение исследования	1.Отбор венозной крови. - Шприц несколько раз переверните и покрутите его между ладонями. 2. Отбор капиллярной крови. - Перемешайте пробу в капилляре с помощью магнита. - Передвиньте проволоку для перемешивания к концу капилляра, противоположному тому, из которого будет произведена аспирация крови. - Снимите оба наконечника капилляра. 3.Введение пробы из шприца. - Удостоверьтесь, что анализатор находится в режиме готовности. - Поднимите входной клапан шприца.	

- Плотно вставьте наконечник шприца во входное отверстие.
- Выберите нужный режим, нажав на соответствующую кнопку, нажмите **СТАРТ**.
- Для запуска измерения нажмите на кнопку **АСПИРАЦИЯ**.
- После сигнала удалите шприц и закройте входной клапан.
- Ведите данные на экране **ИДЕНТИФИКАЦИЯ**.

4.. Введение пробы из капилляра.

- Удостоверьтесь, что анализатор находится в режиме готовности.
- Удалите наконечники капилляра.
- На конец, где нет проволоки, наденьте уловитель сгустка.
- Поднимите входной клапан капилляра.
- Введите капилляр концом, где уловитель сгустка, во входное отверстие.
- Выберите нужный режим, нажав на соответствующую кнопку, нажмите **СТАРТ**.
- После сигнала удалите шприц и закройте входной клапан.
- Ведите данные на экране **ИДЕНТИФИКАЦИЯ**.

5. Идентификация пациента.

- Выберите из списка направление в программе РТ МИС;
- Возьмите направление в работу;
- В окне « ID пациента» введите номер направления который был присвоен при взятии его в работу (XXXX).
- Результаты исследования отправляются автоматически в программу РТ МИС.
- Проверьте результат в программе и одобрите это.
- зарегистрируйте данные и ID пациента в журнал «Для исследований газов крови».

