


Краткая характеристика полуавтоматического мочевого анализатора LAURA

Средства индивидуальной защиты

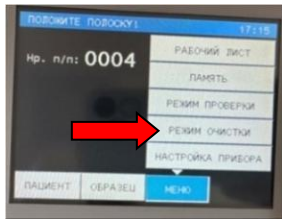

Что сделать?	Как сделать?	Фотография
<u>Включение</u>	Включить прибор его основным выключателем, находящимся на задней панели прибора, анализатор будет производить самотестирование; После успешного тестирования анализатор покажет сообщение «ОК» и перейдет в режим готовности	
<u>Проведение контроля качества</u>	Смочить полоску в образце 1 (норма) и 2 (патология). Удалите избыток реактива с полоски. (Промокните тестполоску, мягко прижимая край полоски к хлопковой салфетке). Поместите полоску на устройство подачи полосок. Результат автоматически распечатывает встроенный принтер.	
<u>Проведение исследования</u>	- Ввести данные о пациенте: ПАЦИЕНТ / иконка ИН / XXXXX/ ОК - После введения номера загорится зеленый свет двухцветного диода. Это означает, что можно положить полоску на устройство. - Смочить полоску в образце мочи - Удалите избыток мочи с полоски. (Промокните тестполоску, мягко прижимая край полоски к хлопковой или бумажной салфетке (см. инструкцию для полосок ФАН ЛАУРА). - Поместите полоску на устройство подачи полосок. -Результат автоматически распечатывает встроенный принтер / передает в РТ МИС	  
<u>Очистка прибора:</u>	После завершения ежедневных измерений необходимо проводить очистку анализатора. Вынуть контейнер для использованных полосок, который находится на правой, нижней стороне прибора. - Утилизировать используемые полоски в отходы класс Б - Обработать контейнер дезинфицирующим средством. -Очистить устройство подачи полосок, используя функцию МЕНЮ/ОЧИСТКА (смотри раздел 3.6 «Режим очистки» в инструкции пользователя	
<u>Выключение</u>	- Выключить анализатор его основным выключателем, находящимся на задней панели прибора.	