

Краткая инструкция для стерилизатора воздушного ГП-80-0х-«ПЗ» УХЛ4.2

Установить выключатель в положение " I ". На блоке управления загорится индикаторпоказывающий текущую температуру в стерилизационной камере(поз.7) .

Для выбора программы стерилизации нажать на поле "РЕЖИМ" и выбрать «▽», «Δ» (поз. 5 и 9)нужную программу путем нажатия на одно из полей.

Для запуска выбранной программы кратковременно (не более 2 сек) нажать на поле (поз.6). Стерилизатор перейдет в фазу «ПОДГОТОВКА».

Информационное табло индицирует изменение температуры в камере. Происходит нагрев до установленного значения температуры.

При достижении заданной температуры стерилизатор переходит в фазу «СТЕРИЛИЗАЦИЯ». Включается светодиодный индикатор "СТЕРИЛИЗАЦИЯ"(поз.3), информационное табло попеременно индицирует время выдержки и текущую температуру в камере. Происходит выдержка при заданной температуре, по истечении которой стерилизатор переходит в фазу «ОХЛАЖДЕНИЕ».

В фазе «ОХЛАЖДЕНИЕ» индикатор продолжает показывать изменение температуры в камере и горит индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ" (поз. 2). Температура вкамере падает. При понижении температуры до 75°С гаснет индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ", загорается индикатор "ВЫГРУЗКА" (поз.1) и звучит прерывистый звуковой сигнал, который выключается через 1 минуту.

Для воздушного стерилизатора ГП-80-Ох-ПЗ дополнительно предусмотренрежим стабилизации выхода на заданную температуру. По достижении заданнойтемпературы стерилизатор переходит в фазу «СТЕРИЛИЗАЦИЯ» примерно через 30минут.

Расположение органов управления стерилизаторами на блоке управления

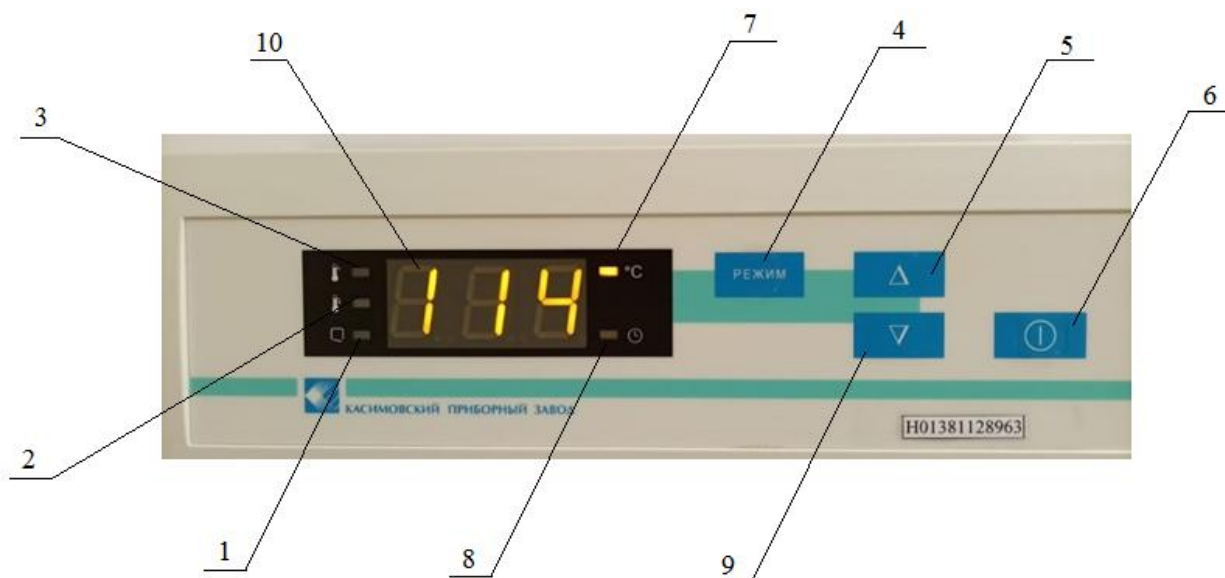


Рисунок 1 . 1-индикатор «ВЫГРУЗКА»; 2- индикатор « ОХЛАЖДЕНИЕ»; 3-индикатор «СТЕРИЛИЗАЦИЯ»; 4- поле включения режима выбора номера программы;5,9- поля выбора номера программ стерилизации; 6- поле «ПУСК»/«СТОП»; 7- индикатор отображения температуры; 8-индикатор отображения времени;10- информационное табло.

ВНИМАНИЕ! При нажатии на поле "⏻" в течении времени менее 2 секунд, блок управления выдает команду «ПУСК» стерилизатора, при нажатии на поле "⏻" в течении времени более 3 секунд, блок управления выдает команду «СТОП», отключая рабочий режим стерилизатора.