

Краткая инструкция для анализатора ABL800 FLEX


Средства индивидуальной защиты



Что сделать?	Как сделать?	Фотография
Включение аппарата	Кнопкой ВКЛ и ВЫКЛ включите аппарат. Дождитесь полного включения и готовности аппарата. Надпись ГОТОВ в левом верхнем углу монитора свидетельствует о полной готовности анализатора к работе.	
Проведение исследования	1.Отбор венозной крови. -Шприц несколько раз переверните и покрутите его между ладонями. 2. Отбор капиллярной крови. - Перемешайте пробу в капилляре с помощью магнита. - Передвиньте магнит для перемешивания к концу капилляра, противоположному тому, из которого будет произведена аспирация крови. - Снимите оба наконечника капилляра. 3.Введение пробы из шприца. -Удостоверьтесь, что анализатор находится в режиме готовности. - Поднимите входной клапан шприца. -Плотно вставьте наконечник шприца во входное отверстие. -Выберите нужный режим, нажав на соответствующую кнопку, нажмите СТАРТ. -После сигнала удалите шприц и закройте входной клапан. -Ведите данные на экране ИДЕНТИФИКАЦИЯ. 4. Ведение пробы из капилляра. - Удалите наконечники капилляра. На конец, где нет проволоки, наденьте уловитель сгустка. -Поднимите входной клапан капилляра и введите капилляр концом, где уловитель сгустка, во входное отверстие. -Выберите нужный режим, нажав на соответствующую кнопку, нажмите ЗАПУСК. -После сигнала удалите капилляр и закройте входной клапан. -Введите данные на экране ИДЕНТИФИКАЦИЯ.	

Идентификация пациента

- Выберите из списка направление в программе РТ МИС;
- Возьмите направление в работу;
- В окне « ID пациента» введите номер направления который был присвоен при взятии его в работу (XXXX).
- наберите нужные данные пробы (режим измерений, параметры, ФИО, дату рождения, отделение)
- Результаты исследования отправляются автоматически в программу РТ МИС.
- Проверьте результат в программе и одобрите это.
- Зарегистрируйте данные и ID пациента в журнал «Для исследований газов крови».

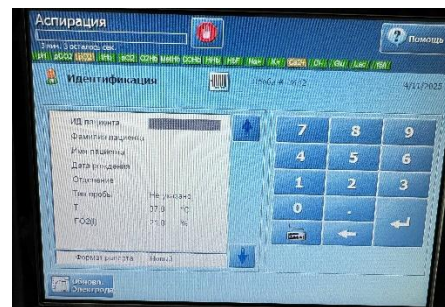

Выключение аппарата

Войдите в программу «временное отключение». Нажмите на кнопку подтвердить отключение. И кнопкой **ВЫКЛ** выключить аппарат.

